



THE FLYER™

**Drosophila Product Update DRC
2023**

Droso-Filler™
Media dispensers available!

Page 6




Drosophila Closures
Best mite barrier available!

Page 5



Anesthesia
Convenient and precision flow control.

Page 7

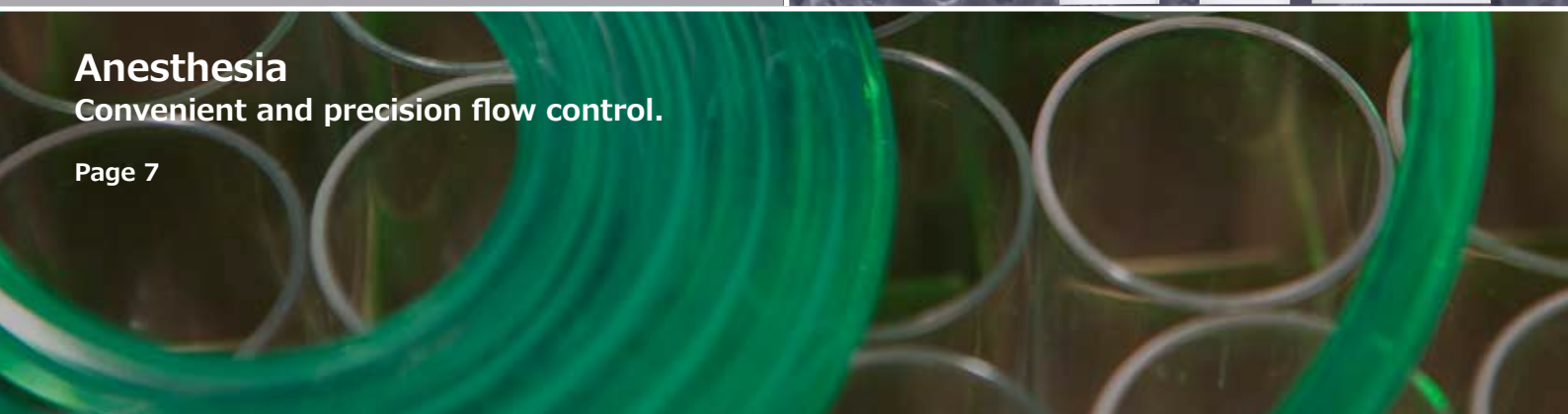

Genesee 詰替えシステム

Fly Vial 詰替えシステム

特許番号：D673,296 S; 8,136,679 B2; and 8,430,251 B2

パッケージは
100%
リサイクル可能



バルクをご使用ですか？ ラックへの詰替え時間の短縮ができます！

- ・ バルクパックからのラック詰めに必要な平均時間：15分
- ・ 詰替えシステムを使用した場合の平均所要時間：約 1 分
- ・ 確実に500本入り：足りないことはありません。
- ・ バイアルの透明度低下の原因となる傷や段ボールくずの心配がありません。
- ・ 品質そのままにコスト削減が可能です。

トレー入りをご使用ですか？ コストの削減が可能です！


- ・ ラック入りバイアルよりもお得です。
- ・ 環境への配慮：紙製ラックの削減が可能です。
- ・ 省スペース：トレー入りに比べ小さい保管スペース
- ・ ラック入り同様すぐに使用できます。



詰替えバイアル（細口のみ）


包装：500本(100本x5トレー)

カタログNo.	タイプ	材質	外径x高さ	希望販売価格
32-109RL	細口	ポリスチレン	25x95mm	¥18,500
32-113RL	細口	ポリプロピレン	25x95mm	¥23,900

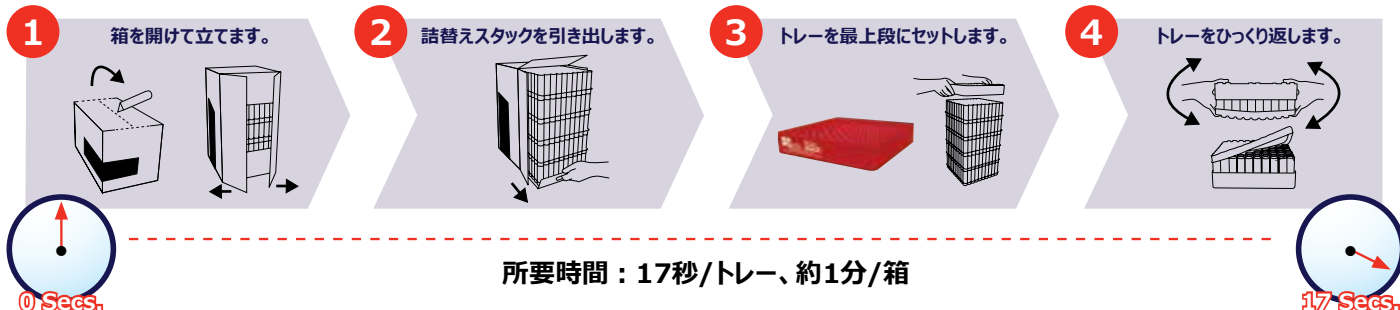

プラスチック製詰替えトレー

- ・ 従来の紙製トレーと異なりダニが侵入することがありません。
- ・ 精密な金型成型：バイアルがぴったりフィットします。
- ・ 部分的な使用も可能です。
- ・ 丈夫なので継続的に使用できます。
- ・ 洗浄が容易：漂白剤や洗浄機が使用可能

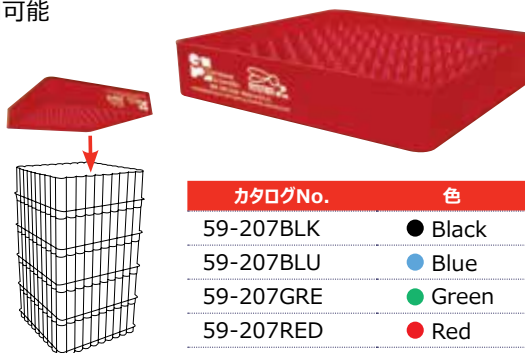

サイズ：26.35x26.35x5cm
細口バイアル用
オートクレーブ不可
洗浄機の乾燥サイクルは使用しないでください。

カタログNo.	色	包装	希望販売価格
59-207BLK	● Black	12個(12個x1パック)	¥78,000
59-207BLU	● Blue	12個(12個x1パック)	¥78,000
59-207GRE	● Green	12個(12個x1パック)	¥78,000
59-207RED	● Red	12個(12個x1パック)	¥78,000
59-207WHI	○ White	12個(12個x1パック)	¥78,000

バイアル

ショウジョウバエ用バイアル

高品質なショウジョウバエ用バイアルは最高品質のポリスチレン、ポリプロピレンおよびK-レジンを使用した精密な金型成型で製造されています。バイアルにはバルクパック、トレー入りおよび詰替えシステム（細口バイアルのみ）のご用意があります。ラック入りバイアルは10×10フォーマットにより、バイアルへの重点を迅速かつ容易にしています。バルクパックはバイアルの開口部を上向きに梱包することで取り扱いを容易にしています。また、梱包サイズも小さいので、保管場所の省スペース化が可能です。

ポリスチレン

視認性に優れた高い透明度を有しています。ポリスチレン製バイアルはガラス製バイアルに比べ、安全でコストも低減されます。ポリスチレン製バイアルはオートクレーブ滅菌はできません。

ポリプロピレン

ポリプロピレン製バイアルは良好な透明性とコストパフォーマンスを有しており、割れる危険性も低減されています。

ポリプロピレン製バイアルはオートクレーブ滅菌（121℃/15psi/15分）が可能です。

K-レジン

K-レジン製バイアルはガラスのような透明度を持つとともに、丈夫さを兼ね備えています。この独自の材質は非常に柔軟で、割れにくく傷にも強くなっています。したがって、ショウジョウバエの輸送に最適です。K-レジン製バイアルはオートクレーブ滅菌はできません。

これまでのポリプロピレンバイアルに比べ透明度が高く、低コストでK-レジンのように丈夫なポリプロピレン製バイアルを是非お試しください。



トレー入りバイアル

包装：500本(500本x1パック)

カタログNo.	タイプ	材質	外径x高さ	希望販売価格
32-109	細口	ポリスチレン	25x95mm	¥22,500
32-110	広口	ポリスチレン	28.5x95mm	¥26,500
32-111	細口	K-レジン	25x95mm	¥32,500
32-113	細口	ポリプロピレン	25x95mm	¥23,000
32-114	広口	ポリプロピレン	28.5x95mm	¥24,300

トレー入り



バルクパックバイアル

包装：500本(500本x1パック)

カタログNo.	タイプ	材質	外径x高さ	希望販売価格
32-116	細口	ポリスチレン	25x95mm	¥16,900
32-117	広口	ポリスチレン	28.5x95mm	¥22,100
32-118	細口	K-レジン	25x95mm	¥23,300
32-120	細口	ポリプロピレン	25x95mm	¥20,000
32-121	広口	ポリプロピレン	28.5x95mm	¥22,100



バルクパック

開口部が上向きで、ラック詰めが簡単！

SUPERBULK® パックバイアル

1,000本(1,000本x1パック)

バイアルをハチの巣状に配列することにより、破損の危険性を低減させていると同時に、梱包サイズが小さくなり輸送コストの低減、保管スペースの省スペース化を可能にしています。開口部を上面にしていることで、ケースからトレーへの詰替えを容易にしています。箱を傾け、丈夫のバイアルから順にトレーに移動させるだけです。また、切り取り可能なパッケージを採用することで、底部のバイアルへも容易にアクセスすることが可能です。

- ・ 省スペース
- ・ 輸送コストの低減
- ・ 破損リスクの低減
- ・ 取り出してトレーにセットするだけ
- ・ 大幅な時間節約

カタログNo.	タイプ	材質	外径x高さ	希望販売価格
32-116SB	細口	ポリスチレン	25x95mm	¥32,100

- ・ パッケージ(紙)25%削減
- ・ 体積15%削減
- ・ 破損リスク50%削減

通常のバルクパック

スーパーバルクパック



ボトル

ショウジョウバエ保存用ボトル

- ・ ポリプロピレン製：良好な透明度と柔軟性、オートクレーブ滅菌可能



カタログNo. 32-129F
外径：6.03cm
高さ：13.02cm

Cat #	Description	Material	Qty / Unit	List Price
32-129F	保存用ボトル 8oz	ポリプロピレン	250本(250本x1パック)	¥57,200

クロージャー

Flugs® クロージャー

- Flugsクロージャーは、ショウジョウバエ用バイアルやボトル用の接着密織りセルロースアセテートプラグです。
- コットン製、レーヨン製、紙製、発泡製プラグよりもダニに対するバリア性が高く、最高の防ダニクロージャーです。
- 脱落が少なく、蒸発を抑えるので、エサの鮮度が長持ちします。



カタログNo. 49-100
保存用ボトル

カタログNo. 49-101
プラスチックバイアル (広口)

カタログNo. 49-102
プラスチックバイアル (細口)

カタログNo. 49-103
ガラスおよび
ショートバイアル


カタログNo.	適用	包装	希望販売価格
49-100	保存用ボトル	1,000個(1,000個x1パック)	¥58,000
49-101	プラスチックバイアル (広口)	1,000個(1,000個x1パック)	¥26,900
49-102	プラスチックバイアル (細口)	1,000個(1,000個x1パック)	¥23,400
49-103	ガラスおよびショートバイアル	1,000個(1,000個x1パック)	¥23,500

Droso-Plugs®

- 高密度発泡体プラグ
 - 防御能を向上させるために高さを高くしています。
 - 抜き差しが容易なプラグ
 - 再利用可能 (洗浄・オートクレーブ (121°C/15psi/15分) 可能*)
- *変形等生じる場合がありますので、最初に少量でお試ください。



オートクレーブ可能

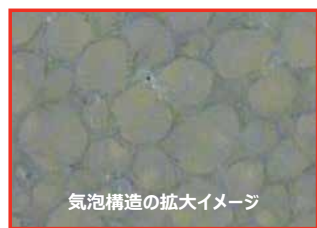

気泡構造の拡大イメージ

1mm

気泡構造

独自の公称密度92.1kg/m³により、驚くほど緻密な気泡構造 (1平方センチメートルあたり300万個の微小な気泡) を実現しています。

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
59-194	Droso-Plugs ストックボトル用プラグ	1,536個(1536個x1パック)	¥146,000
59-194P	Droso-Plugs プラスチックボトル用プラグ	2,560個(2560個x1パック)	¥261,600
59-200	Droso-Plugs 細口バイアル用プラグ	6,760個(6760個x1パック)	¥178,400
59-201	Droso-Plugs 広口バイアル用プラグ	4,840個(4840個x1パック)	¥173,700

* Results may vary after autoclaving. Test a small amount first.

コットン/レーヨンボール

- 形状や大きさが均一な効果的なプラグ
- ダニの侵入を防ぐ効果的なバリアーです。

カタログNo.	材質	適用	包装	希望販売価格
51-101	コットンボール Lサイズ	細口バイアル	2,000個(2000個x1パック)	¥21,700
51-102W	コットンボール XLサイズ	広口バイアル	2,000個(2000個x1パック)	¥49,000
51-102B	コットンボール XLサイズ	ボトル	2,000個(2000個x1パック)	¥110,500
51-100	レーヨンボール Lサイズ	細口バイアル	2,000個(2000個x1パック)	¥22,500



コットン/レーヨンロープ

- 医薬品グレード：USPに準拠した精製コットン・レーヨンを使用
- 様々な容器に効果的に栓をするために、必要な大きさにちぎって使用することができます。

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
52-100	レーヨンロープ	9kg (20lb)	¥67,600
52-101	コットンロープ	7.7kg(17lb)	¥72,800


好きな大きさに



ショウジョウバエ 胚収集

胚収集ケージ

- ・ 丈夫なアクリル製
- ・ 底部のキャップには柔軟性のあるポリエチレンを使用し、ケージの状態を保ったままテープ等を使わずにペトリディッシュに固定できます。
- ・ ケージの上部にステンレスメッシュ（97um）を装着することで、呼吸を確保しながら、濃縮を防ぎます。

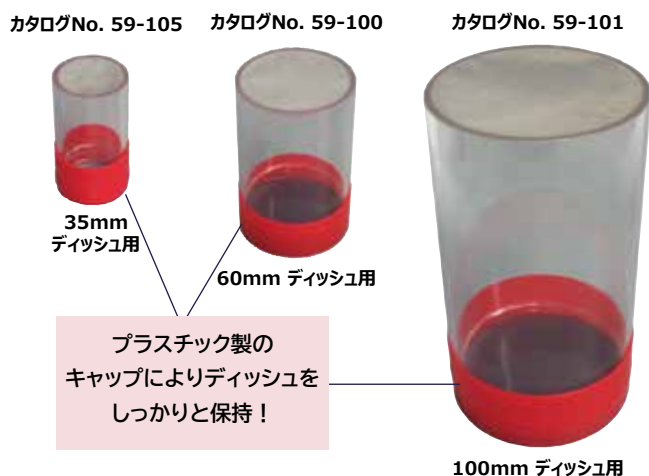

カタログNo.	商品名	適用	包装	希望販売価格
59-105	胚収集ケージ ミニ	35mm	4個(4個×1パック)	¥14,300
59-106	胚収集ケージ 交換キャップ ミニ用		8個(8個×1パック)	¥4,800
59-100	胚収集ケージ スモール	60mm	4個(4個×1パック)	¥19,100
59-102	胚収集ケージ 交換キャップ スモール用		8個(8個×1パック)	¥3,900
59-101	胚収集ケージ ラージ	100mm	4個(4個×1パック)	¥33,400
59-103	胚収集ケージ 交換キャップ ラージ用		8個(8個×1パック)	¥4,800

洗浄法：中性洗剤を使用してください。エタノールなどのアルコールは使用しないでください。

Droso-Filler™

Droso-FillerメディアディスペンサーはGenesee Scientific社が独占的に供給しています。容器にお好みのショウジョウバエのメEDIUMを入れ、トレイに次々と流し込むだけで、素早く処理できます！ 食品用ステンレス製で、スライドプレートはテフロン製です。



- ・ 5年保証
- ・ 3種類のサイズのご用意があります。細口・広口バイアルであれば100本、角形ボトルであれば25本同時に処理することができます。
- ・ バックストップの調整により、ほぼすべてのトレイに対応可能。

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
59-168	Droso-Filler 細口バイアル用	1個(1個×1パック)	¥1,342,300
59-169	Droso-Filler 広口バイアル用	1個(1個×1パック)	¥1,303,000
59-170	Droso-Filler 角形ボトル用	1個(1個×1パック)	¥1,303,000

The Ultimate Flypad

Flystuff® Flypad

FlyStuff Flypadは、ショウジョウバエ研究用の最高品質のCO₂フローベッドであり、ショウジョウバエ研究に必須なアクセサリです。このCO₂フローベッドは、1/8インチUHMW多孔性ポリエチレンプラスチックと3/4インチアクリルベースからできています。ベースには精密な流路があり、ステーjingエリア全体に最適で一貫したCO₂の拡散を保証します。FlyStuff Flypadは内径1/8インチ(3mm)チューブに適合するニッケルメッキ真鍮製ホースバンプ入力を備えています(ご要望に応じて、内径1/4インチ(6mm)チューブに適合するものに変更することが可能です)。



Flypadフレーム (オプション)



- ご要望に応じて、3種類の入力オプションがあります。
- 属筐体により静電気の発生を抑制
- パッドは簡単に交換できます。



表面は交換可能!

詳細はflystuff.com/documentsをご参照ください。

UHMW多孔質ポリエチレンのステーjingエリアは、反りのない表面と最適なCO₂の拡散を提供します。

“ゼロエッジ”リムより簡単に、より安全にショウジョウバエの除去ができます。

サイズは2種類!



内径1/4インチ(6mm)チューブに適合するものに変更することが可能です

Flystuff® Flypad

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
59-114	Flypad標準サイズ (8.1x11.6cm)	1個(1個x1パック)	¥46,000
59-118	Flypadフレーム 標準サイズ	1個(1個x1パック)	¥13,500
59-119	Flypadラージサイズ (10.1x14cm)	1個(1個x1パック)	¥49,000
59-120	Flypadフレーム ラージサイズ	1個(1個x1パック)	¥12,200
59-172	Ultimate Flypadホワイト (8.9x12.4cm)	1式	¥178,000
59-172B	Ultimate Flypad ブラック (8.9x12.4cm)	1式	¥178,000
59-199	交換用ホワイトサーフェース	5枚(5枚x1パック)	¥20,400
59-199B	交換用ブラックサーフェース	5枚(5枚x1パック)	¥23,000

麻酔用器具

Flystuff® Flowbuddy™ フローレギュレーター

Flowbuddyフローレギュレーターは、あらゆるCO₂ショウジョウバエワークステーションに利便性と精密な流量制御を提供します。Flowbuddyは、複数のフライパッドと1つのCO₂ソースを持つファイルームに最適です。



Flowbuddy (壁掛け用)



コンプレットシステム
(ベンチトップ用)

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
59-122B	Flowbuddyフローレギュレーター	1個(1個x1/パック)	¥133,400
59-122BC	Flowbuddyフローレギュレーター コンプレットシステム Flypad付	1式	¥195,000
59-122BCU	Flowbuddyフローレギュレーター コンプレットシステム Ultimate Flypad付	1式	¥249,000
59-122W	Flowbuddyフローレギュレーター(壁掛け用)	1個(1個x1/パック)	¥133,400
59-122WC	Flowbuddyフローレギュレーター(壁掛け用)コンプレットシステム Flypad付	1式	¥213,500
59-122WCU	Flowbuddyフローレギュレーター(壁掛け用)コンプレットシステム Ultimate Flypad付	1式	¥308,300

Flystuff® フットペダル

- 500%以上のCO₂削減を目指した設計です。
- ショウジョウバエへの過剰な麻酔を防止します。
- CO₂タンク交換の頻度を減らすことが可能です。
- 0.125インチチューブ用院中世インレット・アウトレット装備



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
59-121	Flystuffフットペダル	1個(1個x1/パック)	¥45,000
59-121C	Flystuffフットペダル コンプレットシステム* Flypad付	1式	¥130,000
59-121CU	Flystuffフットペダル コンプレットシステム* ultimate Flypad付	1式	¥210,000

* コンプレットシステムの構成：フットペダル (1個)、FlypadおよびFlypadフレーム (下記1個、59-121C) またはUltimate Flypad (59-121CU)、0.125インチチューブ (5フィート)、Tフittings (1個)、ブローガン (1式、0.125インチコイルチューブ、1.18インチニードル付)

◆ お願いおよび注意事項 ◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年4月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。



Luer lock
for needles

ロングニードル (54-119 L) を取り付けた状態のFlystuffブローガン

Flystuff® ブローガン

ピストルグリップタイプのFlystuffブローガンは、流量の可変制御が可能で、軽量かつ人間工学に基づいており、あらゆるCO₂麻酔器具を完璧に補充することができます。出力は、0.04インチのステンレススチール針先とニッケルメッキされた真鍮のベースです。針の長さは1.18インチで、コットン、レーヨンプラグでの使用に最適な長さです。流入側は真鍮製で内径0.125インチとなっており、当社標準サイズのチューブに適合します。

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
54-104	Flystuffブローガン	1個(1個x1/パック)	¥25,700
54-104M	Flystuffブローガン ミニ	1個(1個x1/パック)	¥29,900
54-119	ブローガン用ニードル (0.04 x 1.18インチ)	1個(1個x1/パック)	¥3,900
54-119L	ブローガン用ロングニードル (0.79 x 1.73インチ)	1個(1個x1/パック)	¥4,400
54-119N	ルアーロックアダプター	1個(1個x1/パック)	¥2,200

アクセサリ



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
59-210	Flypad用フローコントロールフittings	1個(1個x1/パック)	¥8,300
59-140	延長用チューブコネクター	1個(1個x1/パック)	¥700
59-125	コイルチューブ (91.4cm)	1本(1本x1/パック)	¥8,300
59-124C	CO ₂ 用チューブ クリア 30.5cm	1本(1本x1/パック)	¥500
59-124G	CO ₂ 用チューブ グリーン 30.5cm	1本(1本x1/パック)	¥500
59-209	ブローガン用コントロールフittings	1個(1個x1/パック)	¥8,300
59-210	Flypad用コントロールフittings	1個(1個x1/パック)	¥11,000
59-123	Tフittings	1個(1個x1/パック)	¥1,200
59-179	3/16インチ (4.75mm) チューブコネクター	1個(1個x1/パック)	¥1,300
59-178	1/4インチ (6.4mm) チューブコネクター	1個(1個x1/パック)	¥1,700
59-143-EU	凍結防止用レギュレーター	1個(1個x1/パック)	¥260,000

■ 代理店