

Palm PCR™ S1 **Ultra-fast Real-time PCR System**



**発売
再開!**

Ahram Biosystems は
PCRイノベーションの最先端を切り開き、超高速モバイルリアルタイムPCRマシンを開発しました。
この最新式のモバイルツールがあれば、電源や環境の制限を受けることなく、
いつでも、どこでも、即座にPCRを開始し、完結させることができます。
ぜひ、この圧倒的なイノベーションによるバイオテクノロジーの未来をあなたの手に。

超高速&マルチプレックス



Palm PCR™ S1は、15分以下の超高速で、マルチプレックスリアルタイムPCRを可能にしました。
また非常に高感度であり、1コピーのサンプルからでも正確な結果を導き出すことができます。

革新的なコンペクション型PCRテクノロジーを採用し、1サイクル18秒という前例のない超高速PCRを実現。最大6個のリアルタイムチャンネルを搭載し、マルチプレックスリアルタイムPCRに求められる全てのデータを、高感度に、干渉されることなく明確に、得ることができます。

完全にモバイル



Palm PCR™ S1は、スタンドアロンデバイスで完全な移動式装置です。すべての機能はこの小型の本体にコンパクトにまとめられ、標準装備のリチウムイオンバッテリーにより1回の充電で、4時間連続のPCRを行うことができます。
環境温度：～35℃まで問題なく稼働します。



ワイドタッチスクリーンによって、完全にスタンドアロンで使えるだけでなく、各種インターフェイスを備えおり(Wi-Fi, Bluetooth, USB and LAN) 広い拡張性もあります。

Palm PCR™ S1


Ultra-fast Real-time PCR System



Ahram
BIOSYSTEMS

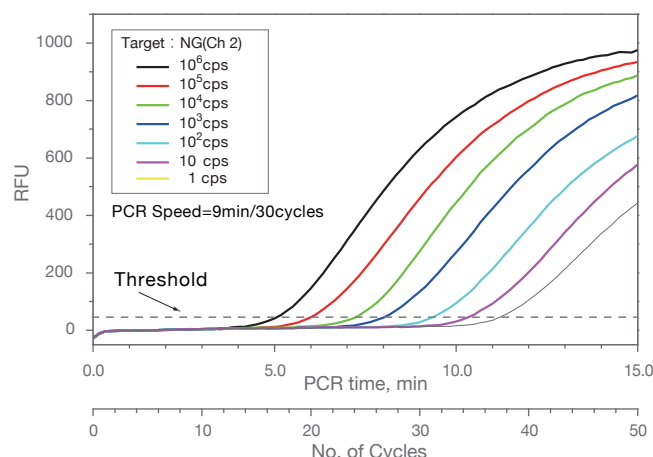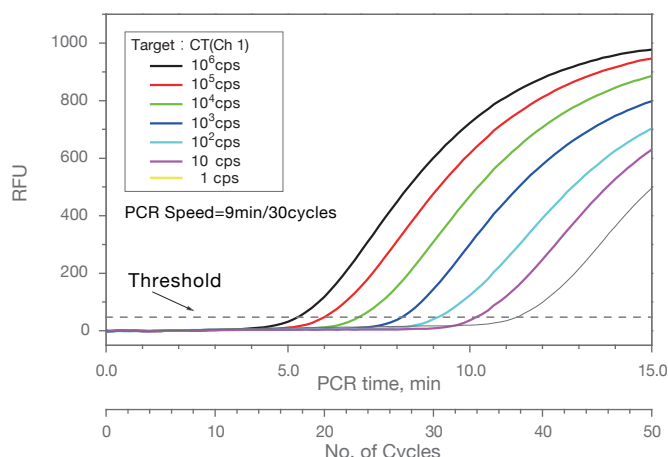

超高速マルチプレックスリアルタイムアッセイによりシングルコピー遺伝子まで高感度に検出

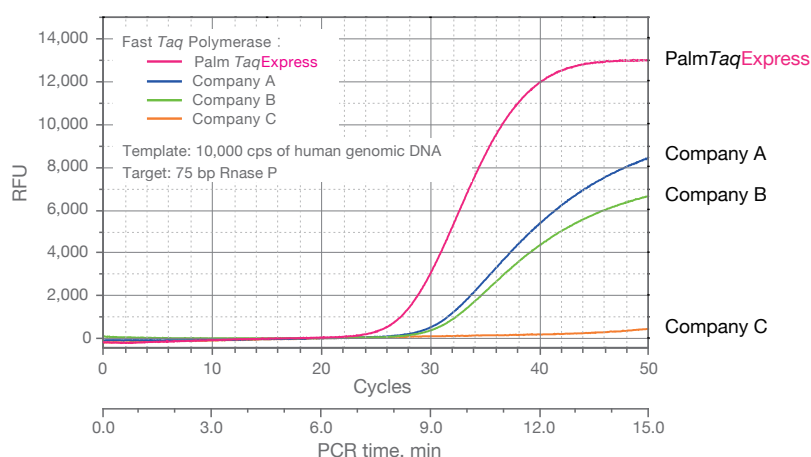

■ 構成

- ・ Palm S1 本体
- ・ リチウムイオンバッテリー
- ・ USB メモリー (PC ソフトウェア含む)
- ・ USB ケーブル
- ・ 電源ケーブル
- ・ マニュアル
- ・ 保証書

超高速・高効率な PalmTaq™ Express

Ahram Biosystemsは、Taqポリメラーゼ (PalmTaq™ Express)、逆転写酵素 (PalmScript™ Express) など、超高速リアルタイムPCRのための各試薬を取り揃えています。

1年保証

カタログNo.	S1024	S1024e
商品名	Palm PCR™ S1 Ultra-fast Real-time PCR System	Palm PCR™ S1e Ultra-fast Real-time PCR System
ウェル数	24	
リアルタイムチャンネル	5	3
最大速度	9分/30サイクル	
感度	～1コピー	
ハイスループット	400テスト以上/8時間	
使用温度範囲	～35℃	
インターフェース	USB、Wi-Fi、LAN	
バッテリー動作	≥ 4時間以上の連続PCR操作/1回チャージ	
サイズ (W×D×H)	195×177×179mm	
重量	3.0 kg (3.8 kg バッテリー含む場合)	
希望販売価格	¥3,323,000	¥2,519,000



Palm PCR™ S1 蛍光色素チャート

Palm PCR™ S1/S1e Filter Sets and Dyes Supported

Channel	Filter Wavelength, nm		Excitation Color	Dyes	Model
	Excitation	Emission			
Ch 1	475 ± 20	520 ± 10	Blue	FAM™, SYBR® Green I, Alexa Fluor 488®	S1,S1e
Ch 2	530 ± 10	565 ± 10	Green	HEX™, JOE™, Cal Fluor® Orange 560	S1,S1e
Ch 3	575 ± 15	620 ± 15	Orange	Texas Red®, ROX™, Cal Fluor® Red 610	S1,S1e
Ch 4	630 ± 10	665 ± 10	Red	Cy5®, Quasar 670, Alexa Fluor 647®	S1
Ch 5	682.5 ± 7.5	725 ± 20	Deep Red	Quasar 705, Cy5.5®, Alexa Fluor 680®	S1

リアルタイムPCRサーマルサイクラー Palm

関連試薬・アクセサリ

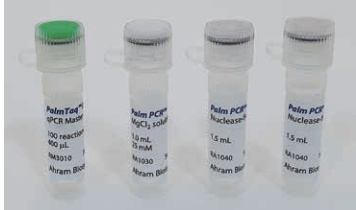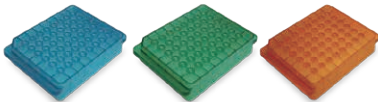カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	
RK3010	PalmTaq™ Express qPCR Master Mix ホットスタート qPCRマスターミックス試薬 (20 µL x 100反応分) 〈内容〉 ・ 5X マスターミックス ・ MgCl ₂ solution ・ nuclease-free water	1 kit	¥ 16,200	
RK7010	PalmTaq™ Express One-step qRT-PCR Kit ワンステップ qRT-PCRマスターミックス試薬 (20 µL x 100反応分) 〈内容〉 ・ 5X マスターミックス ・ 逆転写酵素 (凍結乾燥品) ・ MgCl ₂ solution ・ nuclease-free water	1 kit	¥ 27,700	
C2011	Palm PCR™ リアルタイム サンプルチューブ, タイプ IIA 〈内容〉 96本サンプルチューブ+6連キャップ×16本	1 式	¥ 7,400	
C6010	Palm PCR™ サンプルチューブラック Palm PCR™ サンプルチューブ タイプ IIA用 〈規格〉 ・ 48ウェル (6×8) ・ 色: ブルー、グリーン、オレンジ 注意: ラックの色はお選びいただけません。	1 ラック	¥ 3,500	 注意: ラックの色はお選びいただけません。
C6050	Palm PCR™ マイクロチューブラック 〈規格〉 ・ 20ウェル (4×5) ・ 色: ブルー、グリーン、オレンジ 注意: ラックの色はお選びいただけません。	1 ラック	¥ 3,500	 注意: ラックの色はお選びいただけません。

BMBioリアルタイムPCRサーマルサイクラー

BMBio
ST (Standard & Stable)

snow


特徴

- ◆ ダブルチャンネル、ダブルブロックなので、2つのプログラムを同時に実行可能
- ◆ 小型で軽量なので持ち運びが容易
- ◆ 高性能な分析ソフトウェア - 定性/定量、融解曲線、遺伝子鑑定 - に対応
- ◆ 7インチ高解像度TFTカラータッチスクリーン、Windows10オペレーティングシステムを搭載
- ◆ 20Gのフラッシュメモリを標準装備。40,000件の実験データを保存可能
- ◆ プリンターに直接つなげられるので、コンピュータなしで印刷可能
- ◆ サイドスキャンテクノロジーで光路を短縮でき、安定した蛍光シグナル検出を実現
- ◆ ブラックリアクションブロックによるバックグラウンドのノイズを排除
- ◆ 検出光路を同一にすることで、再現性を向上
- ◆ 光源はメンテナンスフリーで長寿命、環境にもやさしいLED
- ◆ 電磁気ロックカバーを採用し、ホットリッドが不意に開くことを防止
- ◆ 前面のシャットダウンボタンがファイルデータを厳守
- ◆ 定電流回路でスムーズなパワー出力、ペルチェの保護、より正確な温度コントロールを実現
- ◆ 過電流、過加熱などを防ぐ機能および停電時の自動復帰機能を搭載
- ◆ 排熱口が前後についているので複数台並べて設置可能




アプリケーション例

- ・ バイオテクノロジーの研究分野
- ・ 各種伝染病
- ・ 食品安全検査
- ・ 家畜飼育
- ・ 農業、水産業 など

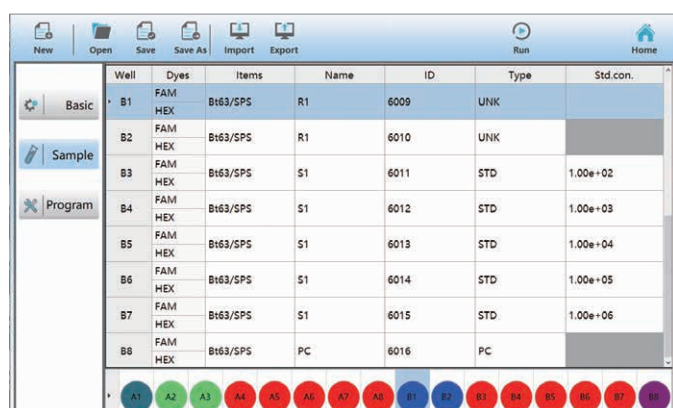

オペレーションシステムはWindowsを採用

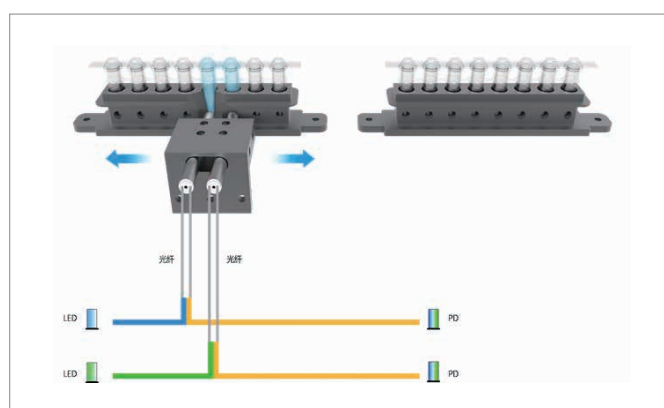

サイドスキャンテクノロジー

サンプル容量	0.2ml×16本 (8ウェル×2ブロック)
対応容器	0.2ml PCRチューブ、8連チューブ
反応容量	10~100μl
温度設定範囲	0~100℃
最大加熱速度	6℃/秒
温度変動	±0.1℃
均一性	±0.25℃
精度	±0.25℃
Lid設定温度	30~115℃
励起波長	460~550nm
蛍光波長	F1:520~540nm, F2:540~580nm
校正済み色素	F1:FAM/SYBR Green, F2:HEX/VIC/JOE/TET

光源	長寿命LED
検出器	高感度光電センサー
ダイナミックレンジ	1-10 ¹⁰ コピー
検出感度	1コピー
出力フォーマット	excel, csv, txt
ディスプレイ	7インチ カラーTFTタッチスクリーン、1280×800ピクセル
インターフェース	wifi, USB2.0
サイズ (W×D×H)	267×300×198mm
重量	5.5kg
電源	100-240V, 50/60Hz, 255W

2年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
BMSHBG0003	snow	1 式	¥1,249,000

構成：本体、ACアダプター、マニュアル、保証書



小型卓上遠心機

2-7



Sigma2-7 は、見やすい角度で整理された鮮明なディスプレイと大型のボタンを装備しています。直感的に操作できるSpincontrol Basic コントロールユニットにより、操作パラメータやプログラムの入力が簡単に行えます。運転時間は秒単位で選択でき、LED ランタイムインジケータは離れた場所からでも容易に見ることができます。

自動的に閉まる電動式のリッドロックは、余分な手間を省くための実用的な機能です。革新的な電子回路は、非常に高いエネルギー効率を実現し、主電源電圧の変動に対する感度を低く抑えています。パワフルなモーターと組み合わせることで、安定した加速・制動時間を実現しています。

2種類の加速・制動プロファイルを備えたSigma 2-7 は、穏やかな加速・制動を必要とする繊細な細胞の遠心分離にも適しています。

- ◆ 高性能小型遠心機
- ◆ 革新的なLEDランニングインジケータにより離れた場所でも運転状況の確認が可能
- ◆ 最大回転数：4,000rpm
- ◆ 最大容量：100mL×4/15mL×30
- ◆ ユーザーフレンドリーなSpincontrol Basic コントローラー採用
- ◆ 10種類のプログラムをメモリー可能
- ◆ 2種類の加速・制動カーブ
- ◆ ローディングが容易な低いボディー
- ◆ 短い加速・制動時間
- ◆ 自動インバランスモニタリング
- ◆ 運転開始遅延設定可能（凝固時間等）
- ◆ 高い静粛性
- ◆ 電動リッドロック、自動リッド開放機能
- ◆ 連続運転中の温度上昇の抑制
- ◆ 自動超過速度モニタリング
- ◆ 最新の国際規格(EN61010-2-020)に準じた製造

最大容量	スイングローター	4×100ml
	アングルローター	30×15ml
最大RCF		2,540g
最高回転数		4,000rpm
最低回転数		100rpm
最高速時騒音	アングルローター ^{*1}	≤54dB
	スイングローター ^{*2}	≤53dB
最高加速時間	アングルローター ^{*1}	≤18s
	スイングローター ^{*2}	≤13s
最高制動時間	アングルローター ^{*1}	≤14s
	スイングローター ^{*2}	≤10s
消費電力		210W
外寸 (W×D×H)		378×535×293mm
高さ (リッド開放時)		643mm
本体重量		23kg

*1: アングルローター SGM12073 使用時

*2: スイングローター SGM11071/バケット SGM13299 (キャップ付) 使用時



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
SGM10226	Sigma 2-7	1 式	¥380,000

必要な遠心機の構成を簡単検索

Product Configurator

Sigma 社ウェブサイト内のProduct Configurator を使用することで、お客様が必要とされる遠心機の構成を遠心機の種類やチューブの種類を指定すると対応する遠心機の機種と必要なアクセサリ類を簡単に検索することが可能です。

Sigma 社Product Configurator アドレス：<https://www.sigma-zentrifugen.de/en/configurator/>

フルオロスロット/エリスロットリーダーシステム


MABTECH

Mabtech IRIS™


Exact spot center determination	RAWspot™ テクノロジーによる信頼性の高い多色解析
New dimension of data	すべてのスポットは分泌されたアナライトの量に応じたボリュームを有している。
Objective input	カメラ設定の固定によるバイアスのないデータ
Scientific output	シグナル解析 (画像解析ではありません)
4-color analysis	フラッシングLEDによる蛍光シグナルの退色防止
No hassle	XY テーブルの自己校正
Optimized settings	ユーザーフレンドリーな Mabtech Apex™ software
Plug-and-play	プレートセットして "READ" ボタンを押すだけ



RAWspot™ テクノロジー

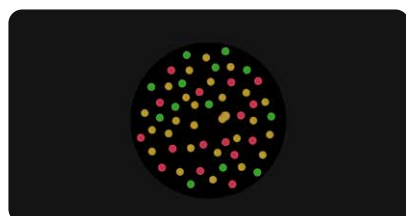

フルオロスロットにおいて、2重スポットから単一スポットを判別することが重要となります。

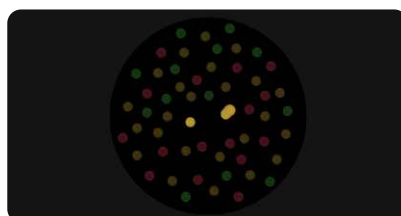


画像解析の場合、単一スポットを2重スポットと誤って判別されることがあります。




標準的な8-bitイメージは平坦なイメージとして認識されます。




RAWspot™ テクノロジーでは広いダイナミックレンジを持つRAWシグナルを使用します。

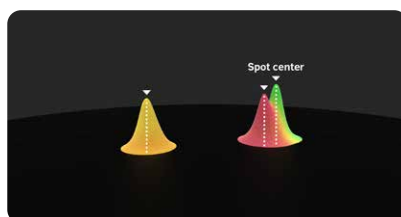


RAWspot™ テクノロジーでスポットの中心を検出します。

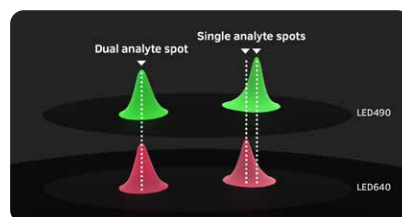


スポットの中心が重なるスポットは2重スポットとして認識されます。

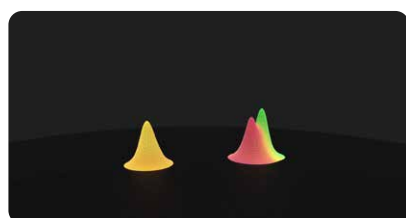

それぞれのスポットは対応する分泌アナライトの量に応じたボリュームを持っています。

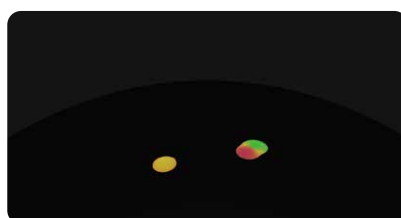


正確なスポット中心の検出により信頼性の高い多色解析が可能となります。

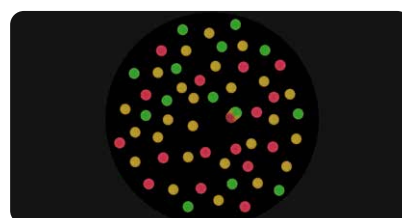

RAWspot™ テクノロジー
精確なシグナル解析


高感度かつ正確なシングルセル解析のために

フルオロスポットは複数のアナライトの分泌を同時に解析することができる高感度なエリスポット解析です。この高感度な細胞解析は正確かつ簡単に実施することが可能で単一解析・大規模スクリーニングの両方に適しています。

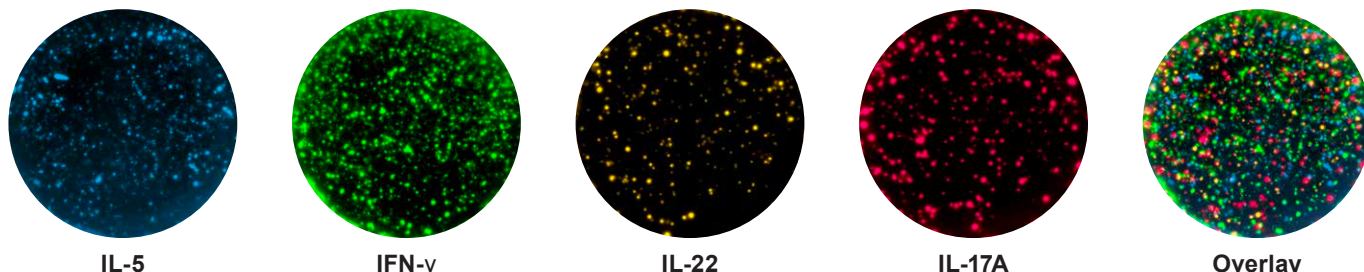


これらの画像はヒト末梢血単核球 (100,000 cells/well) を抗CD3モノクローナル抗体および抗CD28モノクローナル抗体で48時間刺激した際に分泌したIL-5 (380nm), INF-gamma (490nm), IL-22 (550nm), IL-17A (640nm) に対して4重蛍光解析したフルオロスポットを示しています。それぞれの画像は4枚のフィルターを用いて同一のウェルから得られたものと、それらをマージしたものになります。解析はMabtech IRIS™で実施しています。

Mabtech Apex™ ソフトウェア

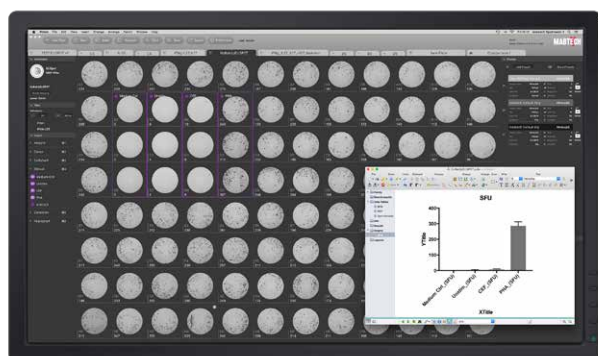

実験データは組み込まれたラベリングシステムを用いて追加することが可能です。また、データはExcelフォーマット等でエクスポートすることが可能です。

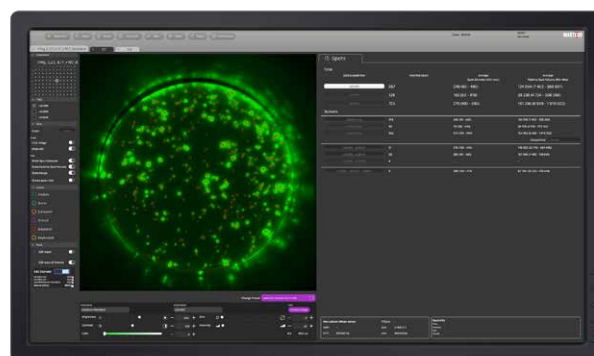

タブ構造はウェブブラウザのように操作することが可能で、複数のフルオロスポットプレート、エリスポットプレートを閲覧することが可能です。

プレートフォーマット	96ウェルプレート
光源	フルオロスポット用LED (380/490/550/640nm) エリスポット用白色LED
検出チャンネル数	4チャンネル (430/510/570/660nm)
推奨蛍光波長 (Ex/Em)	380nm/430nm: DAPI相当 490nm/510nm: FITC相当 550nm/570nm: Cy3相当 640nm/660nm: Cy5相当
カメラセンサー (解像度)	CMOSセンサー (2048×2048 pixels)

読み込み速度	エリスポット: < 2分/プレート フルオロスポット (単色): < 5分/プレート フルオロスポット (2色): < 7分/プレート フルオロスポット (3色): < 10分/プレート フルオロスポット (4色): < 13分/プレート
外寸 (本体のみ)	430mm (W) × 400mm (D) × 505mm (H)
重量 (本体のみ)	26kg
電源	100-240VAC (50/60Hz), 1A (最大)

1年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
2000-0007W	IRIS フルオロスポット / エリスポットリーダーシステム Win 版	1 式	¥13,248,000
2000-0007M	IRIS フルオロスポット / エリスポットリーダーシステム Mac 版	1 式	¥13,758,000

構成: 本体, USBケーブル, Ethernetケーブル, 電源ケーブル, スペアヒューズ, 制御用PC(専用ソフトインストール済), 操作マニュアル, 保証書

エリスポットリーダーシステム

MABTECH

Mabtech ASTOR™

Mabtech ASTOR™ – ELISpot's best friend



Anyone can play

プレートを設定して“Read” ボタンを押すだけ


Mabtech ASTOR™ はプレートをセットしてボタンを押すだけの Plug-and-play マシンです。

データをカスタマイズすることも可能ですが、多くは初期設定のまま解析が可能です。

Get more done

画像読み込みからデータ解析まで数分

信頼性の高いデータとこれまでの機種にないエクスポート機能により、データ取得からデータ解析までの時間を最小限に抑えることが可能になり、大規模な研究にも対応が可能です。

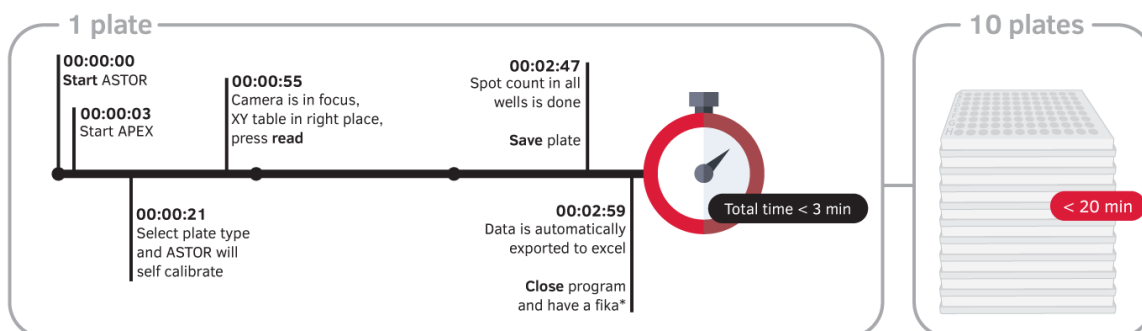


*Fika = Swedish coffee break

Loyal teammate

ELISpotのベストフレンド

Mabtech ASTOR™ により信頼性の高いデータを得ることが可能です。
例えば、ASTOR™では1ウェル当たり3000個を超えるスポットが存在しても直線性高く定量することが可能です。

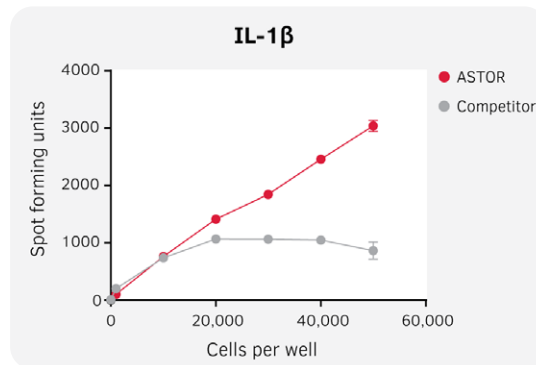

ASTOR VS IRIS

Mabtech ASTOR™とMabtech IRIS™ とは姉妹機で同じフレームワークを使用しています。これらのリーダーは斬新なスポットカウントアルゴリズム RAWspot™テクノロジーを搭載しています。
これにより的確なスポット分析を可能にしています。



	ASTOR エリスポットリーダー	IRIS フルオロスポット・エリスポットリーダー
アプリケーション		
エリスポット	✓	✓
フルオロスポット	-	最大4色
検出可能なサブpopulation	1	15
ハードウェア		
XYテーブルの自己校正	✓	✓
光源：LED(s)	✓	✓
CMOSセンサー	マクロレンズ	テレセンテリックレンズ
Resolution (H×W)	1200×1200 pixels	2048×2048 pixels
プレートタイプ：96-well MSIP and MAIPSWU10	✓	✓
PC (付属)	ラップトップ PC	デスクトップ PC
ソフトウェア		
Mabtech APEX™	✓	✓
RAWspot テクノロジー	✓	✓
エクスポートファイル形式：.raw .jpg .xlsx .pzfx	✓	✓
読み込み速度（エリスポット）	<2 min/プレート	<2 min/プレート
サービス		
1年保証	✓	✓
規制		
CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES準拠	✓	✓

1年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
2001	Mabtech ASTOR™ エリスポットリーダーシステム	1 式	¥6,336,000

構成：本体, USBケーブル, 電源ケーブル, スペアヒューズ, 制御用PC (専用ソフトウェアインストール済), 操作マニュアル, 保証書

New!! サンプルコレクションチューブ

鼻腔用スワブ付き

インフルエンザ、鳥インフルエンザ、HFMD（手足口病）、はしか、
その他ウイルス、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、クラミジア等の
サンプル採取と輸送に適用




19-1301



19-1302

- ◆ 培地の入ったチューブ1本とスワブ1本がパッケージされたものが50セット含まれていて、すぐに使用可能
- ◆ 細菌や真菌によるコンタミネーション防止のために、培地には複数の抗生物質が含まれています。(19-1301)
- ◆ BSAはタンパク質の安定化剤として添加され、ウイルスサンプルの保護や分離速度を改善します。(19-1301)
- ◆ 19-1302の培地はウイルスを不活化するので、エアロゾル感染やRNAの変性を防ぎます。
- ◆ WHO規制およびバイオセーフティ規制に準じた設計で製造され、サンプルの漏れを防止します。
- ◆ スワブは個別包装・滅菌済み

カタログNo.	19-1301	19-1302
1箱の構成	鼻腔用スワブ1本+12mlチューブ（3ml培地含有）1本がパッケージされたものが50セット	
培地構成	・HBSS ・抗生物質 ・BSA ・凍結防止剤 ・生物学的バッファー ・フェノールレッド	・グアニジン塩（変性剤） ・還元剤 ・生物学的バッファー ・キレート剤 ・界面活性剤 ・バッファー

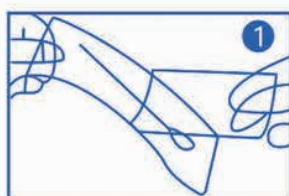


① スワブを取り出す



② サンプルを採取し、スワブをチューブに戻すときに、



③ スワブをブレイクポイントの位置で折る

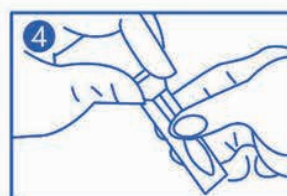


④ キャップをしっかりしめる

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
19-1301	サンプルコレクションチューブ 培地+スワブ	1 式	¥181,500
19-1302	サンプルコレクションチューブ 培地（不活性）+スワブ	1 式	¥199,700

*包装1式：1箱（50セット）×10箱になります。

新型コロナウイルス検査のための
サンプルが入ったチューブの移送に使えます！

G-Medic™ Pouch

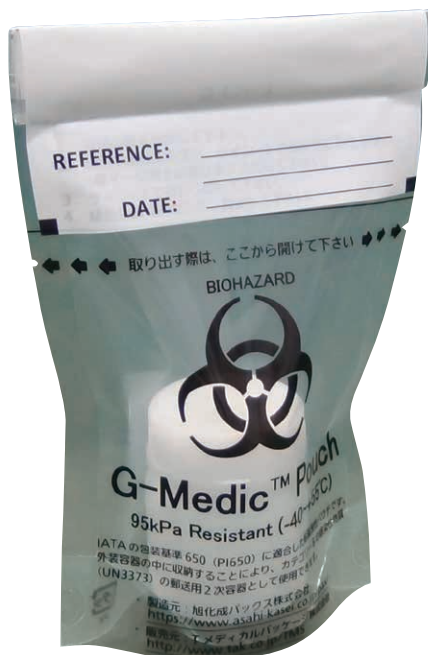

バッグの底にマチがあるので
検体を自立した状態で輸送できます。
3次容器（外装容器）をコンパクトに。



G-Medic™ Pouch マチなし



G-Medic™ Pouch マチなし

- ◆ 国連 (UN) 規格 (UN3373 P650) の耐圧基準をクリア
UN規格3重包装の2次容器として使用できます。
- ◆ 国際航空運送協会 (IATA) の包装基準 (PI650) に適合する耐漏洩性
航空輸送にも対応

使用上の注意

- ・ 検体はUN規格(UN3373 P650)に定める3重包装を行い輸送してください。
- ・ 本容器は2次容器として吸水シートおよび外装容器を合わせてご使用ください。
- ・ 2次容器は密閉性を有しているためドライアイス等温度変化等の影響によって容器を破裂させる恐れのある物質を2次容器内に入れないでください。

収納本数	15mL遠心管×3本、 50mL遠心管×1本、 Φ45×60mmコンテナ×1本
パウチ外寸 (W×L)	120×250mm
有効内寸 (W×L)	100×139mm (参考値)

カタログNo.	製品名	包装単位	希望販売価格
ST-50SET	G-Medic™ Pouchセット (G-Medic™ Pouch、吸水シート)	10セット (10セット×1パック)	¥4,000
ST-50	G-Medic™ Pouch	10枚 (10枚×1パック)	¥3,000
ST-50-WAS	G-Medic™ Pouch用吸水シート	10枚 (10枚×1パック)	¥1,000

注意：必ず吸水シートを合わせてご使用ください。

体表面温度を瞬時に検知

TESCOM
Partner with future

AI サーモメーター New!!

非接触

瞬間検知

マスク着用OK

工事不要

- ◆ 体表面温度を瞬時に測定
- ◆ AI（人工知能）により測定ポイント（人物の顔）を正確に捉え、安定した測定が可能
- ◆ 非接触検温による感染リスクを軽減
- ◆ 指定温度以上の場合、赤色警告とアラームでお知らせ
- ◆ マスクをしていても測定可能
- ◆ マスクをしていない人には画面表示でマスク着用を促します。
- ◆ 測定誤差±0.3℃の高精度検知
- ◆ 事前に画像を登録すると顔認証も可能で、勤怠管理としても使用可能（オプション）
- ◆ 音声案内：緑色（体温正常時）、赤色（体温異常時）、オレンジ（マスク着用）
- ◆ 設置場所に合わせて卓上型と据え置き型（タワータイプ/ミドルタイプ）をご用意



商品名	タワータイプ	ミドルタイプ	卓上タイプ
	AIサーモメーター Pro	AIサーモメーター Pro	AIサーモメーター Pro
カタログNo.	P20-0627ISUV	P20-0628ISUV	P20-0626ISUV
温度検出距離	0.3~1.2m		
温度検出精度	0.3℃		
温度測定範囲	30℃~45℃		
推奨環境温度	20℃~35℃（室内環境）		
動作温度	0℃~60℃		
動作湿度	0~90%（結露がないこと）		
顔データ登録	30,000件		
画面サイズ	8インチ（iPad miniと同等サイズ）		
測定端末サイズ	120×256×28mm		
測定端末重量	1.0kg		
電源	DC12V 2A		
消費電力	8W（最大）		

※予告なく仕様変更する場合がございます。

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
P20-0627ISUV	タワータイプ AI サーモメーター Pro	1式	¥165,900
P20-0628ISUV	ミドルタイプ AI サーモメーター Pro	1式	¥165,900
P20-0626ISUV	卓上タイプ AI サーモメーター Pro	1式	¥147,000

※カタログNo.P20-0236ILUVおよびP20-0297ILUVは仕様変更によりカタログNo.が変更されました。

■ 構成：本体、電源アダプター、マニュアル、保証書

注意：本製品は顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疫病に患しているかどうかを診断する機器ではありません。体温が高い可能性のある人物を検知した場合には、必要に応じて、体温計や医師による診断を行うようにしてください。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2021年2月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社 商品の仕様・在庫・ご注文についてのお問い合わせ TEL: 03-6666-5902 FAX: 03-5677-4081
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル | WEB: www.bmbio.com

50085_2021.2