

A large, stylized graphic for a summer campaign. The word "SUMMER" is in large, bold, orange capital letters with a white outline and a slight drop shadow. Below it, the word "Campaign" is in a smaller, orange, cursive script font. The background is a bright yellow with a blue sky and a yellow sun in the upper right corner.

SUMMER
Campaign

2022年7月21日

～9月20日

3-Bプラスチックピペット

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や製品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

INDEX



在庫限りで販売終了となります。



記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。予めご了承下さい。

消耗品

チップ

BMBio ^{EX} (Excellent & Extra) 高品質チップ EXチップ	4
BMBio ^{ECO} (Economy & Ecology) フィルター付チップ	4
Biologix フィルターチップ ロングタイプ	5
BMBio ST (Standard & Stable) ロングチップ 低吸着タイプ	24

チューブ・プレート

フリップトップチューブ・スクリーキャップチューブ・サンプルストックチューブ	5～6
遮光チューブ・テストチューブ・コニカルチューブ	6
PCRプレート 96ウェル・テストプレート 96ウェルストリップ	7
エコロジーラック	8

ピペット

電動ピペッター (TPP Turbo-Fix・thermo S1 pipet Filler・Integraピペットボーイ・プロ)	9～11
トランスファーピペット 0.8ml	12

リザーバー

1 レーンリザーバー	12
------------------	----

セルカルチャー

TPP 3-Bプラスチックピペット 1ml・2ml	13
---------------------------------	----

グローブ

Microflex ニトリルグローブ (Ultimate Barrier・ウルトラフォーム)	14
--	----

こんな商品もあります

ディスプレイブルシューズカバー	15
キュベット電極専用クーラーラック	15

CRYO

クライオチューブ 1.5ml	16
冷凍・冷蔵ボックス CoolBox	16
チューブ用クライオラベル	17

機器

Labnet 電気泳動槽	18
小型遠心機 (GYROZEN 1524・Labnet Prism)	19
コンパクトデジタルシェーカー	20
UVハンディーランプ	21
紫外線保護フェイスシールド	21

お知らせ

Luminex社ブランド商品価格改定のお知らせ	22～23
-------------------------------	-------

共通アイコン



当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文載っている商品です。



新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。



商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。
(概算単価はバルク包装タイプより算出)



電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



商品が1個単位で個別包装滅菌されております。



未滅菌の商品です。商品種によっては、
DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Freeの状態です。



滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。



ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。



商品の写真を原寸大で掲載しております。



商品が1本、1個等の単位で個別包装されています。



商品に目盛（外側にラインまたは、印字、刻印等）が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。



商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。



在庫限りで販売終了となります。



在庫限り特別価格となります。
記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。

チップアイコン



チップ先端部分がテーパークット（斜角）になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。



チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップが引っかかる事が少ない形状です。



チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。



ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。



ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落し込むこと無く、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。



チップ材質を高品質バージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。



商品が袋（または+箱）にそのまま包装されています。



チップがラックに立った状態で包装されています。



チップ用の空ラックです。（包装にチップは含まれません。）



チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。



チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロゾルによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン



チューブにロック性能またはスクリーキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。



スクリーキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。



チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。



チューブのキャップがドーム状になっています。



チューブ胴体部の外側（またはキャップ表面）に書き込みができる部分（印字またはfrosted）があります。



チューブのキャップ内にシリコン製のOリングを使用しておりますので気密性に優れています。



特殊成型により、高气密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン/プレートシールアイコン



ウェル（またはチューブ）底が丸底になっています。



ウェル（またはチューブ）底が平底になっています。



ウェル（またはチューブ）底がV底になっています。



プレート（またはチューブ）・マットのウェル形状が○（サークル）型になっています。



プレート（またはキャップ・マット）をハサミでカット出来ます。



シールがロール状に包装されています。箱から引き出しながらご使用戴けます。



シールがシート状に包装されています。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。



粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン



機器商品の動線を動線を表しています。



機器商品の仕様温度の上限を表しています。



機器商品の最大遠心力を表しています。

商品の返品・交換について

製造元に品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡をお願いいたします。新しい商品と交換させていただきます。（ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただきます。）

尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

在庫限り!
販売終了

チップ

追求された高品質チップ EX (Excellent Tip) チップ

BMBio
EX (Excellent & Extra)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

-10μl



全長: 31.24mm 目盛: 0.5, 2, 10μl

◆ 3段階目盛付きの10μlショートスタンダードタイプです。



カタログ No.

EX-10

未滅菌

包装: 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装: 1,000本×20

希望販売価格

バルク

¥3,500 → 114個限り **¥1,580**

キャンペーン中の参考価格

EX-10-RL

未滅菌

包装: 960本 (96本×10プレート)
大箱包装: 960本×5

詰め替え

¥6,900 → 413個限り **¥2,900**

EX-10-RS

電子滅菌

包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥8,900 → 115個限り **¥4,300**

ピペット適合表
はこちら



EX-10-RS
(ヒンジラック)



EX-10-RL
(詰め替えタイプ)

※ 空ラックの販売はございません。

-10μl



全長: 45.84mm 目盛: 2, 10μl

◆ 2段階目盛付きの10μlロングスタンダードタイプです。



カタログ No.

EX-10EXL-RL

未滅菌

包装: 960本 (96本×10プレート)
大箱包装: 960本×5

希望販売価格

詰め替え

¥6,900 → 167個限り **¥2,900**

キャンペーン中の参考価格

EX-10EXL-RS

電子滅菌

包装: 960本 (96本×10ラック)
大箱包装: 960本×5

ラック

¥8,900 → 482個限り **¥4,300**



EX-10EXL-RS
(ヒンジラック)



EX-10EXL-RL
(詰め替えタイプ)

※ 空ラックの販売はございません。

在庫限り!
販売終了

チップ

フィルター付ピペットチップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase Free


オートクレーブ不可

-10μl



全長: 31.5mm 目盛: 0.7μl, 2.5μl, 10μl

◆ 先に2μlの目盛のある10μlスタンダードタイプです。

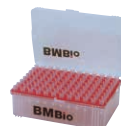

カタログ No.

SF-10G-R

電子滅菌

希望販売価格

¥9,000

→ 172個限り

キャンペーン中の参考価格

¥4,500

包装: 960本 (96本×10ラック)

大箱包装: 960本×5

ラック

-20μl



全長: 49.5mm

◆ シャープな先端テーパークットが特徴の最もスタンダードなタイプです。



カタログ No.

SF-20-R

電子滅菌

希望販売価格

¥9,000

→ 120個限り

キャンペーン中の参考価格

¥4,500

包装: 960本 (96本×10ラック)

大箱包装: 960本×5

ラック

-100μl



全長: 60.0mm

◆ 10μl, 50μl, 100μlの3段階の目盛付で、サンプル目視に最適です。



カタログ No.

SF-100-R

電子滅菌

希望販売価格

¥9,000

→ 29個限り

キャンペーン中の参考価格

¥4,500

包装: 960本 (96本×10ラック)

大箱包装: 960本×5

ラック

在庫限り!
販売終了

チップ

フィルターチップ 200μl ロングタイプBIOLOGIX
GROUP LIMITED

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ アルコールおよび有機溶剤に耐性
- ◆ 100%不活性化
- ◆ 材質: ポリプロピレン製、フィルター: UHMWPE製
- ◆ 滅菌済み

カタログ No.

23-0200B

希望販売価格

~~¥15,600~~

→ 50個限り

キャンペーン中の参考価格

¥10,920包装: 960本 (96本×10ラック) **ラック****在庫限り!**
販売終了

チューブ

フリップトップチューブ 1.5ml

MICROSTEIN

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

- ◆ 人間工学に基づいたキャップ形状
- ◆ Flip topデザインのチューブなので片手でのチューブの開閉が容易
- ◆ チューブラックへの収納もつまみにより容易

カタログ No.

MIC-1004 未滅菌

希望販売価格

~~¥2,500~~

→ 128個限り

キャンペーン中の参考価格

¥1,800

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: 500本×10



原寸大

目盛付
0.1-1.0ml書き込み
OK**在庫限り!**
販売終了

チューブ

マイクロチューブ スクリューキャップ自立型 クリアBMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen Free

- ◆ 95kpa耐圧で液漏れしません。
- ◆ 人間工学に基づいた、扱いやすいデザイン
- ◆ 外寸: フタΦ21.0mm、胴部長87.0mm、胴部Φ16.0mm
- ◆ 材質: 高純度ポリプロピレン製
- ◆ 滅菌済み

10ml

カタログ No.

BMSSCH0008

希望販売価格

~~¥1,700~~

→ 574個限り

キャンペーン中の参考価格

¥1,190

包装: 50本 (50本×1パック)



チップ

チューブ・プレート

ピペット

リザーバー

細胞培養

グローブ

こんな商品あります

CRYO

機器

在庫限り!
販売終了

チューブ

MSTサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型

EVERGREEN

- ◆ オートクレープ可能 (121℃、15分)
- ◆ DNase, RNase Free
- ◆ 白地の書き込みスペースと目盛付
- ◆ フラットキャップなので書き込み、ラベルの貼付けが可能
- ◆ キャップ横部にはハンドリングミスを防ぐ滑り止め模様付
※キャップとチューブ本体は別包装です。予めご了承下さい。
- ◆ 0.5mlの自立型
- ◆ 外寸：フタφ13.0mm、胴部長:36.0mm、胴部φ10.0mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 色：ナチュラル
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性：純水時 14,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性：-80℃～121℃



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
220-3929PR-080	MSTサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型	1000本 (1000本×1パック)	¥21,100	→ 3個限り ¥12,660

在庫限り!
販売終了

チューブ

遮光チューブ 5ml

Argos

- ◆ 光に敏感なサンプルに使用可能
- ◆ オートクレープ可能 (121℃、15分)
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ 開口外寸：口部φ18.1mm、全長:58.1mm、胴部φ17.7mm
- ◆ フタと胴体書き込みスペースおよび目盛付
- ◆ 材質：PP
- ◆ 温度耐性：-100℃～121℃
- ◆ 遠心耐性：純水時 15,000RCF(xg)



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMA-T2081	5mL 遮光チューブ	250本 (250本×1パック)	¥16,500	→ 35個限り ¥7,900

在庫限り!
販売終了

テストチューブ

テストチューブ 13×65mm 4.0ml P.S製

nerbeplus

- ◆ 13×65mm
- ◆ オートクレープ不可
- ◆ 容量：4.0ml
- ◆ 底形状：丸底
- ◆ 適合キャップ：02-643-0000
- ◆ 材質：P.S
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性：最大RCF 3,000g
- ◆ 温度耐性：-50℃～55℃
- ※他ブランドのキャップと組み合わせ
てのご使用は避けください。



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
02-151-0000	テストチューブ 13×65mm 4.0ml	4500本 (750本×6パック)	¥39,000	→ 10個限り ¥19,500

在庫限り!
販売終了

コニカルチューブ

コニカルチューブ 12×75mm P.P製

nerbeplus

- ◆ 12×75mm
- ◆ オートクレープ可能 (121℃・15分)
- ◆ 容量：4.5ml
- ◆ 適合キャップ：02-633-0000
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性：最大RCF 3,000g
- ◆ 温度耐性：-10℃～121℃
- ※他ブランドのキャップと組み合わせ
てのご使用は避けください。



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
02-412-0000	コニカルチューブ 12×75mm	5250本 (750本×7パック)	¥65,000	→ 2個限り ¥32,500

在庫
限り!
販売終了

PCR プレート

PCR プレート 96well シンプレート 0.2ml


BMBio
ECO (Economy & Ecology)

ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。

材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造～袋詰めのを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用頂けます。

- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase Free
- ◆ プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能
- ◆ 縦 (A ~ H)、横 (1 ~ 12) に印字があります。
- ◆ 適合シール: BMF (Classic PCR用) ・ (Real Time qPCR用) シリーズ / BMPCRシリーズ
- ◆ 色: ナチュラル
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性: 純水時 4,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性: -80℃ ~ 121℃

※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

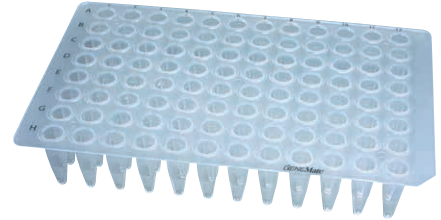

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PCR-96-IP	PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml	10枚 (10枚×1パック)	¥18,900 → 11個限り	¥5,670



在庫
限り!
販売終了

テストプレート

テストプレート 96ウェル ストリップ

EVERGREEN

- ◆ ストリップタイプ
- ◆ プレートウェル内壁未処理
- ◆ フタなし
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 底形状: V底
- ◆ 未滅菌

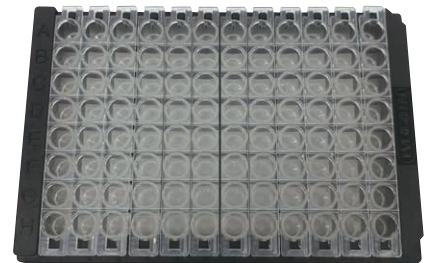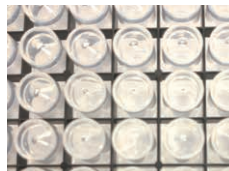

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
290-8355-03VSTRIPS	テストプレート 96ウェル ストリップ	100枚	¥17,000 → 12個限り	¥8,500

在庫
限り!
販売終了

ラック


エコロジーラック

thermoscientific

フリップストリップ (0.2ml・0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用)

- ◆ オートクレープ可能 (121℃、15分)
- ◆ フタ付

	片面 (表面)	片面 (裏面)
収容本数	0.2ml 8連チューブ×12本 +1.5ml/2.0mlチューブ×12本	0.6mlチューブ×96本
ウェル直径Φ	6.1mm & 11.0mm	7.9mm
サイズ (W×D×H)	209×117×43mm	
材質	P.P	
温度耐性	-80℃～121℃	


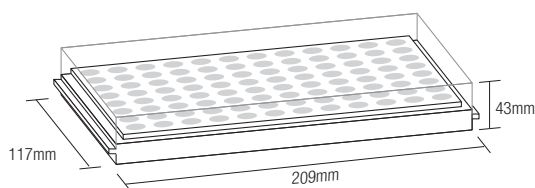


カタログ No.	商品名	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8628	フリップストリップ	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 16個限り	¥1,740
8638	フリップストリップ	ブルー	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 8個限り	¥1,740
8648	フリップストリップ	バイオレット	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 13個限り	¥1,740
8658-11	フリップストリップ	イエロー	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 19個限り	¥1,740
8698	フリップストリップ	レッド	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 12個限り	¥1,740

リバーシブルラック 96穴 (0.2ml・0.6mlチューブ用)

- ◆ オートクレープ可能 (121℃、15分)
- ◆ フタ付

	片面 (表面)	片面 (裏面)
収容本数	0.2ml×96本	0.6mlチューブ×96本
ウェル直径Φ	6.1mm	7.9mm
サイズ (W×D×H)	209×117×43mm	
材質	P.P	
温度耐性	-80℃～121℃	

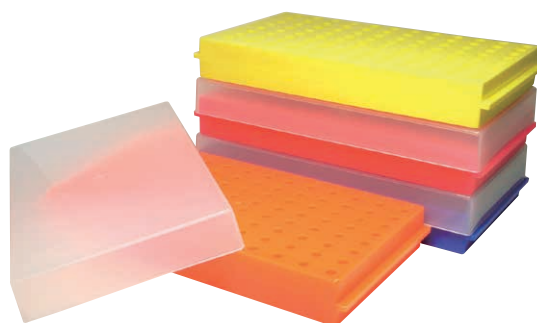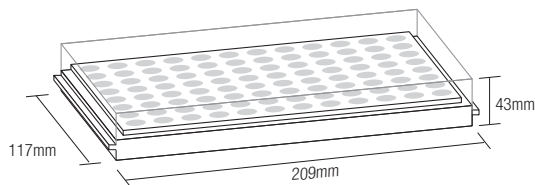

カタログ No.	商品名	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
8620-11	リバーシブルラック 96穴	グリーン	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 3個限り	¥1,740
8630-11	リバーシブルラック 96穴	ブルー	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 27個限り	¥1,740
8640	リバーシブルラック 96穴	バイオレット	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 9個限り	¥1,740
8650	リバーシブルラック 96穴	イエロー	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 4個限り	¥1,740
8690-11	リバーシブルラック 96穴	レッド	1個 (1個×1パック)	¥2,900 → 1個限り	¥1,740

**在庫
限り!**
特別価格

電動ピペッター

Turbo-Fix Pipette Aid



Turbo-Fix Pipette Aid は1-100mlの溶液を吸引または分注するピペッターです。
電源につないで使用すると高い吸引力で長時間使用できます。また本体が非常に軽く、
溶液分量が多い時でも快適に使用できます。

- ◆ ターボ吸引の吸引力は約13.5ml/sec (50ml ピペット使用時)
- ◆ 電源なしで6時間使用可能
- ◆ リチウムイオンバッテリーで繰り返し充電可能
- ◆ 195g の軽量設計
- ◆ 重力ディスペンスが可能
- ◆ ピペットノーズはオートクレープ可能

ピペットのスピードは2つのシステムでコントロールできます：

- ・2つのトリガーを使用し、指で感覚的に調節できます。
- ・機器の背面にあるサムホイールを回して、速度や吸引量を調節できます。

■ 構成

- ・ピペッター本体
- ・電源ケーブル
- ・シリンジフィルター
- ・ウォールマウント
- ・マニュアル
- ・保証書

動作条件	5 ~ 40℃、最大。80% RH
サイズ	35×125×130mm
重量	195g
電源	100-240VAC、50/60Hz



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
94701	ピペッターターボ Fix	1台 1式	¥62,800 → 1個限り	¥31,150

1年保証

在庫
限り!
特別価格

電動ピペッター

S1 Pipet Filler

thermo scientific

- ◆ ノーズコーンには、1ml～100mlまでのピペットに対応
- ◆ リチウムイオンバッテリーにより、1度の充電で長時間（連続操作で約15時間）作業実現
- ◆ 急速充電可能（1時間で約80%）
- ◆ メモリ効果の問題なく継ぎ足し充電が可能
- ◆ 吸引および吐出スピードを別々にコントロール
- ◆ スピードコントロールは8段階で液晶ディスプレイに表示
- ◆ オートクレープ可能なノーズコーンハウジング
- ◆ バックライト付き大型液晶ディスプレイにてバッテリー残量を確認可能
- ◆ 卓上スタンド、壁掛けホルダーが付属




* クリアの扱いはありません

吸引速度	8段階
分注速度	8段階（+重力による自然落下）
バッテリー	リチウムイオン
動作時間	約15時間（充電1回あたり）
充電時間	約1時間
重量	220g
材質	ノーズコーンピペットホルダー （シリコンラバー（オートクレープ可））
フィルター	0.45 μ m スタンダードフィルター
吸引時間（50mlの場合）	6秒

■ 構成

- ・ピペッター本体
- ・0.45 μ l フィルター
- ・スタンド
- ・ホルダー
- ・マニュアル
- ・保証書

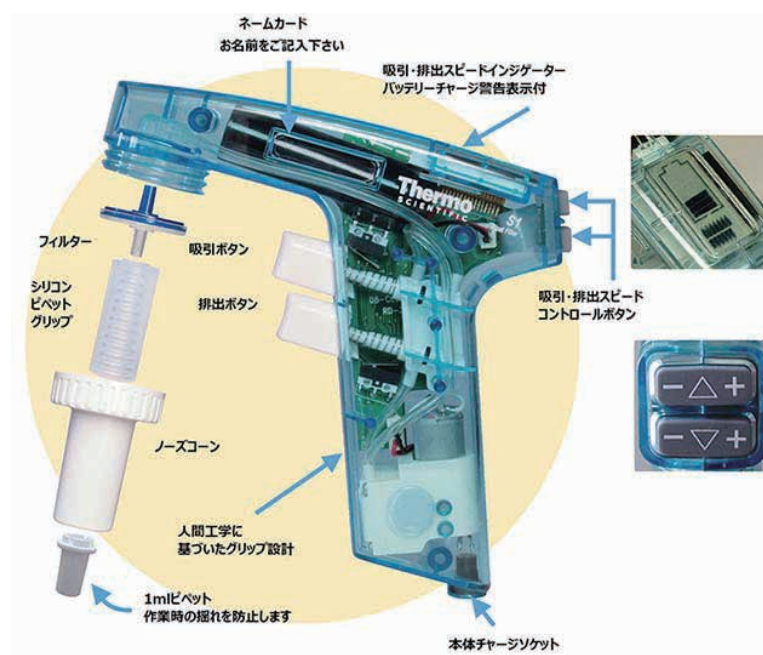

1年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
9501	電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler (White)	1式	¥45,100 → 7個限り	¥22,550
9521	電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler (Blue)	1式	¥45,100 → 3個限り	¥22,550
9531	電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler (Red)	1式	¥45,100 → 1個限り	¥22,550
9541	電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler (Green)	1式	¥45,100 → 3個限り	¥22,550

在庫
限り!
販売終了

電動ピペッター

ピペットボーイ・プロ (ホワイト)

INTEGRA

ライフサイエンスの実験にはリキッドハンドリングが中心にあり、研究を成功させるには正確かつ効率的に溶液を処理することが鍵となります。ピペットボーイ プロは、精度、スピード、人間工学に基づいたデザインを統合した生産的作業に不可欠なすべての特性を持ちます。

◆ すべてのタイプのピペットを正確かつ迅速に充填

ピペットボーイ プロの吸引・吐出ボタンに指によるさまざまな圧力を加えることで、ピペット内の溶液を非常に正確にコントロールできます。吸引ボタンをしっかりと押し、ピペット内いっばいに溶液を素早く吸い込み、その後ボタンを徐々に放してメニスカスを目盛りに正確に一致させます。分注するときは、溶液を1滴ずつ分注するためボタンを少し押し（自然落下）または吐出ボタンを押してピペット内を素早く空にします。

◆ 作業エリアの照明

ピペットボーイ プロに搭載されたLEDは、ピペット周辺に最適な照明を当て、正確なピペティングと目の疲れを防ぎます。LEDのスイッチを入れ、吸引もしくは吐出ボタンを押すとノーズピース近くにあるLEDが点灯します。ボタンを離すと数秒（約5秒）間はライトが点いたままその後、自動的にオフになります。

◆ デザインが大切

人間工学に基づいて手の形状に合わせた設計になっています。超軽量（190g）のピペッターが快適にフィットし、長時間のピペティングでも楽になります。

◆ 安定に置けます


スマート設計により、ピペットを挿入したままでも本体を背面に安定して置いておけます。



*ピペッターの色はホワイトになります。



1. 吸引ボタン
2. 吐出ボタン
3. スピードコントロール
4. バッテリーチャージインジケーター
5. チャージステーション接続部
6. アダプターケーブル
7. LEDイルミネーション
8. LED用スイッチ
9. 本体
10. ノーズピース (滅菌)
- 10 a. フィルターラバー
- 10 b. 疎水性フィルター
- 10 c. ピペットマウント
- 10 d. ノーズピースカバー (滅菌)

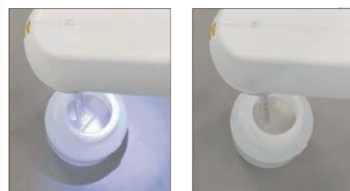

■ 構成

- ・本体
- ・0.45μm滅菌フィルター
- ・ウォールマウント
- ・2種類のバッテリー（AAA、NiMH、1.2V）
- ・電源アダプター
- ・マニュアル
- ・保証書

最大スピード	12ml/秒
重力落下	吐出ボタンのわずかな圧力
ピペット	ガラスピペットおよびプラスチックピペット 1ml ~ 100ml
フィルターポアサイズ	0.45μm (付属)
チャージインジケーター	赤：充電が必要、緑：電源コードの接続（*充電しながら使用可能）
作業環境	5 ~ 40℃、最大湿度80% RH
バッテリー	タイプ：AAA、NiMH、(1.2V)、回数：500-1000、持続時間：4000回（吸引・吐出、25mlピペット、フル充電時）
材質	本体：ABS ノーズピース：ポリアセタール樹脂 (POM) ピペットマウント：シリコン フィルターラバー：シリコン
サイズ (W×D×H)	130×35×145mm
重量	190g
電源	100-240VAC、50/60Hz、4.5W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
156400	ピペットボーイ・プロ (ホワイト)	1式	¥46,000	2個限り ¥23,000
153005	ピペットボーイ アキュ用バッテリー	1個(1個×1パック)	¥3,200	3個限り ¥1,150

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

チューブ・プレート

ピペット

リザーバー

細胞培養

グローブ

こんな商品あります

CRYO

機器

在庫限り!
販売終了

トランスファーピペット

トランスファーピペット 0.8ml 個装

thermo scientific

- ◆ オートクレープ不可
- ◆ ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適
- ◆ 約-40℃迄の低温保存が可能
- ◆ 常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
- ◆ 個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装
- ◆ 材質：P.E（ポリエチレン）
- ◆ G滅菌済・個別包装

全長	6.4cm
胴径	2.5mm
全容量	1.3ml
1吸引量	0.8ml
1滴下数	26回



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
241-1S	 個装 トランスファーピペット 0.8ml	500本 (1本個装×500パック)	¥7,000 → 8個限り	¥3,500



在庫限り!
販売終了

リザーバー

リザーバー 1レーン PP 25ml

INTEGRA

- ◆ オートクレープ不可
- ◆ 材質：ポリプロピレン製
- ◆ 容量：25ml
- ◆ 底形状：V底

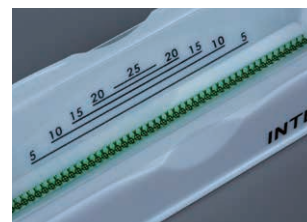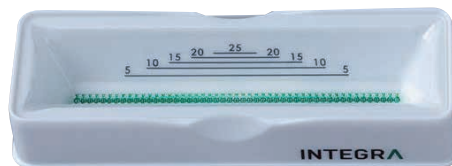

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
4318	リザーバー 1レーン PP 25ml	50枚 (50枚×1パック)	¥8,700 → 4個限り	¥4,350
BM931RB	25ml用リザーバーベース	1個 (1個×1パック)	¥700 → 3個限り	¥350

*ご使用の際にはリザーバーベースと一緒にお使いください。

在庫
限り!
販売終了

3-B ピペット

細胞培養プラスチックピペット



- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ◆ ピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付
- ◆ カラーコードで容量の見分けが容易
- ◆ 完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ 温度耐性：P.S (ポリスチレン) -40 ~ 70℃




カタログ No.	規格	全長	目盛り	マイナス目盛	カラーコード	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
394001	 1ml トリプルバッグ	4.8×270mm	0.01ml	0.2ml	黄	240本 (8本×30パック)	¥27,100 → 19個限り	¥16,260
394002	 2ml トリプルバッグ	5.5×270mm	0.01ml	0.2ml	緑	200本 (8本×25パック)	¥23,800 → 17個限り	¥14,280

3-B Product “Clean Room”


TPPのトリプルバックシステム (3-B) は、クリーンルームが求める高い管理基準に対応することができます。通常のパッケージでは袋の外側に付着した汚染物がクリーンルームに混入する恐れがありますが、トリプルバックなら無菌区域でのコンタミネーションを防ぎ、製造の安全性を高めます。

3-B製品の特徴


- ・商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能
- ・各商品は3層のピールオフバッグに包装
- ・各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング
- ・最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済
- ・3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。
- ・無菌性保証水準 (Sterility Assurance Level: SAL) : 10^{-6} 以下

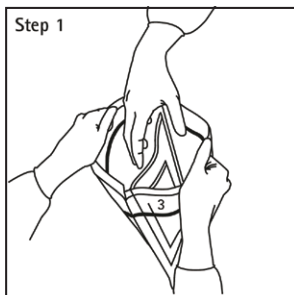

「Bag3」を開封する

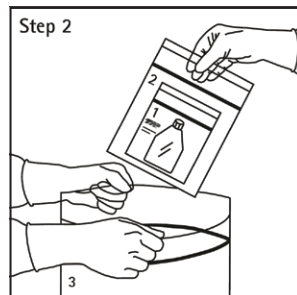

「Bag2」を取り出しパスボックスに移します。

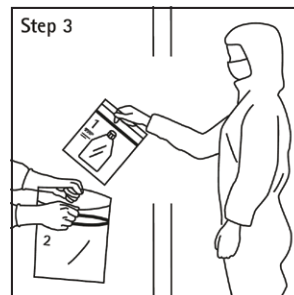

パスボックスの中で「Bag2」を開封し、慎重に「Bag1」を取り出します。そして無菌状態で、培養区域へ移します。



無菌室、またはクリーンベンチにて「Bag1」を開封し、製品を使用します。

在庫
限り!
特別価格

ニトリルグローブ

ULTIMATE BARRIER

MICROFLEX

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

AQL 0.4

ULTIMATE BARRIERグローブ：高い耐薬品性と優れた装着感の両立
TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

- ◆ 薬の浸透を防ぐ
- ◆ 特別に開発したニトリルにより多くの化学薬品に対して耐性

93-850		
Length (mm)		240
AQL		0.4
Palm Thickness (mm)		0.12
Finger Thickness (mm)		0.19
Tensile Strength (MPa)	Before Aging	27
	After Aging	27
Elongation at Break (%)	Before Aging	620
	After Aging	520
Force at Break (N)	Before Aging	12
	After Aging	12

1枚あたり
¥22.0高い耐薬品性と
優れた装着感の両立
[http://www.ansell.com/en/
Campaigns/TNT/Video.aspx](http://www.ansell.com/en/Campaigns/TNT/Video.aspx)


カタログ No.	サイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
93850060	未滅菌 XS	100 枚 (100 枚 × 1 パック)	¥5,500 → 117個限り	¥2,200
93850070	未滅菌 S	100 枚 (100 枚 × 1 パック)	¥5,500 → 87個限り	¥2,200
93850100	未滅菌 XL	100 枚 (100 枚 × 1 パック)	¥5,500 → 20個限り	¥2,200

大箱包装：100枚×10

在庫
限り!
特別価格

ニトリルグローブ

Ultraform® ウルトラフォーム

MICROFLEX

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

極 薄

- ◆ 300枚入り（一般的なグローブの3倍）でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

1枚あたり
¥18.2

	ASTM	Ultraform®
Length (mm)	220	230
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.06
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.06
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.08
Tensile Strength	Before Aging (Mpa)	min. 14
	After Aging (Mpa)	min. 14
Elasticity/Elongation	Before Aging (%)	min. 500
	After Aging (%)	min. 400



カタログ No.	サイズ	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
UF-524-XS	未滅菌 XS	300 枚 (300 枚 × 1 パック)	¥18,200 → 86個限り	¥5,460
UF-524-S	未滅菌 S	300 枚 (300 枚 × 1 パック)	¥18,200 → 155個限り	¥5,460
UF-524-M	未滅菌 M	300 枚 (300 枚 × 1 パック)	¥18,200 → 270個限り	¥5,460
UF-524-L	未滅菌 L	300 枚 (300 枚 × 1 パック)	¥18,200 → 30個限り	¥5,460

大箱包装：300枚×10

ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。
指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

在庫限り!
販売終了

ディスポーザブル シューズ

ディスポーザブル シューズカバー 不織布

NEST®

- ◆ 使い捨てPP不織布シューズカバー
- ◆ サイズ：42x17cm
- ◆ 色：ブルー



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
WNB923001	ディスポーザブル シューズカバー 不織布	1000枚 (100枚×10パック)	¥13,500 → 4個限り	¥4,050

在庫限り!
販売終了

キュベット電極用クーラーラック

Electroporation Cuvette Chiller

g-l
company

- ◆ 各キュベットに適用
- ◆ エレクトロポレーション前の細胞の冷却に最適
- ◆ 氷上に置くだけで、2～8℃に保持
- ◆ ディスポキュベット電極を最大、12本収納可能
- ◆ 寸法 (W×D×H) : 127×85×33mm
- ◆ 材質：特殊合金



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
ECC100-12	Electroporation Cuvette Chiller	1ラック (1ラック×1パック)	¥68,000 → 5個限り	¥34,000

＼お得な情報を配信します！／

メルマガ会員募集中!!

登録
無料

メールニュースでは、
新商品発売・おススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。



在庫限り!
販売終了

クライオチューブ

CryoSure®チューブ 1.5ml 自立型 未滅菌

EVERGREEN

Cryo Sure® は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に最適です。特殊成型の“リムシール”で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、バイリングからフリージングまで幅広くご使用頂けます。

- ◆ オートクレープ可能 (121℃、15分)
- ◆ DNase, RNase Free
- ◆ 自立型：1.5ml
- ◆ 外寸：フタφ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部φ12.5mm
- ◆ 材質：P.P
- ◆ 色：ナチュラル
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性：純水時 14,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性：-195℃～121℃



コンタミネーション防止リム

EVERGREEN社のCryoSure®チューブは、特殊成型の“リムシール”により密閉性に非常に優れています。この“リムシール”はアウターキャップを採用し、チューブとキャップのネジ切りを少なくすることで回転数を減らします。このため、一般的なインナーキャップと比べて作業中に起こるキャップからのエアロゾルのコンタミネーションを防止することができます。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
240-3902-082	CryoSureチューブ 1.5ml 自立型 未滅菌	200本 (200本×1パック)	¥5,800 → 40個限り	¥3,480

在庫限り!
販売終了

冷凍/冷却ボックス

CoolBox™

biocision

CoolBox™は氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るペンチトップ型のツールです。CoolBox™システムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack®やCoolSink®と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。

- ◆ 長時間、温度分布を均一に保つことが可能
- ◆ 電源や氷など必要なし

予冷時間

	フタなし	フタあり
0.5℃～4℃ Cooling Cartridges	4時間	10時間
-20℃～0℃ Freezing Cartridges	3時間	6時間



BCS-134

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BCS-134	CoolBox™ M-30PF System 構成：CoolBox 30 System, CoolRack M30-PF (BCS128;1ml/2mlチューブx30用)	1式	¥82,000 → 9個限り	¥49,200
BCS-135	CoolBox™ CF30 System 構成：CoolBox 30 System, CoolRack CF30 (BCS129;1ml/2ml クライオチューブx30用)	1式	¥66,000 → 12個限り	¥39,600

■ CoolBox 30 System構成：CoolBoxベース&フタ、冷蔵用カートリッジ（青色）、レッドステージ（ドライアイス用）、インシュレーターパッド（30穴）

在庫
限り!
販売終了

ラベル

BMBioチューブ用クライオラベル

BMBio

- ◆ 手書きでもレーザープリンターでも使用可能
- ◆ オートクレープ不可
- ◆ 材質: ポリオレフィン
- ◆ 温度耐性: -196℃~100℃

チューブ用クライオラベル スポットラベル

カタログNo.	色	サイズ (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
L-5000-6B	●青	φ9.5	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 16箱限り	¥680
L-5000-6G	●緑	φ9.5	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 33箱限り	¥680
L-5000-6R	●赤	φ9.5	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 31箱限り	¥680
L-5000-8B	●青	φ13.0	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 13箱限り	¥680
L-5000-8G	●緑	φ13.0	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 4箱限り	¥680
L-5000-8R	●赤	φ13.0	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 15箱限り	¥680

使用目的

9.5
mm0.5ml・1.5ml
サンプリング
チューブ用13
mm0.5ml・1.5ml・
2.0ml サンプリング
チューブ用

チューブ用クライオラベル サイドラベル

カタログNo.	色	サイズ (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
L-5000-B	●青	24×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 8箱限り	¥680
L-5000-G	●緑	24×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 13箱限り	¥680
L-5000-O	●橙	24×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 12箱限り	¥680
L-5000-R	●赤	24×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 16箱限り	¥680
L-5000-Y	●黄	24×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 2箱限り	¥680
L-5001-B	●青	33×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 6箱限り	¥680
L-5001-G	●緑	33×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 10箱限り	¥680
L-5001-O	●橙	33×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 6箱限り	¥680
L-5001-R	●赤	33×13	1000枚 (1000×1パック)	¥1,700 → 15箱限り	¥680

使用目的

24×13mm

0.5mlサンプリングチューブ用

33×13mm

1.5ml・2.0mlサンプリング
チューブ用

タフタッグレーザープリンター用

- ◆ レーザープリンターで印刷できます。
- ◆ シートレイアウト: 5×17
- ◆ オートクレープ可能 (121℃, 15分)
- ◆ 温度耐性: -40℃~121℃



使用目的

33×13mm

1.5ml・2.0mlサンプリング
チューブ用

カタログNo.	色	サイズ (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
L-1000-5	白	33×13	2125枚 (2125×1パック)	¥20,100 → 4箱限り	¥7,800

チューブ用スポット&サイドラベルディスペンサー

カタログNo.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
L-5000-ST	1個 (1個×1パック)	¥8,800 → 19個限り	¥3,520



* ラベルは含まれていません。

在庫限り!
販売終了

電気泳動槽

Enduro™ Gel XL 電気泳動システム

Labnet
Labnet International, Inc.

- ◆ 一般的な電気泳動槽とパワーサプライのセットよりもはるかに小さい設置面積
- ◆ 150Vのパワーサプライと泳動槽をダイレクトにコード無しで接続
- ◆ コームは両側に歯数の異なる櫛がありコンパチブルに使用可能
- ◆ リッドは熱を逃がす工夫がされており、ゲルタンクからの漏れが無い設計
- ◆ 安全のため磁石センサーを搭載しており、リッドがセットされていないときは電流が流れません。
- ◆ 電圧値はデジタルで設定します。電流値は電圧を設定すると自動的に定まります。
- ◆ 電気泳動は開始後いつでも一時停止することができ、電圧の変更も可能
- ◆ ゲルタンク内に6×6cmの小さいゲルキャストセットを4つ設置
- ◆ ゲルタンク一体型ダイレクト接続パワーサプライ
- ◆ 最大114サンプルアプライ可能



出力電圧/電流	10～150V / 10～400mA
タイマー	0～99時間59分、または連続
寸法(全体)	24.5×17×6.2cm
寸法(Gel tank)	18.3×16.4×5.6cm
寸法(パワーサプライ)	7.5×17.0×6.2cm

ゲルの大きさ (capacity)	ラージゲル (12.5×12cm)×1枚, スモールゲル (12.5×6cm)×2枚, マイクロゲル (6×6cm)×4枚
プログラムメモリー	最後に設定したプログラム1個が 保存
入力電圧	100-240V, 50 / 60Hz

■ 構成

- ・ゲルタンク
- ・パワーサプライ
- ・スタンダードキャストセット
- ・マニュアル ・保証書

カタログ No.	商品名	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
E0160	Enduro Gel XL Electrophoresis System	¥105,000 →	5個限り ¥63,000

カタログNo.	商品名	構成 (数量)	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
E0161	Large Gel Tray Set	12.5×12cm 2個	¥4,500 →	3個限り ¥2,700
E0162	Small Gel Tray Set	12.5×6cm 2個	¥4,500 →	4個限り ¥2,700
E0163	Micro Gel Tray Set	6×6cm 4個	¥6,300 →	3個限り ¥3,780
E0164	Large Comb Set	14/28列 (リバーシブル) 2個	¥6,300 →	3個限り ¥3,780
E0165	Small Comb Set	5/8列 (リバーシブル) 2個	¥6,300 →	3個限り ¥3,780
E0166	Micro Casting Set	micro gel tray×4個, Small comb×2個, casting standard	¥22,500 →	3個限り ¥13,500
E0167	Casting stand	すべてのゲルサイズに対応	¥6,300 →	3個限り ¥3,780
E0168	Standard Casting Set	Large gel tray×1個, Small gel tray×2個, Large Comb×4個, Casting stand	¥22,500 →	3個限り ¥13,500

在庫限り!
販売終了

電気泳動槽


Enduro Modular Vertical Gel System

Labnet
Labnet International, Inc.

PAGE, エレクトロブロッティング, 2D電気泳動を行うことができます。モジュールユニット設計になっていますのでお使いになるアプリケーションに応じた構成のみを購入していただくことが出来ます。共通のバッファータンクに3種類の異なるアプリケーションに対応した電極ユニットをリッドにセットした上取り付けます。

1年保証

カタログ No.	商品名	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
E2010-P	Enduro PAGE system	¥101,000 →	3個限り ¥60,600
E2010-PB	Enduro PAGE Electrophoresis System	¥133,800 →	3個限り ¥80,280
E2010-P2	Enduro PAGE 2D System	¥141,000 →	3個限り ¥84,600
E2010-2M	2D Electrophoresis Module (PAGEシステム専用)	¥59,400 →	2個限り ¥33,840

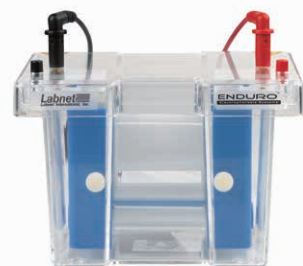

カタログNo.	E2010-P	E2010-PB	E2010-P2
ゲルの大きさ	10×10cm	NA	8cm
枚数	2枚*	4枚トランスファー可能	10チューブ
最大サンプル数	一枚のゲルあたり20サンプル	NA	10
タンク寸法	19×13×15cm	19×13×15cm	19×13×15cm
バッファ容量	250ml	1200ml	500ml
内容品**	2ea 10×10 ノッチプレート 2ea 10×10 プレート wスパーサー 2ea 1mm comb, 12well PAGEモジュール, キャスティングベース	4ea ブロッティングカセット 6ea ファイバーパッド ブロッティングモジュール PAGEシステム	20ea キャパシティチューブ 20ea チューブサポート 10 ea ブロッティングプラグ IEFモジュール, PAGEシステム
構成	PAGEインサート, バッファータンク (リッド付), クーリングバック	ブロッティングインサート, PAGEシステムコンポーネント	2Dインサート, PAGEシステムコンポーネント

* プレートを重ねることで4枚泳動できます。

** それぞれのシステムはバッファータンク、リッド、リード線、クーリングバック、マニュアル、保証書を含みます。ブロッティング、IEFシステムにはPAGEコンポーネントも含まれます。

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

在庫
限り!
販売終了

小型遠心機

1524

GYROZEN®

- ◆ 1.5mlマイクロチューブ用高性能小型遠心機
 - ◆ プログラムは100件までメモリー可能
 - ◆ 必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ
 - ◆ 独特なエアフローシステム (特許済)
 - ◆ 8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター有 (別売)
- ※その他のローターについてはお問い合わせ下さい。

MAX
21,206 xg

最大回転数/遠心力	15,000rpm/21,206xg
最大収容本数	2.0mlチューブ×24本
設定温度	—
タイマー	パルス・≤100分・連続運転
Time at Set Speed	有
ノイズ	≤ 60dB
Acc/Dec (ステップ)	9/10ステップ
プログラム	100
ローターの認識機構	—
バランス認識機構	有
セーフティーロック機能	有
終了時自動開蓋	有
アラーム音量可変機能	有
電動式蓋の閉鎖	—
電力	440VA
サイズ (W×D×H)	249×368×240mm
重量 (ローターなし)	18Kg
CEマーク	有

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

GZ-1524-110BMR 1年保証 希望販売価格 ¥240,400 ➡ 2台限り **¥144,240**

■ 構成：本体、電源ケーブル、ローター (GRF-m2.0-24)、マニュアル、保証書

在庫
限り!
販売終了

小型遠心機

空冷式遠心機 Prism™

Labnet
Labnet International, Inc.

空冷式

- ◆ 素早い遠心加速度を実現、作動中でも作動音が静か
- ◆ タッチパネルとダイヤルで容易に設定と作動が可能
- ◆ マルチフロー空冷テクノロジーの採用により作動中でもサンプルの温度上昇を防止
- ◆ 核酸やタンパク質の遠心分離に最適
- ◆ ワンタッチで回転数 (rpm) と遠心力 (×G) の切り替え可能
- ◆ ローターに設置したチューブが取り出しやすい

収容本数	1.5/2.0ml チューブ×24本(ローター付き)
回転数	500 ~ 15,000rpm
最大遠心力	21,200×g
タイマー	30秒~99分または継続作動
サイズ (W×D×H)	24×35×19cm
重量	9.6kg
電源	100V、50/60Hz、1.5A

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格

Prism 1年保証 希望販売価格 ¥454,300 ➡ 3台限り **¥272,580**

■ 構成：本体、電源ケーブル、ローター、マニュアル、保証書



**在庫
限り!**
販売終了

ELED シリーズ 〈Every Lab Every Day〉

コンパクトデジタルシェーカー

thermo scientific

コンパクトデジタルロッカー

カタログ No.

88880019

1年保証

希望販売価格

¥132,300

➡ 1台限り

キャンペーン中の参考価格

¥66,150

振とう速度	5-100rpm
タイマー	1分-99時間59分/連続運転
振とう角度	7° -13°
サイズ	トレイ (W×D) : 276×276mm 本体 (W×D×H) : 276×320×150mm
重量	3.7kg
電源	50/60Hz, 100-240V

◆ 本体にはトレイ、シリコンパッド、バンド2本が付属



コンパクトデジタルウェイビングローテーター

カタログ No.

88880021

1年保証

希望販売価格

¥132,300

➡ 1台限り

キャンペーン中の参考価格

¥66,150

振とう速度	8-100rpm
タイマー	1分-99時間59分/連続運転
振とう角度	0° -13°
サイズ	トレイ (W×D) : 276×276mm 本体 (W×D×H) : 276×320×150mm
重量	3.7kg
電源	50/60Hz, 100-240V

◆ 本体にはトレイ、シリコンパッド、バンド2本が付属



チップ

チューブ・プレート

ビレット

リザーバー

細胞培養

グローブ

こんな商品あります

CRYO

機器

在庫
限り!
販売終了

ハンディーランプ

ハンディ型 UV ランプ (フィルター付タイプ)


 大分県大分市大分東区
コスモバイオ株式会社

- ◆ ハンディ操作可能な小型UVランプ
- ◆ 長寿命特殊フィルター装備
- ◆ 高い強度の紫外線を長時間、安定に放射

【アプリケーション】

- ・ DNAバンドの切り出し
- ・ TLC
- ・ ペーパークロマト
- ・ 蛍光化学
- など

波長	365nm
UV放電管	4W放電管×1本
強度	400μW/cm ²
本体寸法 (W×D×H)	200×85×60mm
電源	100V 50/60Hz

※この商品は、VILBER LOURMAT 社商品となります。

カタログ No.

VL-4.L

1年保証

希望販売価格

¥54,000

➡ 1台限り

キャンペーン中の参考価格

¥27,000

■ 構成：UVランプ本体、コンセント、マニュアル、保証書

大幅
値下げ在庫
限り!
販売終了

ハンディーランプ

MINIMAX 2UV ハンディーランプ


 SPECTROLINE®

- ◆ 2波長 (254/365nm) 出力可能なハンディーランプ
- ◆ スライドカバーで波長切り替えが容易
- ◆ 単3アルカリ乾電池4本で4～6時間照射可能

出力	5W
フィルターサイズ	56×21mm
サイズ	229×57×32mm
重量	340g
電源	単3乾電池4本 (別売)

カタログ No.

UV-5NF

1年保証

希望販売価格

¥37,100

➡ 2台限り

キャンペーン中の参考価格

¥18,550

在庫
限り!
販売終了

紫外線保護具

紫外線保護フェイスシールド


 SPECTROLINE®

- ◆ 各種紫外線ランプから目を守るシールドです。

カタログ No.

UVF-80

希望販売価格

¥22,700

➡ 1個限り

キャンペーン中の参考価格

¥11,350



Luminex社ブランド商品価格改定のお知らせ (2022年7月1日～)

Luminex

2022年7月1日改訂

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格 (2022年6月30日まで)	新希望販売価格 (2022年7月1日から)
0110-8617	Muse Open Module Software	1式	¥349,200	¥437,000
0500-3115	Muse Cell Analyzer	1式	¥2,340,000	¥2,930,000
0500-4005	Guava easyCyte 5HT	1式	¥8,130,000	¥10,200,000
0500-4007	Guava easyCyte 6HT-2L	1式	¥9,760,000	¥12,200,000
0500-4008	Guava easyCyte 8HT	1式	¥13,010,000	¥16,300,000
0500-4009	Guava easyCyte 5HT HPL	1式	¥9,370,000	¥11,800,000
0500-4012	Guava easyCyte 12HT	1式	¥17,730,000	¥22,200,000
0500-4015	Guava easyCyte HT BG	1式	¥13,940,000	¥17,500,000
0500-4020	Guava easyCyte 11HT	1式	¥15,200,000	¥19,000,000
0500-4025	Guava easyCyte HT BGR	1式	¥16,630,000	¥20,800,000
0500-4030	Guava easyCyte HT BGV	1式	¥18,000,000	¥22,500,000
0500-5005	Guava easyCyte 5	1式	¥5,690,000	¥7,120,000
0500-5007	Guava easyCyte 6-2L	1式	¥7,320,000	¥9,150,000
0500-5008	Guava easyCyte 8	1式	¥9,760,000	¥12,200,000
0500-5009	Guava easyCyte 5 HPL	1式	¥6,970,000	¥8,750,000
0500-5012	Guava easyCyte 12	1式	¥14,840,000	¥18,600,000
0500-5015	Guava easyCyte BG	1式	¥11,170,000	¥14,000,000
0500-5020	Guava easyCyte 11	1式	¥12,380,000	¥15,500,000
0500-5025	Guava easyCyte BGR	1式	¥13,780,000	¥17,300,000
0500-5030	Guava easyCyte BGV	1式	¥15,100,000	¥18,900,000
100220	ImageStreamX MkII System Standard Bundle	1式	¥27,210,000	¥34,000,000
100370	Amnis FlowSight System	1式	¥13,790,000	¥17,300,000
200101	Amnis Imaging Data Analysis Workstation	1式	¥1,190,000	¥1,500,000
200111	HighPower BlueLaser Upgrade 488nm 400mW	1式	¥3,230,000	¥4,050,000
200119	UV Excitation Laser - 375 nm 70 mW MkII	1式	¥5,810,000	¥7,270,000
200121	Violet Excitation Laser - 405nm 120mW	1式	¥5,810,000	¥7,270,000
200129	UV+VioletDual Laser-375nm70mW+405nm175mW	1式	¥11,630,000	¥14,600,000
200136	Red Excitation Laser - 642 nm 150 mWMkII	1式	¥3,390,000	¥4,250,000
200141	Green ExcitationLaser - 561 nm200 mWMkII	1式	¥8,880,000	¥11,100,000
200151	Yellow ExcitationLaser - 592nm300 mWMkII	1式	¥9,530,000	¥12,000,000
200161	AutoSampler MkII	1式	¥6,300,000	¥7,880,000
200181	12 Imaging Channels MkII	1式	¥13,730,000	¥17,200,000
200182	12 Imaging Channels and EDF	1式	¥22,230,000	¥27,800,000
200191	MultiMag - 60X 40X and 20X	1式	¥6,300,000	¥7,880,000
200201	Extended Depth of Field (EDF) MK2	1式	¥5,770,000	¥7,220,000
200320	Violet Excitation Laser - 405 nm 100 mW	1式	¥4,680,000	¥5,860,000
200330	Red Excitation Laser - 642 nm 100 mW	1式	¥3,230,000	¥4,050,000
200340	Green Excitation Laser - 561 nm 50 mW	1式	¥6,300,000	¥7,880,000
200360	Autosamper FlowSight	1式	¥5,650,000	¥7,070,000
4000-0040	Guava ViaCountR Reagent (100 tests)	40mL	¥27,100	¥36,000
4000-0041	Guava ViaCount Reagent (600 tests)	240mL	¥143,000	¥188,000
4000-0061	Guava Express 7-AAD Reagent	200tests	¥26,200	¥35,000
4200-0140	Guava Instrument Cleaning Fluid (ICF) (100 mL) fo	100mL	¥5,500	¥8,000
4500-0020	Guava Check Kit	100tests	¥33,800	¥45,000
4500-0025	Guava Easy Check Kit (Guava easyCyte HT Systems)	100tests	¥42,300	¥56,000
4500-0110	Guava ViaCount Flex Reagent for Challenge Samples	100tests	¥33,800	¥45,000
4500-0220	Guava Cell Cycle Reagent (100 tests)	100tests	¥19,500	¥26,000
4500-0450	GuavaR Nexin Reagent (100 tests)	100tests	¥54,900	¥73,000
4500-0455	GuavaR Nexin Reagent (500 tests)	500tests	¥259,100	¥340,000
4700-0050	Guava ViaCountR Cell Dispersal Reagent (100 tests)	100tests	¥23,400	¥31,000
4700-0060	Guava ViaCountR Flex Reagent for Challenge Samples	500tests	¥116,200	¥153,000
ACS10000	Amnis Cell Signaling Kit-NFkB	50tests	¥66,900	¥88,000
APH10001	Amnis Protein Aggregate Kit	400tests	¥126,000	¥166,000
CN-0440-01	SpeedBead Kit for ImageStreamX	1kit	¥151,800	¥200,000
CN-0441-01	Calibration Reagent for FlowSight	1kit	¥76,100	¥100,000
CN-0442-01	Flow Cell PCA/EasyCyte™ Mini Flow Cytometry Syste	1x1pk	¥45,400	¥57,000
CN-0443-01	Flow Cell PCA-96/EasyCyte™ Flow Cytometry Systems	1x1pk	¥47,800	¥60,000
CN-0444-01	Flow Cell easyCyte SL systems	1個	¥58,100	¥73,000

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格 (2022年6月30日まで)	新希望販売価格 (2022年7月1日から)
CN-0445-01	easyCyte SL Instrument Shipping Box	1個	¥59,500	¥75,000
CN-0446-01	easyCyte Cleaning Solution Vial SL	1x1pk	¥25,200	¥32,000
CN-0447-01	easyCyte Waste Vial SL	1x1pk	¥25,200	¥32,000
CN-0448-01	Flow Cell easyCyte HT Systems	1個	¥61,000	¥77,000
CN-0449-01	easyCyte HT instrument shipping box	1x1pk	¥50,400	¥63,000
CN-0450-01	easyCyte Cleaning Solution Vial HT	1x1pk	¥49,800	¥63,000
CN-0451-01	easyCyte Waste Vial HT	1x1pk	¥35,900	¥45,000
CN-0452-01	Muse Cleaning Solution Bottle	1x1pk	¥18,600	¥24,000
CN-0453-01	Muse Waste Solution Bottle	1x1pk	¥14,800	¥19,000
CN-0454-01	Flow Cell Assembly Muse	1個	¥63,700	¥80,000
CN-0455-01	Flow Cell Cleaning Tool	1x1pk	¥3,100	¥4,000
CN-0457-01	1.5-mL tubes Eppendorf (quantity 500)	500x1pk	¥21,700	¥29,000
CN-0472-01	Muse Installation and Training	1式	¥222,000	¥240,000
CN-0473-01	Guava easyCyte Installation and Training	1式	¥219,300	¥225,900
CN-SW45-01	マシーナラーニングモジュール for IDEAS	1式	¥808,500	¥1,020,000
CN-SW69-01	IDEAS6.3	1式	¥613,700	¥768,000
CN-SW70-01	Amnis AI 1year Introductory 1ライセンス	1式	¥1,210,000	¥1,520,000
CN-SW70-03	Amnis AI 3year Subscription	1式	¥2,180,000	¥2,730,000
CS-100196	CellStream Base Instrument 488nm 7Ch HTS	1式	¥12,720,000	¥15,900,000
CS-200375	CellStream 375nm laser option 70mW	1式	¥6,690,000	¥8,370,000
CS-200405	CellStream 405nm laser option 175mW	1式	¥4,020,000	¥5,020,000
CS-200532	CellStream 532nm laser option 150mW	1式	¥5,350,000	¥6,700,000
CS-200561	CellStream 561nm laser option 150mW	1式	¥6,430,000	¥8,050,000
CS-200642	CellStream 642nm laser option 150mW	1式	¥2,680,000	¥3,350,000
CS-200730	CellStream 730nm laser option 40mW	1式	¥5,350,000	¥6,700,000
CS-300300	CellStream Software Multi User Access	1式	¥1,000,000	¥1,260,000
CS-600200	CellStream Installation	1式	¥487,400	¥502,100
FCCH100108	FlowCollect™ Annexin Red Kit (100 tests)	100tests	¥51,200	¥68,000
FCCH100171	FlowCollect™ Autophagy LC3 Antibody-based Assay K	100tests	¥65,000	¥86,000
FCCS025153	FlowCollect™ H2A.X DNA Damage Dual Detect Kit	25tests	¥47,800	¥63,000
FCCS100182	FlowCollect™ H2A.X Phosphorylation	100tests	¥77,900	¥103,000
FCPA100101	Guava SARS-CoV-2 マルチ抗原抗体アッセイキット	100tests	¥110,400	¥145,000
IFC300202	IDEAS Software - 21CFR enabled	1式	¥976,200	¥1,220,000
IFC300203	INSPIRE FS & IDEAS Software - 21CFR	1式	¥1,670,000	¥2,100,000
IFC300204	INSPIRE ISX & IDEAS Software - 21CFR	1式	¥1,670,000	¥2,100,000
MCH100101	Muse System Check Kit	100tests	¥34,900	¥46,000
MCH100102	Muse Count & Viability Kit (100 tests)	40mL	¥27,600	¥37,000
MCH100104	Muse Count & Viability Reagent (200x)	100tests	¥33,000	¥44,000
MCH100105	Muse Annexin V & Dead Cell Kit	100tests	¥50,600	¥67,000
MCH100106	Muse Cell Cycle Kit	100tests	¥24,200	¥32,000
MCH100107	Muse Cell Dispersal Reagent	100tests	¥23,600	¥31,000
MCH100108	Muse Caspase-3/7 Kit	100tests	¥72,000	¥95,000
MCH100109	Muse MultiCaspase Kit	100tests	¥82,400	¥109,000
MCH100110	Muse MitoPotential Kit	100tests	¥62,200	¥82,000
MCH100111	Muse Oxidative Stress Kit	100tests	¥53,800	¥71,000
MCH100112	Muse Nitric Oxide Kit	100tests	¥60,500	¥80,000
MCH100114	Muse Ki67 Proliferation Kit	100tests	¥53,800	¥71,000
MCH200101	Muse™ H2A.X Activation Dual Detect Kit	200tests	¥66,100	¥87,000
MCH200102	Muse™ EGFR-RTK Activation Dual Kit	200tests	¥58,400	¥77,000
MCH200103	Muse™ PI3K Activation Dual Detection Kit	200tests	¥58,400	¥77,000
MCH200104	Muse™ MAPK Activation Dual Detection Kit	200tests	¥58,400	¥77,000
MCH200105	Muse™ Bcl-2 Activation Dual Detection Kit	200tests	¥66,100	¥87,000
MCH200107	Muse Multi Color DNA Damage Kit	200tests	¥58,400	¥77,000
MCH200108	Muse PI3/MAPK dual Activation Kit	200tests	¥72,700	¥96,000
MCH200109	Muse™ Autophagy LC3 -antibody based Kit	200tests	¥64,000	¥84,000
MCH600103	Muse Count&Viability Reagent (600 tests)	600tests	¥136,800	¥180,000
MIM100101	Muse™ Human CD4 T Cell Kit	100tests	¥63,900	¥84,000
MIM100102	Muse™ Human CD8 T Cell Kit	100tests	¥63,900	¥84,000
MIM100103	Muse™ Human B Cell Kit	100tests	¥63,900	¥84,000

【新希望販売価格・消費税について】

価格表の新希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。新希望販売価格は2022年7月1日からの価格です。
 なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にはご確認ください。希望販売価格には消費税は含まれておりません。

チップ

チューブ・プレート

ビヘット

リザーバー

細胞培養

グローブ

こんな商品あります

CRYO

機器

チップ

ロングチップ 低吸着タイプ

BMBio
ST (Standard & Stable)

- ◆ ロングタイプの低吸着チップ
- ◆ DNase, RNase, パイロジェンフリー
- ◆ 目盛付
- ◆ 滅菌済み

-10μl



全長：39.1±0.15mm 目盛：2μl, 10μl



カタログ No.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMSSCH0001	ラック	960本 (96本×10ラック)	¥7,300 → ¥4,380
BMSSCH0004	詰め替え	960本 (96本×10プレート)	¥5,000 → ¥3,000

-200μl



全長：59.3±0.2mm 目盛：10μl, 50μl, 100μl



カタログ No.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMSSCH0002	ラック	960本 (96本×10ラック)	¥6,000 → ¥3,600
BMSSCH0005	詰め替え	960本 (96本×10プレート)	¥5,000 → ¥3,000

-1000μl



全長：102±0.25mm 目盛：200μl, 500μl, 1000μl



カタログ No.	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
BMSSCH0003	ラック	960本 (96本×10ラック)	¥8,000 → ¥4,800
BMSSCH0006	詰め替え	384本 (96本×4プレート)	¥2,400 → ¥1,440

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2022年7月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL:03-6666-5903/FAX:03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL:03-6666-5902/FAX:03-5677-4081