

2025

研究・作業用グローブ ライフサイエンス・ インダストリーカタログ



今ご使用の手袋は法改正に対応済みですか？

新たな化学物質規制が導入されます。

化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められます。

*健康障害の恐れがある有害物質に応じて、労働者に障害防止用の保護具の着用が **2024 年 4 月より義務化**されました。

2023 年 4 月 1 日
努力義務



【法改正】

2024 年 4 月 1 日
義務



キャンペーン情報
はこちら



サンプル依頼
はこちら



カタログ一覧
はこちら



皆様の使っている手袋は安全ですか？

職場における

新たな化学物質規制が導入されました。

1

ラベル・SDSの伝達や、リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加します。

2

リスクアセスメントの結果を踏まえ、労働者がばく露される濃度を基準以下とすることが義務付けられます。

3

化学物質を製造・取り扱う労働者に適切な保護具を使用させることが求められます。

4

自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められます。
(化学物質管理者の選任、リスクアセスメントの結果等の記録作成・保存等)

これまで以上に**事業者の主体的な取組**が求められます
ラベル・SDSの伝達やリスクアセスメントの実施がこれまで以上に重要になります

① SDS及び作業現場の確認

② リスクアセスメントの実施

③ リスク低減措置の実施

自律的な管理が今後の規制の基軸になります！

ラベル・SDS通知、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加します

改正前

674 物質

改正後（順次追加後）

国がGHS分類済 約**2900**物質
+ 以降新たに分類する物質

ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質（リスクアセスメント対象物）に、**国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加**します。

R4年2月改正・R6年4月施行

発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性、急性毒性の категорияで区分1に分類された**234物質**が義務対象に追加。

R4年度中改正・R7年4月施行予定

左記以外の категорияで区分1に分類された約**700物質**を義務対象に追加予定。

R5年度中改正・R8年4月施行予定

健康有害性の категорияで区分2以下又は物理化学的危険性の区分に分類された約**850物質**を義務対象に追加予定。

自律的な管理が今後の規制の基軸になります！

これまでの化学物質規制

石綿等管理使用が困難な物質	・製造、使用禁止【8物質】	
自主管理が困難で有害性の高い物質	・ラベル表示義務 ・SDS 交付義務 ・リスクアセスメント義務【674物質】	・特化則・有機則等に基づく個別具体的な措置
許容濃度またはばく露限界値が示されている危険・有害な物質		
GHS 分類で危険性・有害性がある物質	・ラベル表示努力義務 ・SDS 交付努力義務 ・リスクアセスメント努力義務	・一般的な措置義務
GHS 分類で危険性・有害性がない物質		

見直し後の化学物質規制

石綿等管理使用が困難な物質	・ 製造、使用禁止【8物質】	
自主管理が困難で有害性の高い物質	・ ラベル表示義務 ・ SDS 交付義務 ・ リスクアセスメント義務 【約2,900物質】	・ 特化則・有機則等に基づく個別具体的な措置 ・ ばく露を基準以下とする義務 ・ ばく露を最小限度にする義務 ・ 適切な保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の義務・努力義務
許容濃度またはばく露限界値が示されている危険・有害な物質		
GHS 分類で危険性・有害性がある物質		
GHS 分類で危険性・有害性がない物質		

障害化学物質等から保護するため、保護具の適切な着用が求められます。

化学物質への直接接触の防止

皮膚等への障害を引き起こしうる化学物質を製造・取扱う業務に労働者を従事させる場合、**物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用**させなければなりません。

健康障害のおそれ

ある

不明

ないことがあきらか

2023 年
4 月 1 日

2024 年
4 月 1 日

努力義務

義務

努力義務

(皮膚障害等防止用保護具の着用は不要)

AnsellGUARDIAN® は、安全のエキスパートであるアンセルが、45年におよぶ安全検査の経験とデータを基に、各人に応じた安全性、生産性の向上をご提案するサービスです。



安全

お客様に合わせたソリューション

適切な保護手袋を選んでいますか？

2017年1月12日厚生労働省労働基準局から基発0112号が発令

厚生労働省労働基準局 基発0112号

※ 基発 0112 号の JIS の部分を抜粋

- 第 1 事業者が留意する事項
- 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項
「化学防護手袋の選択に当たっては、取扱説明書等に記載された試験化学物質に対する耐透過性クラスを参考として、作業で使用する化学物質の種類及び当該化学物質の使用時間に応じた耐透過性を有し、作業性の良いものを選ぶこと。」

防護性が失われる状況



アンセルの耐薬品手袋の全商品は、
JIS T 8116(ASTM F 739)の試験データを保有しております。

JIS T 8116 耐透過性の分類

クラス	平均標準破過点検出時間(分)
6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10

X	<10
---	-----

アンセルのガイド

保護性能

優れた保護
優れた保護
中程度の保護
中程度の保護
飛沫に対する保護
飛沫に対する保護

(ケミカルガーディアン
のレポートには
Xクラスと保護性能
が補足されます。)

推薦されない

透過データの調査
ご依頼はこちら！



使用化学薬品の管理の細かさという壁

現場で使われる薬品は多岐にわたり、現場ごとにデータを揃えるのは大変です。

アンセル社は、保有の約5万種類の薬品データを利用し、適切な手袋をご提案します。
時間と手間がかかる調査を、約5万種類の薬品データを利用し、簡単に選べるチャート表で回答します。



Material				LLDPE		Nitrile					Nitrile/ Neoprene	PVA	PVC	Viton Butyl
Thickness (mm)				0.062	0.12	0.56	N.A.			0.19	N.A.		0.2	
Product Name / Style				Barrier	TouchNTuff®	Solvex®	AlphaTec®	AlphaTec®	AlphaTec®	MICROFLEX®	PVA	Snorkel	ChemTek	
Type	CAS	Chemical name	%	02-100	92-500, 600.605 / 93-250, 300.700	37-185, 186.165	58-270	58-330	58-335	93-260	15-554	04-414	38-612	
sgl	75-05-8	アセトニトリル	100	>480'	<10'	30'	<10'	<10'	10-30'	5'	150'	<10'	70'	
sgl	67-64-1	アセトン	100	>480'	<10'	<10'	<10'	<10'	<10'	3'	143'	<5'	93'	
sgl	67-63-0	イソプロパノール	70	>480'	120-240'	>480'	120-240'	>480'	>480'	240-480'	10-30'	60-120'	>480'	
sgl	7782-50-5	液化塩素	1	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	<10'	>480'	>480'	
sgl	7647-01-0	塩酸	37	>480'	30-60'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	<10'	300'	>480'	
sgl	67-66-3	クロロホルム	100	20'	<10'		<10'	<10'	<10'	2'	>360'	<10'	212'	
sgl	141-78-6	酸エチル	100	>480'	<10'	10-30'	<10'	10-30'	10-30'	4'	>360'	<10'	10'	
sgl	109-89-7	ジエチルアミン	100	>480'	<10'	51'	<10'	10-30'	10-30'	6'	<10'	10-30'	19'	
sgl	1336-21-6	水酸化アンモニウム	29	30-60'	10-30'	240-480'	60-120'	120-240'	>480'	47'	<10'	240-480'	>480'	
sgl	1310-73-2	水酸化ナトリウム 30%	30	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	<10'	>480'	>480'	
sgl	1310-73-2	水酸化ナトリウム 99%	99	>480'	>480'	240-480'	>480'	>480'	>480'	>480'	<10'	>480'	>480'	
sgl	109-99-9	テトラヒドロフラン	100	>480'	<10'	10-30'	<10'	<10'	10-30'	2'	115'	<10'	10'	
sgl	108-88-3	トルエン	100	>480'	<10'	34'	<10'	10-30'	10-30'	6'	>480'	<10'	313'	
sgl	75-15-0	二酸化炭素	100	>480'	<10'	30'	<10'	10-30'	10-30'	1'	>360'	<5'	138'	
sgl	7664-39-3	フッ化水素酸	48	>480'	<10'	120-240'	30-60'	120-240'	120-240'	84'	<10'	>480'	>480'	
sgl	110-54-3	n-ヘキサン	100	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>360'	<10'	>480'	
sgl	67-56-1	メチルアルコール	100	>480'	<10'	103'	10-30'	10-30'	10-30'	10-30'	<10'	45'	363'	
sgl	75-09-2	メチレンクロライド	100	20'	<10'	<10'	<10'	<10'	<10'	<1'	>480'	<10'	29'	
sgl	7664-93-9	硫酸	96	>480'	10-30'	120-240'	30-60'	30-60'	30-60'	30-60'	<10'	30-60'	>480'	

最後に適切な手袋をご提案します。

HAND AND ARM PROTECTION

	カテゴリー	特徴	特性
	HIGH TOUCH ハイタッチ	繊細な運動のコントロールを必要とする作業に必要な感度と触感を提供するために設計された極薄手袋	極薄 高感度 超軽量 繊細な運動コントロール
	MULTI-PURPOSE 多用途使い捨て手袋	幅広い用途と環境に対応し、信頼性の高い防護を提供する多用途使い捨て手袋	比較的重め 幅広いアプリケーション 汎用性
	ROBUST 高耐久性使い捨て手袋	強度、耐久性、そして過酷な作業条件下での長時間の着用に耐えるよう設計された高反発手袋	丈夫で長持ち 化学飛沫防御の向上
	HIGH RISK ハイスク	ユーザーの保護を拡大するために特別に設計された、高性能の長スリーブ手袋	長めのカフ 防護性の向上 追加の認証
	CLEAN/STERILE クリーンルーム用手袋	清潔で滅菌された手袋は、クリーンルームや無菌コントロール状態の特別な要件を満たすように設計されています。	ISO4, 5, 6準拠
	ISOLATOR & RABS GLOVES アイソレーター& RABS手袋	クリーン&クリーン/無菌アイソレーター医薬品グレード手袋は、最も厳しい要件を満たすためにクリーンルームで処理され、梱包されています。	丈夫で長持ち ISO4, GMP準拠 優れた化学防護性 優れた操作性と快適性

INDUSTRY

	カテゴリー	特徴	特性
	MECHANICAL PROTECTION インダストリー	豊富なラインナップで幅広い分野で使用可能	丈夫で長持ち 幅広いアプリケーション

INDEX

HAND AND ARM PROTECTION | HIGH TOUCH ハイタッチ

材質	ブランド	カタログNo	ページ
ニトリル	MICROFLEX® XCEED®	93-733	10

HAND AND ARM PROTECTION | MULTI-PURPOSE 多用途使い捨て手袋

材質	ブランド	カタログNo	ページ
ラテックス	MICROFLEX® Diamond Grip Plus™	63-754	12
ラテックス	TouchNTuff®	69-210	13
ニトリル	EDGE®	82-133/82-134/82-135	14-16

HAND AND ARM PROTECTION | ROBUST 高耐久性使い捨て手袋

材質	ブランド	カタログNo	ページ
ニトリル	TouchNTuff®	92-500/92-600	18-19
ニトリル	Supreno®	93-743	20
ニトリル	MICROFLEX®	94-242/93-252	21-22
ネオプレン	NeoTouch™	25-101	23

HAND AND ARM PROTECTION | HIGH RISK ハイリスク

材質	ブランド	カタログNo	ページ
ニトリル	MICROFLEX®	93-243	26
ニトリル	Mega Texture	93-283	27
ニトリル	Supreno® Plus	93-753	28
ニトリル/ネオプレン	MICROFLEX®	93-260	29
ネオプレン	NeoTouch™	25-201	30

HAND AND ARM PROTECTION | CLEAN/STERILE クリーンルーム用手袋

材質	ブランド	カタログNo	ページ
ラテックス	AccuTech®	91-210/91-225	32-33
ラテックス	BioClean™	AL300	34
ニトリル	Nitrilite®	93-401	35
ニトリル	BioClean™	BSAN/BENS/BNPS	36-38
ニトリル/ネオプレン	Microflex®	93-360	39
ネオプレン	TouchNTuff® DERMASHIELD™	73-701	40

HAND AND ARM PROTECTION | ISOLATOR & RABS GLOVES アイソレーター & RABS 手袋

材質	ブランド	カタログNo	ページ
ラテックス	AlphaTec®	55-101/55-105	42-43
ニトリル	BioClean™	CGL36NIT59	44
ネオプレン	AlphaTec®	55-301/55-302/55-303/55-305/55-306/55-307	45-50
CSM (クロロスルホン化ポリエチレン)	AlphaTec®	85-300/85-302	51-52
EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)	AlphaTec®	85-502/85-600	53-54

INDEX

CHEMICAL PROTECTION | INDUSTRY インダストリー

材質	ブランド	カタログNo	ページ
●耐薬品用			
ニトリル	AlphaTec®	58-008/58-128/58-270/58-330	56-59
ニトリル	AlphaTec® Solvex®	37-165/37-176/37-185	60-62
ニトリル/コットン	AlphaTec®	58-435/58-530B	63-64
ニトリル+PVC/コットン	AlphaTec®	04-005	65
ラテックス	AlphaTec®	87-950	66
ラテックス/ネオプレン	AlphaTec®	29-500	67
ネオプレン	AlphaTec®	29-865	68
ネオプレン/コットン	AlphaTec®	19-024/19-026	69-70
ブチルポリマー	AlphaTec®	38-001/38-514	71-72
LLDPEラミネートフィルム	AlphaTec®	02-100/15-554	73-74

MECHANICAL PROTECTION | INDUSTRY インダストリー

材質	ブランド	カタログNo	ページ
●耐切創用			
ケブラー繊維/ニトリル	HyFlex®	11-501	76
ナイロン/ニトリル	HyFlex®	11-801	77
グラスファイバー/ニトリル	EDGE®	48-929	78
ケブラー/ラテックス	ActivArmr®	80-600	79
Dyneema®ダイアモンド繊維/ポリウレタン	HyFlex®	11-518	80
ナイロン・HPPE/ポリウレタン	HyFlex®	11-644	81
ポリエチレン繊維/ポリウレタン	HyFlex®	11-724	82
ナイロン・HPPE/ポリウレタン	HyFlex®	11-729	83
グラスファイバー・HPPE/ポリウレタン	HyFlex®	11-735	84
グラスファイバー・HPPE/ポリウレタン	HyFlex®	11-751	85
ナイロン/ポリウレタン	HyFlex®	11-754	86
HPPE・タングステン/ポリウレタン	HyFlex®	11-755	87
ナイロン・ステンレス・タングステン/ポリウレタン	HyFlex®	11-757	88
ポリエチレン・グラスファイバー/ポリウレタン	EDGE®	48-701	89
HPPE・グラスファイバー/ポリウレタン	EDGE®	48-705	90
Dyneema®ダイアモンド繊維	HyFlex®	11-318	91
Dyneema®/ガラス繊維・ポリエステル	HyFlex®	74-045	92

INDEX

MECHANICAL PROTECTION | INDUSTRY インダストリー

材質	ブランド	カタログNo	ページ
●作業用			
導電性繊維/ニトリル	HyFlex®	11-100	94
ナイロン/ニトリル	HyFlex®	11-800	95
Dyneema®ダイアモンド繊維/ニトリル	HyFlex®	11-937	96
ポリエステル/ニトリル	EDGE®	48-128	97
ナイロン・ポリエステル/ニトリル	EDGE®	48-702	98
グラスファイバー・HPPE/ニトリル	EDGE®	48-706	99
ポリエステル/ニトリル	EDGE®	48-919	100
ニトリル/コットン	ActivArmr® Hycron®	27-607	101
ニトリル+PVC/ニット	ActivArmr®	07-112	102
ナイロン/ポリウレタン	HyFlex®	11-618/48-135	103
ポリエステル/ポリウレタン	EDGE®	48-125/48-126/48-129	104-106
Thermolite®ポリエステル	ActivArmr®	78-150	107
ポリウレタン（エプロン）	AlphaTec®	56-800	108
●耐熱用			
ポリエステル/ニトリル	ActivArmr® Flex	42-445	110
ポリエステル	ActivArmr®	42-474	111
ケブラー繊維	ActivArmr®	43-113	112
ケブラー繊維+牛革/コットン	ActivArmr® Workguard™	43-216	113
牛革/ヤギ革	ActivArmr®	43-217	114
●腕カバー			
ナイロン/ポリエステル/グラスファイバー	HyFlex®	11-200	116
ケブラー繊維	HyFlex®	70-138	117



HIGH TOUCH
ハイトッチ



XCEED® 93-733

人間工学に基づく設計技術 ERGOFORM™ を採用した、ニトリル
実験用手袋

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。



手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザイン

- ERGOFORM™ 技術を採用し、筋骨格の正常な動きをサポートし生産性を向上
- 繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計
- 破れや裂けを防止する丈夫な仕様
- 手袋を取り出しやすい1箱あたり250枚入りの無駄のない包装で廃棄物を削減
- ピンホールに対する合格品質基準 (AQL) 0.65で優れたバリア性能
- ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。
- 加硫促進剤フリー

業界

- 自動車アフターマーケット
- ライフサイエンス

推奨用途

- 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- 工場の消毒および衛生管理
- 部品の組み立て
- サンプルの追跡および処理
- 原料のサンプル収集

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93733060	XS	250枚	¥4,700	250枚×10箱
93733070	S	250枚	¥4,700	250枚×10箱
93733080	M	250枚	¥4,700	250枚×10箱
93733090	L	250枚	¥4,700	250枚×10箱
93733100	XL	230枚	¥4,700	230枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	240		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 0.65		ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm)	0.07		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.11		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	22	14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2



MULTI-PURPOSE
多用途使い捨て手袋



Diamond Grip Plus™ 63-754

ラテックス実験用手袋

手袋外面	全面粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア



注意：この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。



長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感

- ・保護性能の高い厚手設計
- ・外側はエンボス加工が施されており、滑りにくくなっています。

業界

- ・ライフサイエンス

推奨用途

- ・機器、メンテナンス、修理
- ・サンプルの追跡および処理
- ・長時間作業における快適性を重視

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
63754060	XS	100枚	¥2,300	100枚×10箱
63754070	S	100枚	¥2,300	100枚×10箱
63754080	M	100枚	¥2,300	100枚×10箱
63754090	L	100枚	¥2,300	100枚×10箱
63754100	XL	100枚	¥2,300	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	245		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm)	0.13		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.16		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	22	20	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
切断時引張力 (N)	9	6	EN 455-2



TouchNTuff® 69-210

簡単な装着と汗や水分の吸収を考慮した設計

手袋外面	加工無し
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア



注意：この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。



パウダー付き使い捨てラテックス製手袋

- ・長時間装着時も快適なラテックス製
- ・極めて繊細な指先の感覚を実感いただける薄手設計
- ・簡単に装着でき、汗や水分を吸収するパウダー付き

業界

- ・ライフサイエンス
- ・化学薬品

推奨用途

- ・サンプルの追跡および処理
- ・メンテナンス

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
69210080	M	100枚	¥2,400	100枚×10箱
69210090	L	100枚	¥2,400	100枚×10箱
69210100	XL	100枚	¥2,400	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	240		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm)	0.09		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.11		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 650	≥ 500	ASTM D412



EDGE® 82-133

使い捨てニトリル手袋

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	中国



お手頃な価格の快適な手袋

- 保護を損なわずに、快適性、柔軟性を高める、より薄いニトリルで製造されています。
- 指先がテクスチャー加工されており、様々な用途で把持力が向上します。
- 1箱に300枚の手袋が入っており、付加価値と利便性を提供します。

業界

- 自動車
- ライフサイエンス

推奨用途

- ケータリング/食事の準備
- 部品、機器の点検
- 部品の組み立てと検査
- 機器の修理とメンテナンス
- 部品のピッキングおよび固定
- 部品とシステムの調整
- 塗装・グルーガンと噴霧器の取り扱い
- 液体と固体の輸送
- サンプルの追跡および処理

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
82133060	XS	300枚	¥5,400	300枚×10箱
82133070	S	300枚	¥5,400	300枚×10箱
82133080	M	300枚	¥5,400	300枚×10箱
82133090	L	300枚	¥5,400	300枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	230		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D6319-10, ASTM D5151-06 (2011)
掌部の厚さ (mm)	0.06		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.08		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D6319-10
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D6319-10
切断時引張力 (N)	3	3	EN 455-2



EDGE® 82-134

指にテクスチャー加工されたニトリル使い捨て手袋

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	中国



触覚感覚が良く、耐久性があり、広い範囲の用途で手を保護します。

- ・ 軽量構造になっているため、触覚感覚が良く、手の動きを微細に調節できます。
- ・ 高品質のニトリルで作られているため、引き裂き抵抗が強いです。
- ・ さまざまな業界の幅広い環境で利用できるように設計

業界

- ・ 自動車
- ・ 清掃/衛生

推奨用途

- ・ ケータリング/食事の準備
- ・ 漬け込み
- ・ 切り落とし肉とひき肉の包装
- ・ 機器、メンテナンス、修理
- ・ 清掃、掃除、メンテナンス
- ・ パーソナルケアおよび美容院

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
82134060	XS	100枚	¥2,000	100枚×10箱
82134070	S	100枚	¥2,000	100枚×10箱
82134080	M	100枚	¥2,000	100枚×10箱
82134090	L	100枚	¥2,000	100枚×10箱
82134100	XL	100枚	¥2,000	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	240		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151-06 (2011), EN 374-2
掌部の厚さ (mm)	0.07		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.11		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	500	400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	6	6	EN 455-2



EDGE® 82-135

使い捨てニトリルグローブ

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	中国



長時間の着用にも耐久性のある費用対効果の高いグローブ

- ・ 堅牢な設計：より長い装着時間を可能にします。
- ・ テクスチャード加工：乾いた環境でも濡れた環境でもしっかりとしたグリップ力を発揮
- ・ 多用途：複数の業界に適用可能で、さまざまなサイズが用意されています。

業界


- ・ 農業
- ・ 清掃・衛生

用途

- ・ 設備、メンテナンス、修理
- ・ 部品の締め付け、ネジ締め、ネジの取り外し
- ・ ペイント/グルーガンおよび噴霧器の取り扱い
- ・ 研究室での作業、混合、調合、充填、洗浄
- ・ 機械関連の仕事
- ・ メンテナンスと設備の清掃

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
82135060	XS	100枚	¥3,200	100枚×10箱
82135070	S	100枚	¥3,200	100枚×10箱
82135080	M	100枚	¥3,200	100枚×10箱
82135090	L	100枚	¥3,200	100枚×10箱
82135100	XL	100枚	¥3,200	100枚×10箱
82135110	XXL	100枚	¥3,200	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	240		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm)	0.17		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.19		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	16	16	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	8	8	EN 455-2

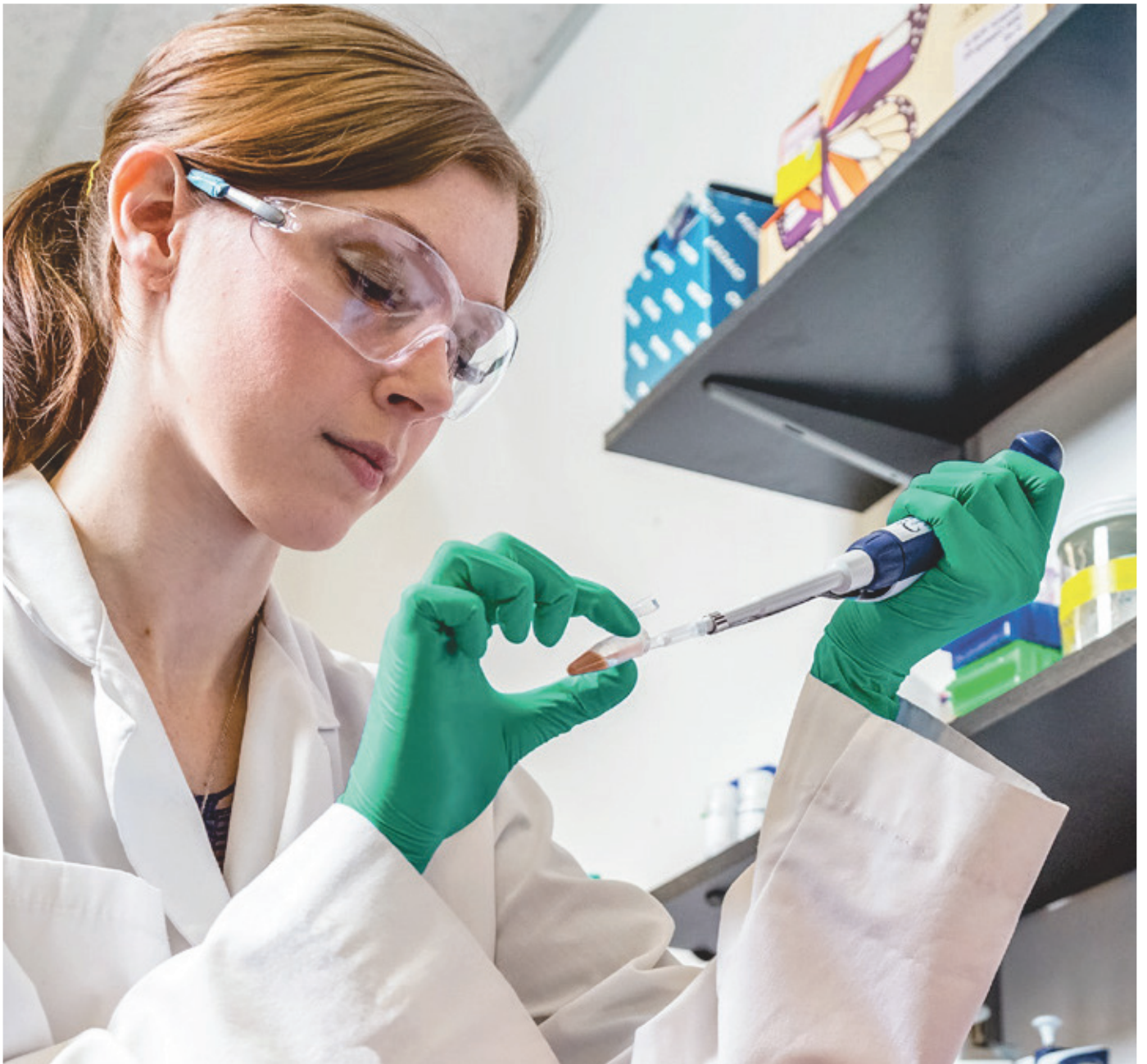

ROBUST
高耐久性使い捨て手袋



TouchNTuff® 92-500

有害化学物質の飛沫に対する実証された耐性

手袋外面	指先粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア



化学薬品の飛沫に対する保護が強化されたパウダー付き使い捨てニトリル製手袋（パウダー付き手袋）

- ・化学薬品に対する飛沫保護を強化するアンセル独自の素材配合
- ・高水準の快適な装着感を実現するやわらかいニトリル配合の設計
- ・耐久性を強化する丈夫な設計と機械的特性
- ・簡単に装着でき、汗や水分を吸収するパウダー付き



業界

- ・ライフサイエンス
- ・自動車
- ・機械および機器

推奨用途

- ・液体と固体の輸送
- ・サンプルの追跡および処理
- ・工業生産
- ・ラボでの分析
- ・メンテナンス

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
92500070	S	100枚	¥2,800	100枚×10箱
92500080	M	100枚	¥2,800	100枚×10箱
92500090	L	100枚	¥2,800	100枚×10箱
92500100	XL	100枚	¥2,800	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	240		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm)	0.11		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.14		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

TouchNTuff® 92-600

化学薬品の飛沫保護の分野で世界をリードする使い捨て手袋

手袋外面	加工無し
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	スリランカ, タイ



化学薬品の飛沫に対する保護が強化された耐久性に優れた使い捨てニトリル製手袋

- ・ 化学薬品の飛沫保護の分野で世界をリードする使い捨て手袋
- ・ 化学薬品に対する飛沫保護を強化するアンセル独自の素材配合
- ・ 高水準の快適な装着感を実現するやわらかいニトリル配合の設計
- ・ 耐久性を強化する丈夫な設計
- ・ 製品を保護するシリコンフリーのソリューション

業界

- ・ ライフサイエンス
- ・ 自動車
- ・ 機械および機器
- ・ 化学薬品
- ・ 農業
- ・ 倉庫

推奨用途

- ・ 液体と固体の輸送
- ・ サンプルの追跡および処理
- ・ 工業生産
- ・ メンテナンス
- ・ ラボでの分析
- ・ 化学薬品の取り扱い

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
92600070	S	100枚	¥3,200	100枚×10箱
92600080	M	100枚	¥3,200	100枚×10箱
92600090	L	100枚	¥3,200	100枚×10箱
92600100	XL	100枚	¥3,200	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	240		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm)	0.125		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.14		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

Supreno® 93-743

耐久性に優れたニトリル製手袋（高度なバリア保護）

手袋外面	指先粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア



過酷な作業向けの高い保護性能

- ・ 過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計
- ・ 長時間の装着を想定した頑丈な設計
- ・ 許容ピンホール合格品質基準 (AQL) が 0.65 の優れたバリア性能
- ・ 強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先
- ・ ポリマーコーティングによるスムーズな着脱

業界

- ・ 自動車
- ・ 自動車アフターマーケット
- ・ ライフサイエンス

推奨用途

- ・ 部品の検査、選別、点検
- ・ 部品の組み立てと検査
- ・ 部品のピッキングおよび固定
- ・ 機器の修理とメンテナンス
- ・ 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- ・ 石油、液体、フィルター交換
- ・ エンジン / トランスミッションおよび修理
- ・ タイヤのローテーションおよび交換
- ・ ラボの設備と機器の管理
- ・ 部品の組み立て
- ・ サンプルの追跡および処理
- ・ 原料のサンプル収集

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
93743060	XS	100枚	¥3,000	100枚×10箱
93743070	S	100枚	¥3,000	100枚×10箱
93743080	M	100枚	¥3,000	100枚×10箱
93743090	L	100枚	¥3,000	100枚×10箱
93743100	XL	100枚	¥3,000	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	245		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 0.65		ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm)	0.11		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.18		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	550	500	ASTM D412
切断時引張力 (N)	12	9	EN 455-2

Microflex® 94-242

使い捨て静電気防止手袋

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	タイ



静電気放電による火災、爆発、破損の危険性を低減する手袋

- ・ 静電気防止手袋：EN16350防爆エリアでの静電対策グローブ
- ・ 独自のニトリル製法： 10^8 Ω以下の垂直電気抵抗
- ・ TNT™ Chemical Splash Resistance Technology：化学防護を強化

業界

- ・ 航空宇宙
- ・ 化学薬品
- ・ 電子機器
- ・ ライフサイエンス
- ・ 製造

推奨用途

- ・ 化学薬品と洗浄剤の取り扱い
- ・ 工具の取り扱い
- ・ 機器、メンテナンス、修理
- ・ ばら積み品の解梱
- ・ 製品の配送、輸送、納入
- ・ 梱包およびラベル貼付
- ・ 石油、液体、フィルター交換
- ・ 部品、機器の点検

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
94242070	S	100枚	¥4,500	100枚×10箱
94242080	M	100枚	¥4,500	100枚×10箱
94242090	L	100枚	¥4,500	100枚×10箱
94242100	XL	100枚	¥4,500	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	245		EN ISO 21420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		EN 374-2
掌部の厚さ (mm)	0.12		
指部の厚さ (mm)	0.16		
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

Microflex® 93-252

汚れを目立たなくする黒色

手袋外面	全面粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア



汚れから手を守り、優れたグリップ力を発揮する黒ニトリル手袋

- 汚れを隠す：MICROFLEX® 93-252手袋の黒色は汚れを隠すと同時に、明るい色の対象物の視認性を高めます。
- 指先グリップを強化したグローブ：テクスチャー加工された非発泡性のデザインは、パウダーとシリコンを含まないニトリル手袋に優れたグリップ力を提供します。
- 証明された保護性：EN ISO 374のType Bの耐化学性の基準に準拠し、化学的飛沫から保護します。
- 汎用性：特に自動車整備士、メンテナンス作業員によって使用されるさまざまな用途に適しています。

業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- ライフサイエンス
- 機械および機器

推奨用途

- 部品の検査、選別、点検
- 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- 掃除用具とロボット機器の使用
- 石油、液体、フィルター交換
- エンジン/トランスミッションおよび修理
- タイヤのローテーションおよび交換
- ラボの設備と機器の管理
- サンプルの追跡および処理
- 固体および液体の調合、配合
- 原料のサンプル収集
- 固体および液体原料の計量および分配
- 検査（ピッキング、点検、マーキング）


カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93252060	XS	100枚	¥3,200	100枚×10箱
93252070	S	100枚	¥3,200	100枚×10箱
93252080	M	100枚	¥3,200	100枚×10箱
93252090	L	100枚	¥3,200	100枚×10箱
93252100	XL	100枚	¥3,200	100枚×10箱
93252110	XXL	100枚	¥3,200	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	245		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm)	0.12		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.15		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
切断伸び (%)	600	500	ASTM D412
切断時引張力 (N)	7	6	

NeoTouch™ 25-101

快適なネオプレンの使い捨て手袋

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	インドネシア, マレーシア

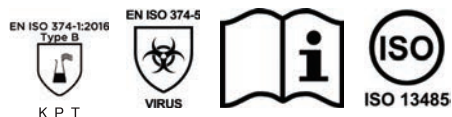

快適なネオプレンの使い捨て手袋

- ・ほとんどの酸やアルコールの飛沫に対して優れた保護性
- ・濡れた環境でも乾いた環境でも優れたグリップ力
- ・ネオプレン素材は、皮膚への刺激やI型アレルギー反応のリスクを軽減
- ・着用しやすいポリウレタンのインナーコーティング

業界

- ・ライフサイエンス
- ・化学薬品

推奨用途

- ・液体と固体の輸送
- ・サンプルの追跡および処理

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
25101060	XS	100枚	¥4,800	100枚×10箱
25101070	S	100枚	¥4,800	100枚×10箱
25101080	M	100枚	¥4,800	100枚×10箱
25101090	L	100枚	¥4,800	100枚×10箱
25101100	XL	100枚	¥4,800	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	240		ASTM D3767, EN 455-2
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm)	0.13		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.16		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 18	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 3.6	≥ 3.6	

MEMO



HIGH RISK
ハイリスク



Microflex® 93-243

製品と作業者の両方を保護するエクストラロングカフ

手袋外面	全面粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア



使い捨てニトリル製手袋 (39.5cmのロングカフ)

- ・ 二次感染に対する保護を強化するために肘までカバーするロングカフ
- ・ 化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮する快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材
- ・ ずり落ちを防止する独自設計のカフ
- ・ 安心してしっかりと握める粗面加工が施された掌部と指先

業界

- ・ ライフサイエンス

推奨用途

- ・ 特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93243070	S	100枚	¥8,500	100枚×10箱
93243080	M	100枚	¥8,500	100枚×10箱
93243090	L	100枚	¥8,500	100枚×10箱
93243100	XL	100枚	¥8,500	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	395		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm)	0.13		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.17		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6	

Mega Texture 93-283

滑り止めグリップ付きニトリル使い捨て手袋

手袋外面	全面粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	タイ



凹凸のある表面を備えた青色のニトリル手袋は、高いグリップ力があります。

- Mega Texture 表面：非常に安全なグリップを実現
- 丈夫な0.2mmの厚さ：破れに強く、製品を保護します。

業界

- 清掃・衛生
- 自動車アフターマーケット

推奨用途

- 包装とラベル貼り付け
- 冷蔵
- 骨抜き、彫刻
- 清掃、メンテナンス

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93283070	S	50枚	¥3,700	50枚×10箱
93283080	M	50枚	¥3,700	50枚×10箱
93283090	L	50枚	¥3,700	50枚×10箱
93283100	XL	50枚	¥3,700	50枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	300		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm)	0.20		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.24		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	25	23	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	500	400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	> 6	> 6	EN 455-2



Supreno® Plus 93-753

耐久性のあるニトリル試験用手袋

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア



化学物質飛沫から保護します。

- ・ 耐久性のあるニトリル配合：引っ掛かりや引き裂きに対する堅牢な保護
- ・ 化学薬品飛沫防止：高リスク環境に適しています。
- ・ 低いAQL：許容ピンホールはAQLが0.65で、優れたバリア機能

業界

- ・ 自動車
- ・ 自動車アフターマーケット
- ・ ライフサイエンス

推奨用途

- ・ 部品の検査・選定・チェック
- ・ 部品の組み立てと検査
- ・ コンポーネントのピッキングと固定
- ・ 設備の修理・メンテナンス
- ・ 汎用自動車アフターマーケット
- ・ タイヤのローテーションと交換
- ・ 動物の世話と餌やりと清掃
- ・ 研究室の家具や設備のメンテナンス
- ・ サンプルの採取と処理
- ・ 薬物の投与
- ・ 原料サンプル採取
- ・ 手首と腕をさらに保護

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93753070	S	50枚	¥3,000	50枚×10箱
93753080	M	50枚	¥3,000	50枚×10箱
93753090	L	50枚	¥3,000	50枚×10箱
93753100	XL	50枚	¥3,000	50枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	295		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 0.65		ASTM D5151, EN 374-2
掌部の厚さ (mm)	0.14		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.22		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	550	500	ASTM D412
切断時引張力 (N)	15	12	EN 455-2

Microflex® 93-260

強力な化学的防護、抜群の装着感

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	スリランカ



最薄の耐薬品性使い捨て手袋（合成複合素材製）

- ・ 刺激の強い化学薬品に対する優れた保護を提供する3層設計
有機溶剤耐性に優れたニトリルと酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで優れた耐薬品性を実現
- ・ 繊細な指先の感覚と細かな指先の動きを可能にする最薄の耐薬品性使い捨て手袋
- ・ 抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現する極めてやわらかい素材と人間工学に基づいた設計
- ・ 有害物質に対する信頼できる保護を提供するため、許容されるピンホール発生率が低い（合格品質基準（AQL）0.65）

業界

- ・ 航空宇宙
- ・ 自動車
- ・ 自動車アフターマーケット
- ・ ライフサイエンス
- ・ 化学薬品
- ・ 農業
- ・ 機械および機器
- ・ 金属加工
- ・ 倉庫

推奨用途

- ・ 部品の検査、選別、点検
- ・ 部品の組み立てと検査
- ・ 機器の修理とメンテナンス
- ・ 生産ラインのサポートとメンテナンス
- ・ 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- ・ 石油、液体、フィルター交換
- ・ 固体および液体の調査、配合
- ・ サンプルの追跡および処理
- ・ 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93260060	XS	50枚	¥4,400	50枚×10箱
93260070	S	50枚	¥4,400	50枚×10箱
93260080	M	50枚	¥4,400	50枚×10箱
93260090	L	50枚	¥4,400	50枚×10箱
93260100	XL	50枚	¥4,400	50枚×10箱
93260110	XXL	50枚	¥4,400	50枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	≥ 285		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 0.65		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm)	0.198		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.20		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

NeoTouch™ 25-201

ロングタイプの快適なネオプレンの使い捨て手袋

手袋外面	指部粗面加工
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	インドネシア



ロングタイプの快適なネオプレン製使い捨て手袋

- ほとんどの酸やアルコールの飛沫に対して優れた保護性
- 濡れた環境でも乾いた環境でも優れたグリップ力
- ネオプレン素材は、皮膚への刺激やI型アレルギー反応のリスクを軽減
- 着用しやすいポリウレタンのインナーコーティング
- 手首と前腕を保護するロングカフ

業界

- ライフサイエンス
- 化学薬品

推奨用途

- 液体と固体の輸送
- サンプルの追跡および処理

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
25201060	XS	100枚	¥5,900	100枚×10箱
25201070	S	100枚	¥5,900	100枚×10箱
25201080	M	100枚	¥5,900	100枚×10箱
25201090	L	100枚	¥5,900	100枚×10箱
25201100	XL	100枚	¥5,900	100枚×10箱

物理的特性	標準値		試験方法
全長 (mm)	285		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm)	0.13		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm)	0.16		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 18	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 3.6	≥ 3.6	EN 455-2



CLEAN/STERILE
クリーンルーム用手袋

AccuTech® 91-210

ラテックス製使い捨て滅菌手袋

手袋外面	指部粗面加工
規制	CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, 使用説明書を参照してください, ISO 13485, ISO 14001
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア
クリーンルーム対応	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms



注意：この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。



耐久性と快適な装着感を備える保護性能の高い清潔な滅菌手袋

滅菌用途向けのAccuTech® 91-210は、快適な装着感と指先の動きを重視した特別設計の厚手の滅菌済みラテックス製手袋です。シリコンコーティングにより、二重に装着する場合もスムーズに装着できます。

- ・快適な装着感と指先の細かな動きを可能にする設計のラテックス製厚手手袋
- ・Class 10 (ISO 4) / Grade Aクリーンルーム環境対応
- ・極めて低レベルの溶出物および粒子量
- ・タンパク質含有量が少ないためアレルギーのリスクを低減
- ・ガンマ線滅菌済 (25kGy)
- ・タンパク質レベル：溶出タンパク質総量50μg/dm²以下

業界

- ・バイオテクノロジー応用製品の製造
- ・ラボでの研究開発
- ・製薬
- ・管理された重要な環境

推奨用途

- ・無菌充填およびラベル貼付
- ・固体および液体の調査、配合
- ・サンプルの追跡および処理
- ・液体と固体の輸送

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
91-210-6	S	10双	¥5,100	10双×10袋
91-210-6.5	S+	10双	¥5,100	10双×10袋
91-210-7	M	10双	¥5,100	10双×10袋
91-210-7.5	M+	10双	¥5,100	10双×10袋
91-210-8	M++	10双	¥5,100	10双×10袋
91-210-8.5	L	10双	¥5,100	10双×10袋
91-210-9	L+	10双	¥5,100	10双×10袋

物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	280	EN 420/ASTM D3767
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 1.5	EN 455-1/ASTM D3577
標準微粒子数≥0.5μm (個/cm ²)	粒子600個/cm ² 未満	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.21 (+/-0.03)	EN 420/ASTM D3767
単層指部の最低厚さ (mm)	0.24 (+/-0.04)	EN 420/ASTM D3767
単層カフの最低厚さ (mm)	0.18 (+/-0.02)	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	20	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	N/A	EN 455-2

AccuTech® 91-225

快適さと器用さに優れた滅菌手袋

手袋外面	指部粗面加工
規制	21 CFR パート 820 品質システム規則, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, 使用説明書を参照してください, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア
クリーンルーム対応	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms



使い捨ての滅菌済天然ラテックスゴム手袋

無菌性が求められる環境で作業する際に着用でき、手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された厚く清潔な滅菌済天然ラテックスゴム手袋です。

- ・ 快適さと器用さを追求した厚手の天然ラテックスゴム手袋
- ・ Class 100 (ISO 5) / Grade Aのクリーンルーム環境に対応
- ・ タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋
- ・ ガンマ線滅菌済 (25kGy)
- ・ タンパク質レベル: 溶出タンパク質総量 $50\mu\text{g}/\text{dm}^2$ 以下

業界

- ・ バイオテクノロジー応用製品の製造
- ・ ラボでの研究開発
- ・ 製薬
- ・ 管理された重要な環境

推奨用途

- ・ 無菌充填およびラベル貼付
- ・ 固体および液体の調合、配合
- ・ サンプルの追跡および処理
- ・ 液体と固体の輸送

CE 0493



注意: この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
91225060	XS	10双	¥2,000	10双×10袋
91225065	XS+	10双	¥2,000	10双×10袋
91225070	S	10双	¥2,000	10双×10袋
91225075	M	10双	¥2,000	10双×10袋
91225080	M+	10双	¥2,000	10双×10袋
91225085	L	10双	¥2,000	10双×10袋
91225090	L+	10双	¥2,000	10双×10袋

物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	300	EN 420/ASTM D3767
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 0.65	EN 455-1/ASTM D3577
標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個/ cm^2)	< 3500	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.23	EN 420/ASTM D3767
単層指部の最低厚さ (mm)	0.23	EN 420/ASTM D3767
単層カフの最低厚さ (mm)	0.25	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	24	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2



BioClean™ alpha AL300

クラス10（ISO 4）環境対応の滅菌ラテックス製クリーンルーム手袋



クリーンルーム用にデザインされた滅菌済み使い捨てラテックス手袋

- ・高い快適性と柔軟性：BioClean™ Alpha AL300保護手袋は解剖学的にデザインされ、滅菌天然ゴムラテックスを使用しているため、快適性と柔軟性が保証されています。
- ・改善された耐久性：この使い捨てパウダーフリーのラテックス手袋は、補強されたカフデザインを誇り、強度と安定性を高めると同時に、着用時の手袋の破れを軽減します。
- ・強化された使いやすさ：EasyOnテクノロジーを採用し、簡単に二重手袋ができますようにデザインされています。
- ・確実な清潔さ：BioClean™ Alpha AL300手袋は、純粋にクリーンルーム対応の手保護用として、非分泌性のEasyTearパッケージに入っています。

業界

- ・管理された重要な環境
- ・生産と製造
- ・ラボおよび研究開発
- ・滅菌処理部門

主な特徴

- ・左右別タイプの滅菌ラテックスデザイン：優れた快適性と柔軟性
- ・補強されたカフ：装着時に破れることが少ない。
- ・スムーズなグリップ：より確実に安全な操作性

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
AL300-60	S	10双	¥5,100	10双×10袋
AL300-65	S+	10双	¥5,100	10双×10袋
AL300-70	M	10双	¥5,100	10双×10袋
AL300-75	M+	10双	¥5,100	10双×10袋
AL300-80	M++	10双	¥5,100	10双×10袋
AL300-85	L	10双	¥5,100	10双×10袋
AL300-90	L+	10双	¥5,100	10双×10袋



注意：この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	300	EN ISO 21420
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 0.65	EN 374-2
標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個/cm ²)	< 3500	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.20	EN 455-2
単層指部の最低厚さ (mm)	0.24	EN 455-2
単層カフの最低厚さ (mm)	0.18	EN 455-2
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	Min. 14	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	$\geq 9\text{N}$	EN 455-2

Nitrilite® 93-401

クリーンルーム向けの信頼性の高い保護

手袋外面	指部粗面加工
規制	カテゴリー III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
保管方法	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
生産国	マレーシア
クリーンルーム対応	ISO クラス 4



ソフトで耐久性に優れたニトリル製、未滅菌促進剤フリーのクリーンルーム用手袋

- 確実な清潔さ：Nitrilite™ 93-401保護手袋は、Class 10 (ISO 4)のクリーンルーム環境で使用するために特別にデザインされています。
- 改善された製品保護：柔らかく耐久性に優れたニトリル製クリーンルーム用手袋は、イオン含有量が低く、微粒子レベルも低いため、製品を確実に保護します。
- 低減されたアレルギーのリスク：このニトリル手袋はラテックスプロテインや化学促進剤を使用していないため、Type IおよびType IVのアレルギー反応のリスクがありません。

業界

- バイオテクノロジー応用製品の製造
- 医療機器の製造
- エレクトロニクス製造

推奨用途

- クリーンルームの清掃および準備
- 固体および液体の調査、配合
- 流出や漏出の清掃
- 液体と固体の輸送
- 遠心分離機とクロマトグラフィカラムの取り付け
- 部品の組み立て
- 固体および液体原料の計量および分配

主な特徴

- Class 10 (ISO 4)クリーンルーム適合性：確実な清浄性
- 低イオン含有量と微粒子レベル：優れた製品保護性
- ラテックスフリー、促進剤フリー：Type IおよびType IVのアレルギーリスクを排除

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93401055	XS	100枚	¥5,400	100枚×10箱
93401065	S	100枚	¥5,400	100枚×10箱
93401075	M	100枚	¥5,400	100枚×10箱
93401085	L	100枚	¥5,400	100枚×10箱
93401095	XL	100枚	¥5,400	100枚×10箱
93401105	XXL	100枚	¥5,400	100枚×10箱

物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	300	EN ISO 21420 ASTM D3767
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 1.5	EN 455-1/ASTM D3577
標準微粒子数 $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (個/ cm^2)	$< 400 \text{ particles}/\text{cm}^2$	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.11	EN ISO 21420/ASTM D3767
単層指部の最低厚さ (mm)	0.16	EN ISO 21420/ASTM D3767
単層カフの最低厚さ (mm)	0.08	EN ISO 21420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	≥ 18	ASTM D412-06a
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	N/A	ASTM D412-06a



BioClean™ Synergy BSAN

クラス10（ISO 4）環境対応の未滅菌ニトリル製
クリーンルーム手袋

手袋外面	指先並びに掌部粗面加工
規制	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, カテゴリー III, UKCA
保管方法	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
生産国	マレーシア
クリーンルーム対応	ISO クラス 4



アレルギーを起こしにくい未滅菌促進剤フリーのニトリル手袋

- ・低減されたアレルギーリスク：ラテックスや化学促進剤を使用していないため、Type IラテックスやType IV化学物質によるアレルギーや過敏症を起こしません。
- ・クリーン加工：この未滅菌手袋は脱イオン洗浄を行い、表面の微粒子、イオン抽出物、不揮発性残留物をさらに低減しています。
- ・より持続可能なパッケージ：プラスチックパッケージはリサイクル可能*で、リサイクル素材から作られた段ボール製シッパーケースに入れてお届けします。

*これらの素材は、お住まいの地域ではリサイクルに適していない可能性があるため、必ずお住まいの地域のリサイクル状況をご確認ください。

業界

- ・管理された重要な環境
- ・生産と製造
- ・ラボおよび研究開発

主な特徴

- ・耐化学性：化学物質や化学療法薬からの保護
- ・二重手袋特性：必要に応じてアンダー手袋としても使用可能
- ・非粒子状パッケージ：潜在的な汚染物質の危険性を低減

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
BSAN-XS	XS	100枚	¥8,400	100枚×10箱
BSAN-S	S	100枚	¥8,400	100枚×10箱
BSAN-M	M	100枚	¥8,400	100枚×10箱
BSAN-L	L	100枚	¥8,400	100枚×10箱
BSAN-XL	XL	100枚	¥8,400	100枚×10箱
BSAN-XXL	XXL	100枚	¥8,400	100枚×10箱



物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	300	EN ISO 21420
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 1.5	EN 374-2
標準微粒子数 $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (個/cm ²)	< 1200	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.10	EN 455-2
単層指部の最低厚さ (mm)	0.14	EN 455-2
単層カフの最低厚さ (mm)	0.08	EN 455-2
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	Min. 15	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	$\geq 6\text{N}$	EN 455-2



BioClean™ Emerald BENS

クラス10 (ISO 4) 環境対応の滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋

手袋外面	平滑、マイクロテクスチャー加工
規制	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, 食品接触, カテゴリー III, UKCA
保管方法	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
生産国	マレーシア
クリーンルーム対応	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms

細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を提供する
加硫促進剤およびパウダーフリーのニトリル製クリーンルーム手袋

BioClean Emerald 滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋は様々な化学薬品耐性を備え、容易に二重装着でき、加硫促進剤とラテックスフリーで、ラテックスアレルギーのリスクを軽減します。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。

業界

- ・バイオテクノロジー応用製品の製造
- ・管理された重要な環境
- ・ラボでの研究開発
- ・医療機器の製造
- ・製薬
- ・生産と製造

推奨用途

- ・薬品飛沫
- ・滅菌処理部門
- ・化学薬品の取り扱い
- ・バイオテクノロジー/混合作業
- ・液体と固体の輸送
- ・サンプルの追跡および処理
- ・無菌充填およびラベル貼付

主な特徴

- ・様々な化学薬品への耐性
- ・パウダー、硫黄および加硫促進剤フリー
- ・ラテックスフリー
- ・滑らかな感触のテクスチャード加工表面
- ・容易な二重装着

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
BENS-6.0	S	10双	¥5,200	10双×10袋
BENS-6.5	S+	10双	¥5,200	10双×10袋
BENS-7.0	M	10双	¥5,200	10双×10袋
BENS-7.5	M+	10双	¥5,200	10双×10袋
BENS-8.0	M++	10双	¥5,200	10双×10袋
BENS-8.5	L	10双	¥5,200	10双×10袋
BENS-9.0	L+	10双	¥5,200	10双×10袋



物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	300	EN ISO 21420
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 0.65	EN 374-2
標準微粒子数 $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (個/cm ²)	< 1200	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.11	EN 455-2
単層指部の最低厚さ (mm)	0.15	EN 455-2
単層カフの最低厚さ (mm)	0.08	EN 455-2
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	Min. 15	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	$\geq 6\text{N}$	EN 455-2



BioClean™ N-Plus BNPS

クラス10 (ISO 4) 環境対応の滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋

手袋外面 規制	指先並びに掌部粗面加工 ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, 食品接触, カテゴリ III, UKCA
保管方法	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されている場合は、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
生産国	マレーシア
クリーンルーム対応	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms



化学物質や化学療法薬に対する保護効果を強化したロングカフのクリーンルーム用手袋

長さ400mmのロングタイプのニトリル製手袋BioClean N-Plusは様々な化学薬品に対する耐性を発揮する手袋で、長時間使用を念頭に左右別タイプの設計が採用されています。BioClean N-PlusはISO クラス4対応で、0.65と低いAQLを満たしたバリア機能を提供します。

業界

- ・バイオテクノロジー応用製品の製造
- ・管理された重要な環境
- ・ラボでの研究開発
- ・医療機器の製造
- ・製薬
- ・生産と製造
- ・滅菌処理部門

推奨用途

- ・液体と固体の輸送
- ・バイオテクノロジー/混合作業
- ・薬品飛沫
- ・無菌充填およびラベル貼付
- ・サンプルの追跡および処理

主な特徴

- ・様々な化学薬品への耐性
- ・肘まで保護
- ・パウダーフリーおよびラテックスフリー
- ・低発塵性
- ・EasyTear パッケージ

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
BNPS60	S	10双	¥7,600	10双×10袋
BNPS65	S+	10双	¥7,600	10双×10袋
BNPS70	M	10双	¥7,600	10双×10袋
BNPS75	M+	10双	¥7,600	10双×10袋
BNPS80	M++	10双	¥7,600	10双×10袋
BNPS85	L	10双	¥7,600	10双×10袋
BNPS90	L+	10双	¥7,600	10双×10袋
BNPS100	L++	10双	¥7,600	10双×10袋



物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	400	EN ISO 21420
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 0.65	EN 374-2
標準微粒子数 $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (個/cm ²)	< 3300	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.18	EN ISO 21420
単層指部の最低厚さ (mm)	0.21	EN ISO 21420
単層カフの最低厚さ (mm)	0.10	EN ISO 21420
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	Min. 15	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	$\geq 9\text{N}$	EN 455-2



Microflex® 93-360

未滅菌使い捨てニトリル&ネオプレン（ポリクロロプレン）クリーンルーム用手袋

手袋外面	指部粗面加工
規制	ASTM D6319, CE 0493, EN 388:2016, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, UKCA
保管方法	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
生産国	スリランカ
クリーンルーム対応	ISO クラス 5



耐化学性に優れた超薄型クリーンルーム用手袋

- ・特殊な保護：3層構造で、酸、塩基、各種溶剤などの過酷な化学薬品から手袋を保護します。
- ・高められた快適性：独自に開発された非常にソフトな配合は、快適性、触感、操作性を兼ね備えています。
- ・低減されたアレルギーリスク：シリコンフリーのクリーンルーム用手袋のニトリルおよびネオプレン複合素材はラテックスを使用していないため、Type Iラテックスアレルギーのリスクを防ぎます。
- ・最小化された汚染リスク：MICROFLEX® 手袋は非分散性のEasyTear/パッケージに入っているため、潜在的な汚染リスクも最小限に抑えられます。

業界

- ・製薬
- ・バイオテクノロジー応用製品の製造
- ・医療機器の製造
- ・エレクトロニクス製造

推奨用途

- ・クリーンルームの清掃および準備
- ・固体および液体の調合、配合
- ・流出や漏出の清掃
- ・液体と固体の輸送
- ・遠心分離機とクロマトグラフィカラムの取り付け
- ・部品の組み立て
- ・固体および液体原料の計量および分配

主な特徴

- ・3層構造：過酷な化学的危険から保護*
- ・独自の配合：快適性、触感、操作性
- ・ニトリルとネオプレンの複合素材：Type Iラテックスアレルギーのリスクを排除
*酸、溶剤、塩基を含む

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93360060	XS	50枚	¥7,400	50枚×10箱
93360070	S	50枚	¥7,400	50枚×10箱
93360080	M	50枚	¥7,400	50枚×10箱
93360090	L	50枚	¥7,400	50枚×10箱
93360100	XL	50枚	¥7,400	50枚×10箱
93360110	XXL	50枚	¥7,400	50枚×10箱

UK
CA

物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	≥ 285	EN 420, ASTM D3767
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 0.65	ASTM D6319-10, ASTM D5151-06 (2011)
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.20	EN 420, ASTM D3767
単層指部の最低厚さ (mm)	0.23	EN 420/ASTM D3767
単層カフの最低厚さ (mm)	0.15	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	Min. 16	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	≥ 6	EN455-2

TouchNTuff® DERMASHIELD™
73-701アレルギー反応を最低限に軽減するクリーンルームや滅菌環境
向けの優れた保護

手袋外面	指部粗面加工
規制	21 CFR パート 820 品質システム規則, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2008
保管方法	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください。
生産国	マレーシア
クリーンルーム対応	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。

アレルギー発生の可能性が低いネオプレン製滅菌済みクリーンルーム
用手袋

アレルギーのリスクを懸念している無菌環境での作業に理想的な手袋です。アレルギー反応の原因となる可能性のあるラテックスタンパク質や加硫促進剤を含まない独自の配合が採用されています。アンセルの SUREFIT™ Technology は、カフのすり落ちを防止します。

- ・クラス Class 100 (ISO 5) / Grade A のクリーンルーム環境での使用に適した滅菌済手袋
- ・即時型 (I型) または遅延型 (IV型) アレルギー反応の原因となる可能性のあるラテックスタンパク質や加硫促進剤を含まないクロロプレン製
- ・カフのすり落ちを防止するアンセルの SUREFIT™ Technology
- ・優れた穿刺抵抗と耐久性
- ・化学薬品の飛沫に対する優れた保護
- ・ガンマ線滅菌済 (25kGy)
- ・タンパク質レベル: 該当せず: 天然ゴムラテックス非含有

業界

- ・製薬
- ・ラボでの研究開発
- ・バイオテクノロジー応用製品の製造
- ・管理された重要な環境
- ・生産と製造

推奨用途

- ・液体と固体の輸送
- ・サンプルの追跡および処理
- ・固体および液体の調合、配合
- ・無菌充填およびラベル貼付

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
73701060	XXS	10双	¥3,200	10双×10袋
73701065	XS	10双	¥3,200	10双×10袋
73701070	S	10双	¥3,200	10双×10袋
73701075	M	10双	¥3,200	10双×10袋
73701080	L	10双	¥3,200	10双×10袋
73701085	XL	10双	¥3,200	10双×10袋
73701090	XXL	10双	¥3,200	10双×10袋

物理的特性	標準値	試験方法
全長 (mm)	305	EN 420/ASTM D3767
水密性検査	合格品質基準 (AQL) 1.0	EN 455-1/ASTM D3577
標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個/ cm^2)	$\leq 2000 \text{ Counts / cm}^2$	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm)	0.18	EN 420/ASTM D3767
単層指部の最低厚さ (mm)	0.19	EN 420/ASTM D3767
単層カフの最低厚さ (mm)	0.15	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2



ISOLATOR & RABS GLOVES


アイソレーター & RABS手袋



AlphaTec® 55-101

非清浄/未滅菌ラテックス (NRL)
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法	乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。
温度範囲	−30℃～50℃

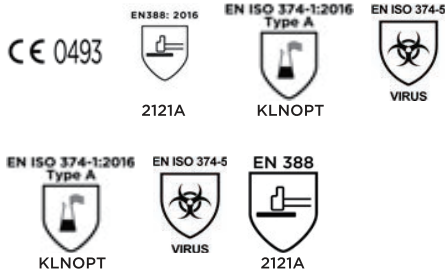

注意：クリーンルーム用ではありません。この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。



NRL RABS/アイソレーターグローブは厚手で、耐摩耗性と耐引裂性に優れています。

ポートサイズ：152mm

厚さ：0.76mm

- 持続的な保護：AlphaTec® NRL RABSおよびAlphaTec® 55-101は、EN 388レベル2の耐引裂性および耐摩耗性を備えています。
- 耐久性の向上：厚手のRABSグローブはさらに耐久性が高く、着用寿命が長くなります。
- 汚染リスクの制限：これらのNRL手袋は半透明で裏地がないため、潜在的な汚染のリスクが軽減され、洗浄プロセスが容易になります。
- EN 388準拠：優れた耐摩耗性と耐引裂性を実現
- 厚手の厚さ：耐久性が高く、手袋の寿命が長くなります。
- 裏地なし：汚染のリスクが軽減され、掃除が簡単です。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
55101080	M	1双	¥12,400	1双×10袋
55101090	L	1双	¥12,400	1双×10袋
55101010	XL	1双	¥12,400	1双×10袋

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	711	EN 455-2
カフの口径 (mm)	152	

掌部の厚さ (mm)	0.76	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.76	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 2
耐刃切れ性	Level 1
引裂き抵抗	Level 2
耐突き刺し性	Level 1



AlphaTec® 55-105


非清浄/未滅菌ラテックス (NRL)
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法

乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。

温度範囲

−30℃～50℃

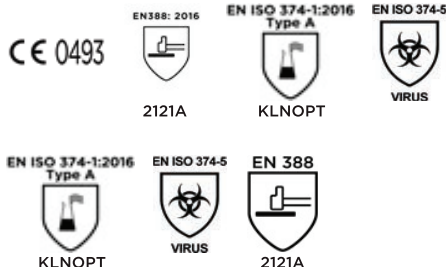

注意：クリーンルーム用ではありません。この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。



耐引裂性および耐摩耗性を備えたNRL RABS/アイソレーターグローブ

ポートサイズ：203mm

厚さ：0.76mm

- 持続的な保護：AlphaTec® NRL RABSおよびAlphaTec® 55-105は、レベル2の耐引裂性および耐摩耗性に関するEN 388規格を満たしています。
- 耐久性の向上：厚手の厚さにより耐久性が向上し、より長く着用できるようになります。
- 汚染リスクが限定的：これらのRABS手袋は、裏地がなく半透明のデザインであるため、汚染リスクが少なく、清潔に保つのが簡単です。
- EN 388準拠：耐引裂性および耐摩耗性の安全手袋用
- 厚手の厚さ：耐久性が向上し、手袋の寿命が長くなります。
- 裏地なし：汚染のリスクが少なく、掃除が簡単です。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
55105010	XL	1双	¥14,400	1双×10袋

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	813	EN 455-2
カフの口径 (mm)	203	

掌部の厚さ (mm)	0.76	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.76	EN 455-2


機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 2
耐刃切れ性	Level 1
引裂き抵抗	Level 2
耐突き刺し性	Level 1



BioClean™ CGL36NIT59

未滅菌RABS/アイソレータ手袋

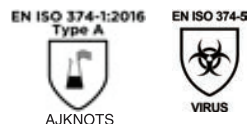

技術



未滅菌RABS/アイソレータ手袋

BioClean RABSおよびアイソレータ手袋は加硫促進剤フリーのニトリル製で、驚くほど低水準の粒子脱落および非常に優れたESD特性を備えています。製品接触領域での用途向けのCGLシリーズの手袋はクリーンルームで加工およびパッケージされており、様々なポートサイズに対応します。

業界

- ・製薬
- ・ラボでの研究開発
- ・バイオテクノロジー応用製品の製造
- ・半導体製造

主な特徴

- ・化学療法薬の取扱いに関する ASTM D6978-05に定められた試験実施済み
- ・100%空気漏れ試験済み
- ・ウルトラクリーン表面が確実に製品を保護
- ・3つのポートサイズ-
8インチ、
10インチ、
12インチ

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
CGL36NIT59	フリー	1双	¥17,800	1双×10袋

物理的特性	標準値	試験方法
サイズ	9.75	
全長 (mm)	840	EN ISO 21420
カフの口径 (mm)	129	EN ISO 21420
ポートサイズ	8インチ、10インチ、12インチ	

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 4
耐切断性	Level 1
耐引裂性	Level 0
耐突刺性	Level 2



AlphaTec® 55-301

非清浄/未滅菌ネオプレン
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法

乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。

温度範囲

−30℃～50℃

CE 0493



2100A



JKLOPT



VIRUS



2100A

UK 0321



注意：クリーンルーム用ではありません。

ネオプレン RABS/アイソレーターグローブ、有害な化学薬品を使用する環境向けに設計です。

ポートサイズ：178mm

厚さ：0.51mm

- ・特殊な保護：EN ISO 374耐薬品性基準を満たしており、ほとんどの酸、アルコール、油、潤滑剤から着用者を保護します。
- ・確実な器用さ：中程度の厚さにより、このグローブの器用さが向上し、長期間にわたる使いやすさが向上します。
- ・汚染リスクの軽減：裏地のないデザインにより、化学吸収の可能性と関連する汚染リスクが軽減されます。
- ・耐久性の向上：このネオプレン手袋は、EN 388：2016+A1：2018レベル2の耐摩耗性も保証します。
- ・EN ISO 374準拠の耐薬品性：信頼できる手の保護
- ・中程度の厚さ：より器用に、より簡単に部品を取り扱うことができます。
- ・裏地なし：汚染リスクを最小限に抑え、掃除が簡単

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
55301090	L	1双	¥40,500	1双×10袋
55301100	XL	1双	¥40,500	1双×10袋

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	711	EN 455-2
カフの口径 (mm)	178	

掌部の厚さ (mm)	0.51	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.51	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 2
耐刃切れ性	Level 1
引裂き抵抗	Level 0
耐突き刺し性	Level 0



AlphaTec® 55-302


非清浄/未滅菌ネオプレン
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法

乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。

温度範囲

−30℃～50℃

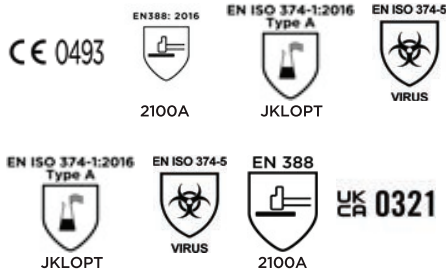

注意：クリーンルーム用ではありません。



ネオプレン RABS/アイソレーターグローブ、有害な化学薬品を使用する環境向けに設計

ポートサイズ：203mm

厚さ：0.51mm

- ・特殊な保護：これらの耐薬品性手袋はEN ISO 374規格を満たしており、ほとんどの酸、アルコール、油、潤滑剤から保護します。
- ・確かな操作性：中程度の厚さにより、より優れた操作性と優れた使いやすさを実現します。
- ・汚染リスクの低減：裏地がないため、化学吸収の可能性と関連する汚染リスクが低減されます。
- ・耐久性の向上：耐摩耗性の向上に関してEN ISO 388認定を受けています。
- ・丈夫な素材：耐薬品性の高いネオプレン手袋
- ・中程度の厚さ：器用性に優れ、部品の取り扱いが容易になります。
- ・裏地なし：汚染リスクが軽減され、より効果的な洗浄が可能

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
55302100	XL	1双	¥52,000	1双×10袋

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	813	EN 455-2
カフの口径 (mm)	203	

掌部の厚さ (mm)	0.51	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.51	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 2
耐刃切れ性	Level 1
引裂き抵抗	Level 0
耐突き刺し性	Level 0



AlphaTec® 55-303


非清浄/未滅菌ネオプレン
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法

乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。

温度範囲

−30℃～50℃

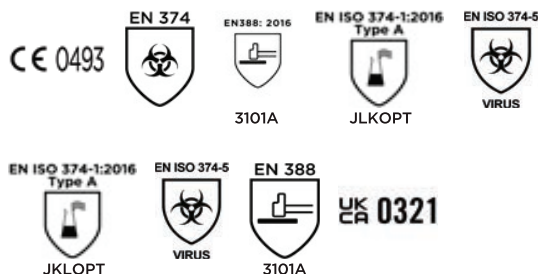

注意：クリーンルーム用ではありません。



ネオプレン RABS/アイソレーターグローブ、有害な化学薬品を使用する過酷な環境に最適

ポートサイズ：203mm

厚さ：0.76mm

- ・特殊な保護：EN ISO 374耐薬品性基準を満たし、幅広い酸、アルコール、油、潤滑剤から保護します。
- ・耐久性の向上：厚手のネオプレン手袋は非常に耐久性があり、頑丈です。
- ・確実な弾力性：耐摩耗性についてEN 388認定を受けています。
- ・汚染リスクの軽減：裏地がないため、化学物質の吸収や関連する汚染リスクの可能性が低くなります。
- ・EN ISO 374準拠の耐薬品性：高度な手の保護
- ・厚手の厚さ：優れた堅牢性、より耐久性のあるネオプレン手袋
- ・裏地なし：汚染のリスクが少なく、より効果的な洗浄が可能

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
55303100	XL	1双	¥60,500	1双×10袋

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	813	EN 455-2
カフの口径 (mm)	203	

掌部の厚さ (mm)	0.76	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.76	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 3
耐刃切れ性	Level 1
引裂き抵抗	Level 0
耐突き刺し性	Level 1



AlphaTec® 55-305


非清浄/未滅菌ネオプレン
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法

温度5℃～22℃の乾燥した暗所に保管してください。使用しないときは、元のパッケージに保管してください。

温度範囲

−30℃～50℃

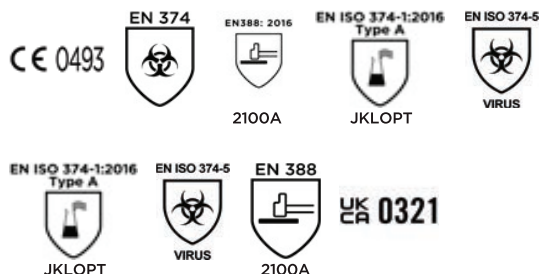

注意：クリーンルーム用ではありません。



ネオプレン RABS/アイソレーターグローブ、強力な化学物質から保護するように設計

ポートサイズ：254mm

厚さ：0.51mm

- ・特殊な保護：EN ISO 374耐薬品性基準を満たしており、ほとんどの酸、アルコール、油、潤滑剤から着用者を保護します。
- ・汚染リスクの軽減：裏地がないため、化学吸収の可能性と関連する汚染リスクが軽減されます。
- ・耐久性の向上：耐摩耗性に関するEN ISO 388規格も満たしており、耐久性が向上しています。
- ・EN ISO 374準拠の耐薬品性：信頼性の高い保護手袋用
- ・中厚さ：操作性が向上し、扱いやすくなります。
- ・裏地なし：汚染リスクが軽減され、洗浄がより効率的になります。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
55305100	XL	1双	¥53,000	1双×10袋

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	813	EN 455-2
カフの口径 (mm)	254	

掌部の厚さ (mm)	0.51	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.51	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 2
耐刃切れ性	Level 1
引裂き抵抗	Level 0
耐突き刺し性	Level 0



AlphaTec® 55-306


非清浄/未滅菌ネオプレン
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法

温度5℃～22℃の乾燥した暗所に保管してください。使用しないときは、元のパッケージに保管してください。

温度範囲

－30℃～50℃

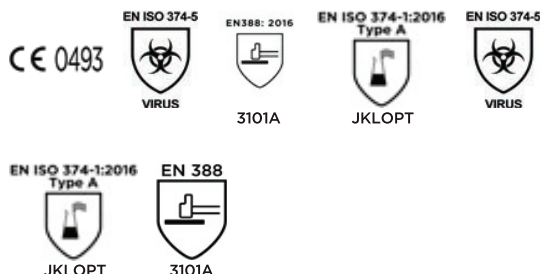

注意：クリーンルーム用ではありません。



ネオプレン RABS/アイソレーターグローブ、強力な化学物質に対抗するように設計

ポートサイズ：254mm

厚さ：0.76mm

- ・特殊な保護：EN ISO 374耐薬品性規格に対してテストされており、ほとんどの酸、アルコール、油、潤滑剤に対して強力な保護を提供します。
- ・耐久性の向上：厚手の厚さレベルにより、このネオプレン手袋は優れた耐久性を実現し、EN 388：2016+A1：2018レベル3の耐摩耗性基準を満たしています。
- ・汚染リスクの軽減：裏地のないデザインにより、化学物質の吸収と汚染のリスクが軽減されます。
- ・EN ISO 374準拠の耐薬品性：高度な化学保護
- ・厚手の厚さ：耐久性が向上し、手袋の寿命が長くなります。
- ・裏地なし：汚染リスクが少なく、簡単かつ効果的に洗浄できます。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
55306100	XL	1双	¥66,000	1双×10袋

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	813	EN 455-2
カフの口径 (mm)	254	

掌部の厚さ (mm)	0.76	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.76	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 3
耐刃切れ性	Level 1
引裂き抵抗	Level 0
耐突き刺し性	Level 1



AlphaTec® 55-307

非清浄/未滅菌ネオプレン
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法

乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。

温度範囲

−30℃～50℃

CE 0493



UK 0321



ネオプレン RABS/アイソレーターグローブ、環境や過酷な化学危険物向けに設計されています。

ポートサイズ: 305mm

厚さ: 0.51mm

- ・特殊な保護: EN ISO 374耐薬品性基準を満たしており、ほとんどの酸、アルコール、油、潤滑剤に対する保護を提供します。
- ・確かな器用さ: 中程度の厚さにより、このネオプレン手袋は優れたレベルの器用さを実現し、取り扱いが容易になります。
- ・汚染リスクの軽減: 裏地がないため、汚染リスクが軽減され、より安全で簡単な洗浄が容易になります。
- ・耐久性の向上: 耐摩耗性に関するEN ISO 388規格も満たしています。
- ・EN ISO 374準拠の耐薬品性: 優れた手の保護
- ・中程度の厚さ: 器用性に優れ、部品の取り扱いが容易になります。
- ・裏地なし: 汚染のリスクが少なく、清潔に保ちやすい

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
55307100	XL	1双	¥61,500	1双×10袋

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	813	EN 455-2
カフの口径 (mm)	305	

掌部の厚さ (mm)	0.51	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.51	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 2
ブレードの耐切創性	Level 1
耐引裂性	Level 0
耐パンク性	Level 0



AlphaTec® 85-300

非清浄/未滅菌CSM
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法	乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。
温度範囲	-20℃～120℃

CE 0493



注意：クリーンルーム用ではありません。



耐久性、耐薬品性に優れたCSMアイソレーター手袋

ポートサイズ：203mm

厚さ：0.4mm

- ・特殊な防御機能：優れた耐薬品性を備え、着用者を濃酸や濃塩基から保護します。
- ・快適性の向上：柔らかく柔軟な素材で作られており、毎日の快適さと使いやすさを実現します。
- ・グローブの寿命の延長：酸素、紫外線、オゾンへの長時間の暴露にも急速に劣化することなく耐えることができ、EN 388:2016+A1:2018レベル3の耐摩耗性を誇ります。
- ・汚染リスクの軽減：この手袋は白色なので、汚染の検出が容易です。
- ・堅牢なCSM組成：濃酸/濃塩基に対する耐性
- ・柔軟な素材：快適で使いやすい手袋
- ・耐久性のある設計：長時間の酸素、紫外線、オゾンへの曝露に耐えます。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
85300095	XL	1双×10袋	¥125,000	-
85300110	XXL	1双×10袋	¥125,000	-

※受注発注品となります。

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	800	EN ISO 21420
カフの口径 (mm)	203	

掌部の厚さ (mm)	0.4	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.4	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 3
ブレードの耐切創性	Level 1
耐引裂性	Level 0
耐パンク性	Level 1



AlphaTec® 85-302

非清浄/未滅菌CSM
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法

乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。

温度範囲

−20℃～120℃

CE 0493



注意：クリーンルーム用ではありません。



耐薬品性クリーンルーム用アイソレーター手袋

ポートサイズ：254mm

厚さ：0.4mm

- ・特殊な防御機能：濃酸や濃塩基に対する耐性が高く、着用者の安全を保ちます。
- ・快適性の向上：柔らかく柔軟な素材で作られており、快適性と使いやすさが向上しています。
- ・グローブの寿命の延長：酸素、紫外線、オゾンへの継続的な暴露に急激な摩耗を起こすことなく耐えることができ、EN 388:2016+A1:2018レベル3の耐摩耗性を備えています。
- ・汚染リスクの軽減：この手袋は白色であるため、潜在的な汚染の検出も容易になります。
- ・堅牢なCSM組成：濃酸および濃塩基からの保護
- ・柔軟性のある素材：使いやすさと快適さを提供する手袋
- ・耐久性のある設計：持続的な酸素、紫外線、オゾンへの曝露に耐えます。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
85302095	XL	1双×10袋	¥132,000	-
85302110	XXL	1双×10袋	¥132,000	-

※受注発注品となります。

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	800	EN ISO 21420
カフの口径 (mm)	254	

掌部の厚さ (mm)	0.4	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.4	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 3
ブレードの耐切創性	Level 1
耐引裂性	Level 0
耐パンク性	Level 1



AlphaTec® 85-502

非清浄/未滅菌EPDM
RABS/アイソレーターグローブ

保管方法	乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。
温度範囲	-20℃～120℃



注意：クリーンルーム用ではありません。



EPDM RABS/アイソレーターグローブは、FDA承認の高品質素材で作られており、グローブの交換が少なくなります

ポートサイズ：254mm

厚さ：0.4mm

- 最適化された耐久性：繰り返しオートクレーブ滅菌（最大50回）できるように設計されているため、交換の回数が少なくなります。
- 確実な保護：EN ISO 374に準拠しており、過酸化水素や一般的な消毒用化学物質に耐性があります。
- 環境への配慮の向上：ハロゲンフリーのため、焼却処分に適しています。
- 食品取り扱いコンプライアンス：間接食品添加物に関するFDA食品接触規制（FDA ポジティブリスト）21 CFR 177に準拠しています。
- EPDM材質：繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能
- 耐薬品性：過酸化水素/一般的な消毒用薬品
- FDA食品取り扱いコンプライアンス：食品を安全に取り扱います。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
85502095	XL	1双×10袋	¥217,000	-
85502110	XXL	1双×10袋	¥217,000	-

※受注発注品となります。

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	800	EN ISO 21420
カフの口径 (mm)	254	

掌部の厚さ (mm)	0.40	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.40	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	Level 2
ブレードの耐切創性	Level 1
耐引裂性	Level 1
耐パンク性	Level 1



AlphaTec® 85-600

非清浄/未滅菌EPDMプラス
RABS/アイソレーター手袋

保管方法

乾燥した暗い環境で5℃～22℃で保管すること。使用しない時は、元の包装で保管してください。

温度範囲

-20℃～130℃

CE 0493



3100a




amp



VIRUS



3100a

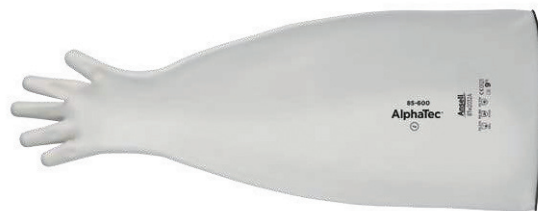

FDA承認ポリマーEPDM + RABSおよびアイソレーター手袋、デュアルカラーデザイン

ポートサイズ: 203mm

厚さ: 0.51mm

- 強化された機能: 黒い裏地に白い素材の二重層が特徴で、劣化した際に、黒い裏地が目立つため、目視によって劣化が確認できます。
- 最適化された耐久性: 繰り返しのオートクレーブ滅菌(最大50回)に耐えることができるため、交換回数が減少します。
- 確実な保護: EN ISO 374の耐薬品性規格に準拠し、過酸化水素や一般的な消毒用化学薬品に耐えます。
- 手袋の寿命の延長: RABS手袋は、持続的な酸素、紫外線、オゾン暴露にも耐えます。
- 食品取り扱いコンプライアンス: FDA食品接触規制21 CFR 177(間接食品添加物に関するFDAポジティブリスト)に準拠しています。
- 白と黒の二重構造: 劣化した際に、黒い裏地が目立つため、目視によって劣化が確認できます。
- EPDMプラス材質: 繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能
- 耐薬品性: 過酸化水素/一般的な消毒薬品。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
85-600-9.5	XL	1双×10袋	¥276,000	-
85-600-11	XXL	1双×10袋	¥276,000	-

※受注発注品となります。

物理的特性	代表値	試験方法
長さ (mm)	800	EN ISO 21420
カフの口径 (mm)	203	

掌部の厚さ (mm)	0.51	EN 455-2
カフの厚さ (mm)	0.51	EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク	パフォーマンス・レベル
耐摩耗性	レベル3
ブレードの耐切創性	レベル1
耐引裂性	レベル0
耐パンク性	レベル0
ISO 13997 耐切創性	レベルA



INDUSTRY

インダストリー（耐薬品用）

ケミカル
CHEMICAL AND LIQUID PROTECTION





AlphaTec® 58-008

化学物質から保護される部分の長さを拡大



化学物質から腕全部を保護するように拡大

- 優れた機械的保護機能と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマー
- 新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。
- 手のひらの部分がひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。
- 化学物質の浸透に関する詳細については、www.ansellguardianpartner.comをご覧ください。

業界

- 農業
- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- 化学薬品
- 食品加工
- ライフサイエンス
- 金属加工
- 石油・ガス
- リサイクルと廃棄物処理

用途

- 部品の組み立ておよび点検
- 石油、液体、フィルター交換
- 工具またはロボットの塗装または洗浄
- メッキ加工、コーティング、密閉、塗装
- 納入品の取り扱い
- 液体と固体の輸送
- ポンプのバルブとラインの開口および排水
- 加工機器の積み降ろし
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）

主な特徴

- 前腕を保護するデザイン
- 手が乾いた/ぬれた状態での把持力が優れているため、手の疲労を軽減させます。
- 腕回りが広いので、防護服の上に着用できます。
- 長さ：640mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
58-008-8	M	1双	¥6,200	1双×10袋
58-008-9	L	1双	¥6,200	1双×10袋
58-008-10	XL	1双	¥6,200	1双×10袋





AlphaTec® 58-128

抜群なフィット感を提供するニトリル製手袋



軽作業時の化学薬品からの保護性能とANSELL GRIP Technology™ を採用し細かな動きを強化

- ERGOFORM™ により反復作業中、筋骨格系の健康をサポートし、作業効率を向上
- アメリカの人間工学認証取得済み
- 独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物に対して優れた保護性能を発揮
- ANSELL GRIP™ テクノロジーにより、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に、感度の良い動作が可能なり、高いグリップ力や快適な装着感を提供

業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品

用途

- ボディ塗装（表面の点検を含む）
- シーラーの塗布、補修
- プレス射出成形
- 機器の修理およびメンテナンス
- 部品の組み立てと取り付け
- 工具またはロボットの塗装または洗浄
- 最終組立
- 金属加工、ガラス加工
- 部品の組み立ておよび点検
- 原料倉庫

主な特徴

- 人間工学に基づき認証を取得した初の耐化学薬品手袋
- 筋骨格系をサポートする高い性能を発揮
- 使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能
- 手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出す
- 長時間や繰り返しの手作業による人間工学に関わるけがのリスクを軽減
- 長さ：280mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
58-128-7	S	1双	¥1,400	1双×10袋
58-128-8	M	1双	¥1,400	1双×10袋
58-128-9	L	1双	¥1,400	1双×10袋
58-128-10	XL	1双	¥1,400	1双×10袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。





AlphaTec® 58-270

確実なグリップ性能と高い柔軟性を発揮する耐化学薬品手袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。

業界をリードするグリップ性能を提供し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋

- ・ 薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドブルーフ手袋です。
- ・ 強化された指先の動かしやすさと装着感に加え、業界をリードするグリップ性能のメリットを提供します。
- ・ 薄いニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが使用者に極めて繊細な指先の感覚と柔軟性を提供します。さらに、非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。

業界

- ・ 自動車
- ・ 自動車アフターマーケット
- ・ 機械および機器
- ・ 金属加工
- ・ 化学薬品
- ・ 農業

用途

- ・ ボディ塗装（表面の点検を含む）
- ・ シーラーの塗布、補修
- ・ プレス射出成形
- ・ 機器の修理およびメンテナンス
- ・ 部品の組み立てと取り付け
- ・ 工具またはロボットの塗装または洗浄
- ・ 最終組立
- ・ 金属加工、ガラス加工
- ・ 部品の組み立ておよび点検
- ・ 原料倉庫

主な特徴

- ・ アンセルのGRIP™ テクノロジーによる最高のグリップ性能を発揮します。また、着脱が簡単なこの手袋は、熱を最小限に保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、結果的に手の疲労も軽減します。
- ・ ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。
- ・ 安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じない形状が採用されています。ナイロンライナーが熱を最小限に保ち、汗を抑えます。
- ・ 長さ：300mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
58-270-6	XS	1双	¥1,500	1双×10袋
58-270-7	S	1双	¥1,500	1双×10袋
58-270-8	M	1双	¥1,500	1双×10袋
58-270-9	L	1双	¥1,500	1双×10袋
58-270-10	XL	1双	¥1,500	1双×10袋





AlphaTec® 58-330

新しい吸汗速乾管理技術、AQUADRI™ テクノロジー採用の耐化学薬品手袋



汗を抑え装着感と性能を向上

- ・かなり長時間にわたって手を乾いた状態に保つ独自の吸汗速乾管理テクノロジーが採用されています。
- ・高度な化学防護を提供するため上質なニトリルフィルムコーティングが採用されているだけでなく、特に手汗が問題となる用途において他の手袋とは異なる使用感を実現するため内側にやわらかい発泡コーティングが採用されており、この2層コーティング構造が装着感と性能の両方を改善します。
- ・特許取得済みのAQUADRIテクノロジーが、高温多湿環境下において手袋内の汗の蓄積を大幅に軽減する独自の吸汗速乾管理性能を発揮します。

業界

- ・自動車
- ・自動車アフターマーケット
- ・機械および機器
- ・金属加工
- ・化学薬品

用途

- ・部品の組み立ておよび点検
- ・石油、液体、フィルター交換
- ・工具またはロボットの塗装または洗浄
- ・メッキ加工、コーティング、密閉、塗装
- ・納入品の取り扱い
- ・液体と固体の輸送
- ・ポンプのバルブとラインの開口および排水
- ・加工機器の積み降ろし
- ・容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- ・炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）
- ・炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）

主な特徴

- ・ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、高性能ニトリル化合物製手袋は、驚くほど優れた耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性を実現します。
- ・ドライ/ウェット環境でのグリップ性能を強化するため逆ひし形に仕上げられた掌部
- ・前腕に液体が垂れることを防ぐ、折り返し可能なガーターカフ
- ・汗を軽減：汗を抑え装着感と性能を向上
- ・米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件を遵守
- ・長さ：320mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
58-330-7	S	1双	¥1,000	1双×10袋
58-330-8	M	1双	¥1,000	1双×10袋
58-330-9	L	1双	¥1,000	1双×10袋
58-330-10	XL	1双	¥1,000	1双×10袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。





AlphaTec® Solvex® 37-165

十分なグリップ性能、フィット感、快適な装着感で優れた化学防護を提供



幅広い用途で性能を発揮する汎用性の高い化学防護

- 高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。
- この手袋は、ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性を実現します。
- 膨張、性能低下、劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
- 高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。
- 重作業の清掃用途に適しています。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 化学薬品
- 食品加工

用途

- 機械加工済みの未完成金属部品の取り扱い
- 機器の修理およびメンテナンス
- 工具またはロボットの塗装または洗浄
- 工具と金型の変更
- 納入品の取り扱い
- 原料の充填、混合、充電
- ポンプのバルブとラインの開口および排水
- 加工機器の積み降ろし
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- 実行中の業務の監督
- 出荷品の取り扱い（缶、容器、バルク包装品、段ボール箱）
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）

主な特徴

- 内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。
- 手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
- 類を見ない耐摩耗性で再利用可能
- 極上の装着感を提供
- 米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件（21 CFR 177.2600）を遵守
- 最高の価値と品質両方を提供します。
- 長さ：380mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
37-165-7	S	1双	¥1,000	1双×10袋
37-165-8	M	1双	¥1,000	1双×10袋
37-165-9	L	1双	¥1,000	1双×10袋
37-165-10	XL	1双	¥1,000	1双×10袋





AlphaTec® Solvex® 37-176

耐化学薬品保護手袋



幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い0.38mmの耐化学薬品保護手袋

- 高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。
- この手袋は、ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性を実現します。
- 高水準の柔軟性、装着感、指先の感覚が実現されるため、膨張、性能低下、劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。

主な特徴

- 汗を抑える吹付け加工が施されたコットン
- 類を見ない耐摩耗性で再利用可能
- 極上の装着感を提供
- グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用
- 食品取り扱い作業での使用が許可されています。
- 長さ：330mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
37-176-7	S	1双	¥400	1双×10袋
37-176-8	M	1双	¥400	1双×10袋
37-176-9	L	1双	¥400	1双×10袋
37-176-10	XL	1双	¥400	1双×10袋
37-176-11	XXL	1双	¥400	1双×10袋





AlphaTec® Solvex® 37-185

優れたグリップ性能、フィット感、快適な装着感で極めて良い化学防護を提供



幅広い用途でお使いいただける肘までを保護する抜群の装着感と耐薬品性を誇る手袋


- 耐薬品性と強度の絶妙なバランスを実現し、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化を可能にする高性能ニトリル化合物
- この手袋は、ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性を実現します。
- 高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。
- 膨張、性能低下、劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こしません。
- 重作業の清掃用途に適しています。

業界

- 食品加工
- 金属加工
- 石油・ガス
- 化学薬品
- 農業
- 自動車アフターマーケット

用途

- 食品に触れるすべての食品加工用途
- 鍛造作業
- 一般的な配管作業
- 納入品の取り扱い
- 原料の充填、混合、充電
- ポンプのバルブとラインの開口および排水
- 加工機器の積み降ろし
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- 実行中の業務の監督
- 出荷品の取り扱い（缶、容器、バルク包装品、段ボール箱）
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）
- 工具またはロボットの塗装または洗浄

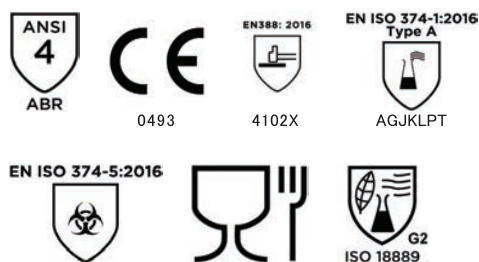

主な特徴

- 内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的
- 手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
- 類を見ない耐摩耗性で再利用可能
- 極上の装着感を提供
- 米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件（21 CFR 177.2600）遵守
- 長さ：457mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
37-185-7	S	1双	¥1,200	1双×10袋
37-185-8	M	1双	¥1,200	1双×10袋
37-185-9	L	1双	¥1,200	1双×10袋
37-185-10	XL	1双	¥1,200	1双×10袋



AlphaTec® 58-435

強化された柔軟性と確かなグリップ性能を提供



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。

裏地無しの重作業用手袋の指先の繊細な感覚と、アンセルのGRIP™ テクノロジーのウェット環境/オイル付着環境でのグリップ性能の両方を提供

- アンセルのGRIP™ テクノロジーの市場をリードする性能と裏地無しのニトリル手袋の柔軟性と指先の繊細な感覚を併せ持つ手袋です。この独自の特許取得済み設計には、高性能ニトリル化合物コーティング（汎用性の高い化学防護と長続きする耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性を提供するコーティング）と快適な装着感を提供する吹付け加工が施されたコットンライナーが採用されています。
- この手袋は、工業環境において潤滑油や洗浄剤と断続的に接触する作業に理想的です。

業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品

用途

- 金属加工および組み立て作業
- ボディ塗装（表面の点検を含む）
- シーラーの塗布、補修
- 工具またはロボットの塗装または洗浄
- 原料倉庫
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）

主な特徴

- アンセルのGRIP™ テクノロジーは、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にします。また、少ない力で滑りやすい物を取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。
- 手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。
- 重作業用のAlphaTec® 58-435手袋には、炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な0.40mmの厚さが採用されています。
- ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに、優れた耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは、前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは、前腕の上半分もしっかり保護します。
- 米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件を遵守
- 長さ：380mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
58-435-7	S	1双	¥1,400	1双×10袋
58-435-8	M	1双	¥1,400	1双×10袋
58-435-9	L	1双	¥1,400	1双×10袋
58-435-10	XL	1双	¥1,400	1双×10袋





AlphaTec® 58-530B

グリップ性能と耐薬品性の独自の組み合わせ



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。

グリップ性能と耐薬品性の独自の組み合わせ

- 少ないグリップ力でより正確に濡れたアイテムや油が付着したアイテムを取り扱えるようにAlphaTec® 手袋には、革新的なANSELL GRIP™ テクノロジーが採用されています。防液の耐薬品性とグリップ性能の独自の組み合わせに加え、柔軟性も発揮し、繊細な指先の動きが可能で、化学薬品を扱う作業にふさわしい選択肢です。
- 安全を強化するため信頼できる耐薬品性を提供します。特許取得済みの ANSELL GRIP™ テクノロジーにより、製造中にコーティングのポリマーがライナーに浸透しないことが保証されます。このため一貫性のある徹底したコーティングが実現され、化学薬品が漏出し皮膚に接触する可能性が大幅に軽減されます。
- ブラックのアクリル製ライナーが採用されたAlphaTec® モデルは屋外の用途に推奨されています。

業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品
- 食品加工

用途

- 金属加工および組み立て作業
- ボディ塗装（表面の点検を含む）
- シーラーの塗布、補修
- 工具と金型の変更
- 塗布および掃除用具の取り扱い
- 原料倉庫
- トラックと車両の積み降ろし
- 原料の充填、混合、充電
- 液体と固体の輸送
- 加工機器の積み降ろし
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- 実行中の業務の監督
- 出荷品の取り扱い（缶、容器、バルク包装品、段ボール箱）
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）
- 食品加工

主な特徴

- 防液の耐薬品性とグリップ性能の独自の組み合わせに加え、柔軟性も発揮し、繊細な指先の動きが可能で、化学薬品を扱う作業にふさわしい選択肢です。
- 長さ：290mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
58-530B-7	S	1双	¥2,400	1双×10袋
58-530B-8	M	1双	¥2,400	1双×10袋
58-530B-9	L	1双	¥2,400	1双×10袋
58-530B-10	XL	1双	¥2,400	1双×10袋





AlphaTec® 04-005

厚手のPVCが手袋の快適性を向上させました



PVCによるレベルアップ

- ・ニトリルとPVCを混合した特殊な素材で作られているため、より優れた耐久性、保護性能、柔軟性を提供します。
- ・EN ISO 374:2016タイプA認定のPVC化学防護手袋
- ・低温でも高い耐久性と柔軟性を提供

業界

- ・食品加工
- ・インフラ整備
- ・メンテナンス
- ・化学薬品


用途

- ・食品に触れるすべての食品加工用途
- ・化学薬品の取り扱い
- ・メンテナンス
- ・お手入れ

主な特徴

- ・ニトリルとPVCを混合した特殊な化合物で作られているため、幅広い化学物質に対する保護機能を提供します。
- ・FDAおよびEUの食品取り扱い要件に準拠
- ・18種類の化学物質のうちの6種類の化学物質に対するEN ISO 374:2016認証を取得（JKLMPT）
- ・他の5種類の化学物質（AFNOS）に対して、認定実験室で浸透レベル2以上を達成
- ・快適性と保護性能を向上させる13ゲージの縫い目のないコットンデザイン
- ・湿気の多い環境や油っぽい環境で優れた耐油性とグリップ性能を提供する特殊な発泡体によって把持力が向上するデザイン
- ・人間工学に基づいた手の形のデザイン
- ・長さ：380mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
04-005-8	M	1双	¥1,600	1双×10袋
04-005-9	L	1双	¥1,600	1双×10袋
04-005-10	XL	1双	¥1,600	1双×10袋

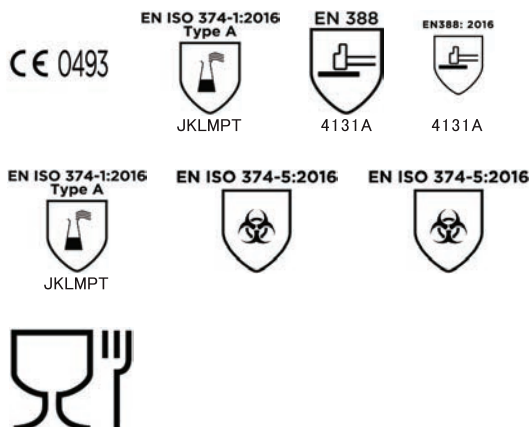



AlphaTec® 87-950

吹付け加工ライナー付きの重作業用天然ゴム手袋



重作業の用途で追加の保護が必要な作業向けの厚手のラテックス手袋

- 吹付け加工ライナーの標準的な手袋より50%厚い手袋
- 様々なケトン、塩、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪に対し極めて高い耐性を発揮
- 機械的リスクに対し優れた耐性を発揮し化学的防護を強化
- 塩素化処理済み
- 汗の吸収をサポートする吹付け加工の100%コットンライナー
- 合格品質基準 (AQL) 0.65

業界

- 建設
- 機械および機器
- インフラ整備
- 化学薬品

用途

- 工場と重機のメンテナンス
- 化学処理および調製
- 清掃用途

主な特徴

- 重作業用手袋
- 吹付け加工が施された100%コットンライナー
- 長さ：325mm

CE 0493

EN388: 2016



X121X

EN ISO 374-1:2016
Type A

AKLOPS

EN ISO 374-5



VIRUS

注意：この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
87-950-7.5	S	1双	¥400	1双×10袋
87-950-8	M	1双	¥400	1双×10袋
87-950-9	L	1双	¥400	1双×10袋
87-950-10	XL	1双	¥400	1双×10袋
87-950-11	XXL	1双	¥400	1双×10袋





AlphaTec® 29-500

極めて優れた柔軟性を発揮し、取り扱い作業を容易にする中作業用の耐化学薬品手袋



取り扱い作業を楽にする、優れた柔軟性を発揮する中作業用の裏地無しのネオプレン製手袋

- 幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供

業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- 化学薬品

用途

- 化学薬品の取り扱い
- メンテナンス
- 一般的な目的での自動車のアフターサービス

主な特徴

- 低温環境での使用に最適：ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。
- 装着感を向上し、汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナー
- 極めて優れた柔軟性。天然ゴム使用。他の重作業用の手袋よりも大幅に手が疲れない手袋
- 長さ：300mm

EN388: 2016



X121A

EN ISO 374-1:2016
Type A

AKLNPT

EN ISO 374-5



VIRUS

UK
CA 0321

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
29-500-7	S	1双	¥700	1双×10袋
29-500-8	M	1双	¥700	1双×10袋
29-500-9	L	1双	¥700	1双×10袋
29-500-10	XL	1双	¥700	1双×10袋
29-500-11	XXL	1双	¥700	1双×10袋





AlphaTec® 29-865

幅広い用途向けに広範にわたる保護を提供



取り扱い作業を楽にする、優れた柔軟性を発揮する中作業用の裏地無しのネオプレン製手袋

- オイル、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などの化学薬品に対して優れた耐性を発揮します。
- 一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。

業界


- 自動車アフターマーケット
- 化学薬品
- 清掃/衛生

用途

- 化学薬品の取り扱い
- メンテナンス
- 一般的な目的での自動車のアフターサービス

主な特徴

- 耐化学薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。
- 装着感を向上するため吹付け加工を施したコットンライナーを採用
- 細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚
- 米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件（21 CFR 177.2600）を遵守
- 手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
- 長さ：330mm

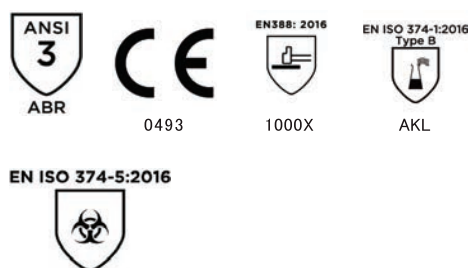

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
29-865-7	S	1双	¥1,800	1双×10袋
29-865-8	M	1双	¥1,800	1双×10袋
29-865-9	L	1双	¥1,800	1双×10袋
29-865-10	XL	1双	¥1,800	1双×10袋





AlphaTec® 19-024

ネオプレンコーティングと保温性の高いライナーが採用された耐化学薬品性耐熱手袋



二重の断熱加工のライナーにネオプレン浸漬コーティングが採用されているため、高温環境での耐性が強化されます。

- この手袋は、ネオプレンの柔軟性と耐化学薬品性、やわらかく保温性の高いライナーの快適な装着感と耐熱性を持ち合せています。
- 熱と化学薬品によるリスクが存在する用途において使用者を保護することを目的とした手袋です。

業界

- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品
- 自動車アフターマーケット

用途

- プレス作業
- 縁が鋭利または粗削りの材料の取り扱い
- 生産ラインのサポートおよびメンテナンス
- 原料の充電および混合
- 予期せぬ漏出、流出、またはその他の放出

主な特徴

- 高温および低温環境に耐える性能を強化するため、二重の断熱加工のライナーが採用されたネオプレン製手袋
- 熱と化学薬品によるリスクが存在する用途において使用者を保護することを目的としています。
- 優れた機械的特性と化学特性を発揮します。洗剤や洗浄液の影響を受けません。グリースやオイルに対して優れた保護を発揮します。優れた柔軟性とグリップ性能
- 快適な装着感を提供する二重保温加工のライナー。最高180℃の高温面との断続的な接触からの保護を提供します。
- 長さ：450mm
- 素材耐熱性250℃

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
19-024-8	M	1双	¥12,700	1双×10袋
19-024-10	XL	1双	¥12,700	1双×10袋

UK 0321





AlphaTec® 19-026

ネオプレンコーティングと保温性の高いライナーが採用された耐化学薬品性耐熱手袋



二重の断熱加工のライナーにネオプレン浸漬コーティングが採用されているため、高温環境での耐性が強化されます。

- この手袋は、ネオプレンの柔軟性と耐化学薬品性、やわらかく保温性の高いライナーの快適な装着感と耐熱性を持ち合せています。
- 熱と化学薬品によるリスクが存在する用途において使用者を保護することを目的とした手袋です。

業界

- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品
- 自動車アフターマーケット

用途

- プレス作業
- 縁が鋭利または粗削りの材料の取り扱い
- 生産ラインのサポートおよびメンテナンス
- 予期せぬ漏出、流出、またはその他の放出

主な特徴

- 高温および低温環境に耐える性能を強化するため、二重の断熱加工のライナーが採用されたネオプレン製手袋
- 熱と化学薬品によるリスクが存在する用途において使用者を保護することを目的としています。
- 優れた機械的特性と化学特性を発揮します。洗剤や洗浄液の影響を受けません。グリースやオイルに対して優れた保護を発揮します。優れた柔軟性とグリップ性能
- 快適な装着感を提供する二重保温加工のライナー。最高180℃の高温面との断続的な接触からの保護を提供します。
- 米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件（21 CFR 177.2600）を遵守
- さらに保護を強化するAlphaTec® 19-024のロングバージョン
- 長さ：660mm
- 素材耐熱性250℃



カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
19-026-8	M	1双	¥14,300	1双×10袋
19-026-10	XL	1双	¥14,300	1双×10袋





AlphaTec® 38-001

優れた化学薬品に対する防護と耐劣化性



高レベルの快適性と化学薬品に対する防護

- より進化した保護性能：AlphaTec® 38-001の新しい水性ブチル製手袋は、アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、濃硫酸など、非常に攻撃性の高い化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。
- 改善された人間工学デザイン：快適性を追求したAlphaTec® 38-001工業用安全手袋は、着脱を容易にしながら手を保護し、ソフトな感触を促進する独自のブチル配合を特徴としています。
- 強化された柔軟性：超軟水ベースのブチル配合により、柔軟性と手指の動かしやすさを最大化
- 強化されたグリップ力：隆起したダイヤモンドパターンがグリップ力を高め、より安全な取り扱いを実現

業界

- 自動車
- ライフサイエンス
- 化学薬品

用途

- 機器の修理およびメンテナンス
- 加工機器の積み降ろし
- 納入品の取り扱い
- 原料の充填、混合、充電
- 液体と固体の輸送
- ポンプのバルブとラインの開口および排水
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- 実行中の業務の監督
- 原料の充電および混合
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）
- 予期せぬ漏出、流出、またはその他の放出

主な特徴

快適性と柔軟性を備えた、ケトン類と溶剤に対する高レベルの保護を提供

- 水性ブチルの改良により、高レベルの化学的防護を実現
- ウェットでもドライでもグリップ力を発揮するダイヤモンドグリップパターン
- ブチル手袋では前例のないレベルの手指の動かしやすさと素手のような感覚
- 前腕を保護するロングカフ



カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
38-001-7	S	1双	¥10,700	1双×10袋
38-001-8	M	1双	¥10,700	1双×10袋
38-001-9	L	1双	¥10,700	1双×10袋
38-001-10	XL	1双	¥10,700	1双×10袋
38-001-11	XXL	1双	¥10,700	1双×10袋



AlphaTec® 38-514

溶剤および強酸を含む化学薬品に対して優れた耐性を発揮します



指先の細かな動きを可能にし快適な装着感を提供しつつ、最も強力な化学薬品に対し優れた耐性を発揮する最薄手のブチル手袋

- この手袋は、指先の細かな動きと快適な装着感を損なうことなく、ほぼすべての強力な化学薬品に対して最高の耐性を提供します。
- 柔軟で指先の極めて細かな動きを可能にします。手の自然な曲線に沿った人間工学に基づく形状によりやわらかな質感を実感できます。

業界

- 自動車
- ライフサイエンス
- 化学薬品

用途

- 機器の修理およびメンテナンス
- 加工機器の積み降ろし
- 納入品の取り扱い
- 液体と固体の輸送作業
- ポンプのバルブとラインの開口および排水
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- 原料の充填および混合
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）
- 炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）
- 予期せぬ漏出、流出、またはその他の放出

主な特徴

- アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。
- この手袋は非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
- 快適な装着感を目指し、手の自然な曲線に沿った人間工学に基づく形状とやわらかな質感のため、着脱が簡単でグリップ性能にも優れています。
- ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。
- 安全な取り扱い作業を可能にするため、手袋の手の部分は粗仕上げとなっています。
- 長さ：350mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
38-514-7	S	1双	¥9,200	1双×10袋
38-514-8	M	1双	¥9,200	1双×10袋
38-514-9	L	1双	¥9,200	1双×10袋
38-514-10	XL	1双	¥9,200	1双×10袋





AlphaTec® 02-100

生物学的危険物を含む、幅広い種類の化学薬品に対して優れた耐性を発揮します



各種飛沫と応急キットとしてお使いいただける汎用性の高い手袋で、自信を持って作業していただけます。

- ・耐化学薬品性、5層ラミネート構造の手袋
- ・手専用の人間工学に基づく設計
- ・幅広い耐性を発揮
- ・100%検査済み。手袋はすべて個別に空気圧試験が実施されています。

業界

- ・ライフサイエンス
- ・金属加工
- ・化学薬品

推奨用途

- ・梱包およびラベル貼付
- ・塗布および掃除用具の取り扱い
- ・原料の充填、混合、充電
- ・ポンプのバルブとラインの開口および排水
- ・加工機器の積み降ろし
- ・容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- ・原料の充電および混合
- ・予期せぬ漏出、流出、またはその他の放出

主な特徴

- ・合格品質基準（AQL）：0.065
- ・個別に空気圧試験を実施、100%検査済み
- ・シリコン不使用

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
02-100-6	XS	1双	¥2,500	1双×10袋
02-100-7	S	1双	¥2,500	1双×10袋
02-100-8	M	1双	¥2,500	1双×10袋
02-100-9	L	1双	¥2,500	1双×10袋
02-100-10	XL	1双	¥2,500	1双×10袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。





AlphaTec® 15-554

強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつ



他のほぼすべての種類の耐化学薬品手袋を上回る性能を発揮するポリビニルアルコールコーティングが施された手袋

- 強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつ

業界


- ライフサイエンス
- 化学薬品

用途

- ラボの設備と機器の管理
- 加工機器の積み降ろし
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動
- 炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）
- 予期せぬ漏出、流出、またはその他の放出

主な特徴

- 芳香族溶剤および塩素系溶剤に対して実質的に不活性
- 事前にカーブ加工された4本の指と翼型の親指が採用された骨格の形状に沿った快適な装着感の手袋です。指を簡単に動かすことができ、疲れにくい手袋
- 2ピースのやわらかいニットライナーが採用されています。手にクッションを提供し、汗を吸収します。
- 事前にカーブ加工された4本の指と翼型の親指の構造
- インターロックのコットンライナー採用の手袋

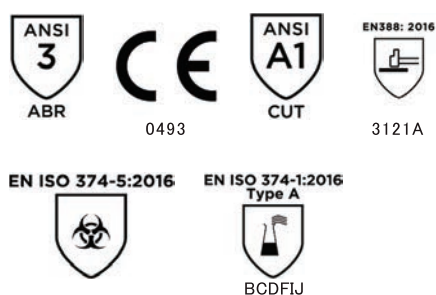

注意：耐水性に劣るので、水・アルコールには使用しないでください。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
15-554-9	L	1双	¥3,000	1双×10袋
15-554-10	XL	1双	¥3,000	1双×10袋





INDUSTRY

インダストリー（耐切創用）

メカニカル
MECHANICAL PROTECTION





HyFlex® 11-501

アンセル独自のデュボンケブラーストレッチアーマー採用の
INTERCEPT™ テクノロジー

生産性を最適化しつつ、作業者に高い水準の保護を提供する必要があり、さらに極めて優れた耐切創と手の細かな動きが求められる場合は、HyFlex® 11-501をお選びください。

- アンセルの HyFlex® 11-501手袋は、耐切創手袋の保護と繊細な感覚の水準を大幅に引き上げることを目的としています。これはアンセルのINTERCEPT™ テクノロジーにより実現された新たな水準を設定する手袋です。
- 耐熱性にも優れているため、様々な用途にお使いいただけます。
- 生産性を最適化しつつ、高い水準の保護を提供します。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品

用途

- プレス射出成形
- シャーシの組み立て、ボディトリミング
- 構造部品の取り出しおよび仕上げ
- システムとねじ留めの調整
- 材料、製品の仕上げ加工
- トラックと車両の積み降ろし
- 納入品の取り扱い
- 出荷品の取り扱い（缶、容器、バルク包装品、段ボール箱）
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）

主な特徴

- アンセル独自のデュボン®TMケブラー®ストレッチアーマー採用のINTERCEPT™ テクノロジー
- ANSI レベル5、ISO レベルDを実現する製品
- 素手で触れたような感覚を提供し、手の疲労を軽減する人間工学に基づく設計
- オイルが付着する軽作業でのグリップ性能、硬くドライな対象物に対してのグリップ性能、指先の繊細な感覚を強化する発泡ニトリルコーティング
- 幅広いサイズをご用意
- 長さ：206～260mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-501-7	S	1双	¥3,200	1双×10袋
11-501-8	M	1双	¥3,200	1双×10袋
11-501-9	L	1双	¥3,200	1双×10袋
11-501-10	XL	1双	¥3,200	1双×10袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。



HyFlex® 11-801

汚れを目立たせない色を採用し、
快適な装着感を強化した改良された設計



通気性を最大30%向上するよう改良、
1日中快適にお使いいただけます。

- ・アンセラー番人気の元祖発泡ニトリル手袋 HyFlex® 11-801がかつてないほど高性能に改良されています。
- ・快適な装着感、細かな手の動き、保護、すべてを兼ね備えた非常に汎用性の高い手袋で、正確さが求められる組み立て作業や一般的な取り扱い作業に適しています。
- ・高度のニット・テクノロジーにより、特に圧迫される部分の伸縮性と柔軟性が向上しているので、手をより自由に動かすことができます。また、快適な装着感だけでなく、手の疲労も軽減されます。

業界

- ・自動車
- ・機械および機器
- ・金属加工
- ・化学薬品

用途

- ・部品のピックアップ、固定
- ・システムとねじ留めの調整
- ・トラックと車両の積み降ろし
- ・納入品の取り扱い
- ・製品の配送、輸送、納入
- ・鍵屋

主な特徴

- ・濃い色のライナーは、軽度のオイル付着環境や汚れがひどい環境に適しています。
- ・快適な装着感をさらに向上する通気性を提供するアンセラーが初めて市場で販売を開始した発泡コーティング手袋
- ・効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感が得られます。独立検査・認証システム Oeko-Tex® により、皮膚に優しい製品であることが証明されています。
- ・塗装前の金属部品にシリコン汚染が発生することはありません。
- ・長さ：192～267mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-801-7	S	1双	¥600	1双×10袋
11-801-8	M	1双	¥600	1双×10袋
11-801-9	L	1双	¥600	1双×10袋
11-801-10	XL	1双	¥600	1双×10袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。



EDGE® 48-929

中作業向けの耐切創手袋



耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用効率の良い手袋

- ・裏地には縫い目がなく、ニトリルで手の全体がフルコーティングされています。
- ・ニトリルでフルコーティングされているため、油による汚染から皮膚を保護します。
- ・手のひらの部分がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた環境でも物をつかむことができます。
- ・油または潤滑剤を塗った小型および中型の鋭い部品を扱う作業者向けの手袋です。

業界

- ・ 航空宇宙
- ・ 自動車
- ・ ガラス製造
- ・ 機械および機器
- ・ 金属加工
- ・ 交通手段
- ・ 化学薬品
- ・ 石油・ガス

用途

- ・ 機械加工/打抜き/切削
- ・ 研削
- ・ 部品の組み立て
- ・ メンテナンス
- ・ ガラス板、縁が鋭利な物の取り扱い
- ・ 縁が鋭利または粗削りの材料の取り扱い
- ・ 鋭利な金属または物の取り扱い

主な特徴

- ・ 耐切創性、グリップ力、撥油性の良い組み合わせ
- ・ 優れた耐摩耗性
- ・ 二重層のニトリルコーティングにより、油が付いた部品や工具を扱う際に手を乾燥した快適な状態に保つことができます。
- ・ EN420規格（一般要件）とEN388規格（機械的危険）に準拠
- ・ 手首の部分が伸縮性のあるニットで作られているため、ぴったりフィットします。
- ・ 油が付いた環境で利用できます。
- ・ 長さ：225～285mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
48-929-7	S	1双	¥1,500	1双×10袋
48-929-8	M	1双	¥1,500	1双×10袋
48-929-9	L	1双	¥1,500	1双×10袋
48-929-10	XL	1双	¥1,500	1双×10袋



EN388: 2016



4X43C



ABR



CUT

ActivArm[®] 80-600デュポン[™] ケブラー[®] 製の重作業用耐切創手袋

快適な装着感と高いグリップ性能に加え優れた耐切創性を発揮

- ガラス、金属、プラスチックを安全に取り扱うための手袋です。優れた耐切創性と一般的に信頼性の高い機械的特性に加え、抜群の装着感を提供します。
- 極めて高い耐切創性レベルであるEN規格レベル4の条件を満たしています。この高い水準の保護は、Kevlar[®] のニットライナーと天然ゴムコーティングによって実現されています。このコーティングは、摩耗、引き裂き、突刺に対する強力な保護を提供します。
- ラテックスコーティングの起毛クリンクル加工仕上げにより、ドライ環境とウェット環境の両方で優れたグリップ性能を発揮する手袋に仕上がっています。
- シリコンフリーの手袋は、金属化された断熱ガラスの表面に指紋が付着することを防ぎ、表面を清潔な状態に保ち、余分な洗浄の必要性を排除します。

業界

- 金属加工

用途

- 鍛造作業
- 形状の押出加工、曲げ加工、打ち抜き加工

主な特徴

- ラテックスコーティングの起毛クリンクル加工仕上げにより、ドライ環境とウェット環境の両方で優れたグリップ性能を発揮する手袋に仕上がっています。
- シリコンフリーの手袋は、金属化された断熱ガラスの表面に指紋が付着することを防ぎ、表面を清潔な状態に保ち、余分な洗浄の必要性を排除します。
- より多くの作業者の手を保護するため幅広いサイズをご用意
- 長さ：250～280mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
80-600-7	S	1双	¥2,800	1双×10袋
80-600-8	M	1双	¥2,800	1双×10袋
80-600-9	L	1双	¥2,800	1双×10袋
80-600-10	XL	1双	¥2,800	1双×10袋



EN388: 2016



X444C

EN 407



X2XXXX



0493



技術

Kevlar[®]



HyFlex® 11-518

超軽量、耐切創性、驚くほどの操作性、抜群の装着感を兼ね備えた手袋



耐切創性を提供するDyneema® ダイヤモンドテクノロジーによる素手のような繊細な感覚

- HyFlex® の性能を軽作業用手袋で実現。さらに素手のような繊細な感覚を提供し、細かな動きを可能にするHyFlex® スタイルの次世代ラインの製品です。
- 18ゲージの快適な装着感とEN ISOの耐切創性レベルB（ANSI耐切創性レベル2）の性能を組み合わせたこの手袋は、人工素材を組み合わせることによって実現された手袋です。
- やわらかく丈夫なライナーには、Dyneema® ダイヤモンドテクノロジー繊維が使用されています。薄手で通気性に優れており、一日中、手の甲の部分を通気しムレを防ぎます。
- 弾性を発揮するポリウレタン（PU）コーティングとDyneema® ダイヤモンドテクノロジー繊維を組み合わせることで、耐切創性試験で高い数値が得られました。またEN 規格レベル3（ANSIレベル3）の耐摩耗性により製品寿命を延長し、長くお使いいただけます。
- 正確さが求められる鋭利な部品、乾燥した部品、非常に小さな部品の取り扱いや組み立てにおいて、前例のない抜群の装着感、操作性、そして保護を提供します。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品
- 倉庫

用途

- 部品の組み立ておよび点検
- プレス射出成形
- 部品のピッキング、固定
- 最終組立
- 生産ラインへの部品の納入
- 材料、製品の仕上げ加工
- 納入品の取り扱い

主な特徴

- 超薄手の縫い目のないライナー
強化された柔軟性（可動域）と指先の繊細な感触
- Dyneema® ダイヤモンドテクノロジー繊維
EN耐切創性レベル3の非常に高い耐切創性（ANSI耐切創性レベル2）と細かな手の動きのバランスで、安全性と快適な装着感を実現します。
- 薄いポリウレタンコーティング
手の細かな動きを可能にし、高い耐摩耗性を発揮します（EN規格レベル3、ANSIレベル3）。
- 小指用D3ニット
手の自然な形状により近づけるため、小指の付け根にフィット感を向上する生地が採用されています。
- 長さ：210～265mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-518-7	S	1双	¥2,300	1双×10袋
11-518-8	M	1双	¥2,300	1双×10袋
11-518-9	L	1双	¥2,300	1双×10袋
11-518-10	XL	1双	¥2,300	1双×10袋



技術





HyFlex® 11-644

Ansell切創保護技術と人間工学に基づいたデザイン



安全性、耐久性、快適性を兼ね備えています。

- 性能、耐久性、快適性を兼ね備えています。
- ANSIレベル2の切創保護性能を備えており、軽量であり、手にフィットするように人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度のバランスを実現します。
- Ansell切創保護技術を導入したHyFlex® 11-644手袋を着用すると、生産性や品質を低下させることなく、傷の治療にかかる費用を効果的に減らすことができます。
- 優れた切創保護機能、耐摩耗性、摩擦性、触覚感度を提供し、着用しやすい手袋です。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工
- 倉庫

用途

- プレス工場の業務
- 金属板と金属パネルの取り扱い
- 鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い
- 構造部品およびボディ部品の取り出し
- 検査（ピッキング、点検、マーキング）
- プレス機への供給およびスペア部品の除去
- ガラス、シート、パネルの切断

主な特徴

- 切創保護機能、摩耗寿命、快適さの改善、優れた器用さ
- 手のひらの部分が軽く、耐摩耗性に優れているため、器用に作業でき、長持ちします。
- 手にフィットする幅広いサイズが用意されています。
- 長さ：207～277mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-644-7	S	1双	¥1,400	1双×10袋
11-644-8	M	1双	¥1,400	1双×10袋
11-644-9	L	1双	¥1,400	1双×10袋
11-644-10	XL	1双	¥1,400	1双×10袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。



HyFlex® 11-724

優れた耐切創性を実現するINTERCEPT™ テクノロジーが採用され、掌部に浸漬コーティングが施された13Gの中作業用手袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。

最適な耐切創性に加え、極めて優れた柔軟性とフィット感を提供

- EN規格の耐切創性レベル3（ANSIレベル2）の性能を実現するINTERCEPT™ テクノロジーの糸が使用された13Gの薄手のライナーが採用されています。
- このライナーには、やわらかくひんやりとした触り心地で1日中快適な装着感を提供する最適化されたLycra® も採用されています。
- 掌部に施されたポリウレタン（PU）浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてグリップ性能が強化され、安全な取り扱い作業が可能です。また、EN規格レベル4（ANSIレベル6）の耐摩耗性が提供されるため、手袋の寿命が延び、長くお使いいただけます。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品

用途

- 部品の組み立ておよび点検
- 機器の組み立ておよび分解
- 取り付けおよび解体
- 材料、製品の仕上げ加工
- トラックと車両の積み降ろし
- 納入品の取り扱い
- メンテナンス
- 炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口（BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）の製造工程）
- 鍵屋

主な特徴

- ポリウレタン配合の設計により、柔軟性とフィット感に加え、乾燥した対象物やわずかにオイルが付着した対象物をつかむ際に確実なグリップ性能を発揮するため、幅広い環境での取り扱い作業に安心してお使いいただけます。
- 汚れが付着する環境で汚れを目立たせないコーティング
- 弾性を発揮するコーティングは、耐摩耗性を提供し、手袋の寿命を延ばします。
- 長さ：215～264mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-724-7	S	1双	¥1,100	1双×10袋
11-724-8	M	1双	¥1,100	1双×10袋
11-724-9	L	1双	¥1,100	1双×10袋
11-724-10	XL	1双	¥1,100	1双×10袋



HyFlex® 11-729

優れた耐切創性により、優れた快適性とフィット感を実現



高い快適性と指先感覚性を提供する、タッチスクリーンの使用に適合したポリウレタン手袋

- ・ 触覚感度の向上：HyFlex® 11-729産業用手袋の人差し指部分と親指部分のカーボンインサージョンにより、触覚感度が向上し、タッチスクリーンの使用に適合した手袋になります。
- ・ 指先感覚性の向上：手袋の裏地とコーティングに使用されたSpandex® は、指先感覚性を高め、手の疲労を軽減させる手袋です。
- ・ 追加された保護機能：INTERCEPT™ 耐切創性技術の紡糸繊維により、裂傷に対する保護が実現されます。
- ・ 把持力の向上：ポリウレタンコーティングにより把持力が高まるため、乾燥した環境や少し油っぽい環境で物品を安全に取り扱うことができます。
- ・ 快適性の向上：裏地に含まれているHPPE Lycra® は、作業者の快適性を高め、日常使用時の負担を軽減します。

業界

- ・ 自動車
- ・ 交通手段
- ・ 建設
- ・ ガラス製造
- ・ 機械および機器
- ・ メンテナンス
- ・ 金属加工

用途

- ・ 航空宇宙
- ・ 金属部品の組み立て
- ・ 白物家電の組み立て
- ・ ガラスの修理と交換
- ・ 鋭利な、または規格外の金属片の取り扱い
- ・ プレス射出成形

主な特徴

- ・ 人差し指部分と親指部分のカーボンインサージョン：タッチスクリーンの使用に適合
- ・ 裏地とコーティングに使用されたSpandex®：高い指先感覚性を提供するPPE手袋
- ・ INTERCEPT™ 耐切創性：大幅に改善された手保護具
- ・ 長さ：270～320mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-729-7	S	1双	¥1,100	1双×10袋
11-729-8	M	1双	¥1,100	1双×10袋
11-729-9	L	1双	¥1,100	1双×10袋
11-729-10	XL	1双	¥1,100	1双×10袋

技術



技術の詳細はP122をご参照ください。



HyFlex® 11-735

耐切創性を実現するINTERCEPT™ テクノロジーが採用され、掌部に浸漬コーティングが施された10Gの中作業用手袋



技術



Touchscreen Compatible
タッチパネル対応

技術の詳細はP122をご参照ください。

高水準の耐切創性に加え、極めて優れた柔軟性とフィット感を提供

- EN ISO耐切創性レベルC（ANSIレベルA4）の究極の耐切創性を実現するINTERCEPT™ テクノロジーが使用された10Gの薄手のライナーが採用されています。
- この快適かつ柔軟な編み上げライナーには、やわらかくひんやりとした触り心地で1日中快適な装着感を提供する最適化されたLycra® も採用されています。
- 掌部のポリウレタン（PU）浸漬コーティングにより、ドライ環境や軽度のオイルが付着する環境においてグリップ性能が強化され、安全な取り扱い作業が可能です。また、EN規格レベル4（ANSIレベル6）の耐摩耗性が提供されるため、手袋の寿命が延び、長くお使いいただけます。ポリウレタン（PU）コーティングは、産業環境における仕上げ加工の質を保護します。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工
- 化学薬品
- 自動車アフターマーケット

用途

- 金属加工および組み立て作業
- 部品の組み立ておよび点検
- 機器の組み立ておよび分解
- 構造部品の取り出し
- 取り付けおよび解体
- 部品の固定
- トラックと車両の積み降ろし
- 納入品の取り扱い
- メンテナンス
- 鍵屋

主な特徴

- 高強度繊維は、切創とばりに対し優れた耐性を発揮します。
- 弾性を発揮するコーティングは、耐摩耗性を提供し、手袋の寿命を延ばします。
- 高水準の耐切創性（ANSIレベルA4）
- 長さ：224～269mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-735-7	S	1双	¥1,100	1双×10袋
11-735-8	M	1双	¥1,100	1双×10袋
11-735-9	L	1双	¥1,100	1双×10袋
11-735-10	XL	1双	¥1,100	1双×10袋



HyFlex® 11-751

汚れを目立たせない設計に耐切創性を提供する
INTERCEPT™ テクノロジーを採用



長時間の装着向けに高水準の耐切創性と優れた耐摩耗性を融合

EN ISOレベルCおよびANSI耐切創性A4を実現する優れた耐切創性を提供

- INTERCEPT™ テクノロジー
- 長時間の使用と装着を考慮し強化された耐摩耗性と耐久性
- 汚れを目立たせない設計で快適な装着感を強化する軽量かつ柔軟なライナー

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工
- 自動車アフターマーケット

用途

- 一般的なメンテナンス
- ハードウェアの組み立て
- 機械加工/打抜き/切削
- 原料の取り扱い
- シートとフレームの組み立て

主な特徴

EN ISOレベルCの耐切創性を実現する高水準の耐切創性を提供します。

- INTERCEPT™ テクノロジー
- 耐久性の高いポリウレタンコーティング/耐久性の高いポリウレタンコーティングによって強化された耐摩耗性
- 継続使用、抜群の装着感、手の細かな動きを可能にする汚れを目立たせない設計
- EN420規格（一般要件）およびEN388規格（機械的リスク）規格遵守（Centexbel）
- 長さ：224～269mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
11-751-7	S	1双	¥1,300	1双×10袋
11-751-8	M	1双	¥1,300	1双×10袋
11-751-9	L	1双	¥1,300	1双×10袋
11-751-10	XL	1双	¥1,300	1双×10袋



4X43C



技術



Touchscreen Compatible
タッチパネル対応

技術の詳細はP122をご参照ください。



HyFlex® 11-754

Ansellの最軽量ANSI A4/ISOレベルD耐切創性
タッチスクリーン手袋

ずっと身につけたいくなるような、優れた耐切創性の手袋

- ・超薄型ANSIカットレベルA4/ISOカットレベルD手袋で、最高の保護を提供するために3倍の耐切創性*を備えた手袋です。
- ・生産性を向上させるため、タッチスクリーンとの互換性がある手袋
- ・超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱い、組み立ての際に手先の器用さが提供されます。

*標準ANSIカットレベルA2/ISOカットレベルB手袋と比較

業界

- ・自動車
- ・機械および機器
- ・金属加工
- ・自動車アフターマーケット

用途

- ・部品の組み立ておよび点検
- ・部品のピッキング、固定
- ・最終組立
- ・材料、製品の仕上げ加工

主な特徴

- ・INTERCEPT™ テクノロジーを採用した最軽量のANSI A4/ISOカット及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に、柔軟性と触覚を向上させます。
- ・作業の合間に手袋を交換したり取り外す必要がないタッチスクリーン対応
- ・手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。
- ・清潔でお肌に優しい。Dermatest® により、皮膚科学的に承認済
- ・長さ：225～285mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
11-754-7	S	1双	¥2,400	1双×10袋
11-754-8	M	1双	¥2,400	1双×10袋
11-754-9	L	1双	¥2,400	1双×10袋
11-754-10	XL	1双	¥2,400	1双×10袋

技術



技術の詳細はP122をご参照ください。



HyFlex® 11-755

Ansellの最軽量ANSI A5/ISOレベルE耐切創性
タッチスクリーン手袋

ずっと身につけたいくなるような、優れた耐切創性の手袋

- ・超薄型ANSIカットレベルA5/ISOカットレベルE手袋で、最高の保護を提供するために4倍の耐切創性*を備えた手袋です。
- ・生産性を向上させるため、タッチスクリーンとの互換性がある手袋
- ・超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱い、組み立ての際に手先の器用さが提供されます。

*標準ANSIカットレベルA2/ISOカットレベルB手袋と比較

業界

- ・自動車
- ・機械および機器
- ・金属加工

用途

- ・部品の組み立ておよび点検
- ・部品のピックアップ、固定
- ・最終組立
- ・材料、製品の仕上げ加工

主な特徴

- ・INTERCEPT™ テクノロジーを採用した最軽量のANSI A4/ISOカット及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に、柔軟性と触覚を向上させます。
- ・作業の合間に手袋を交換したり取り外す必要がないタッチスクリーン対応
- ・手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。
- ・清潔でお肌に優しい。Dermatest® により、皮膚科学的に承認済
- ・長さ：225～285mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-755-7	S	1双	¥2,500	1双×10袋
11-755-8	M	1双	¥2,500	1双×10袋
11-755-9	L	1双	¥2,500	1双×10袋
11-755-10	XL	1双	¥2,500	1双×10袋



3X41E

技術



Touchscreen Compatible
タッチパネル対応

技術の詳細はP122をご参照ください。



HyFlex® 11-757

ANSI A7/ISOレベルF 耐切創性 タッチスクリーン手袋



3X31F

技術



Touchscreen Compatible
タッチパネル対応

技術の詳細はP122をご参照ください。

高い耐切創性と優れた快適性を兼ね備えた、耐久性に優れた軽量産業用手袋

- 高い保護機能：高い切創保護技術のINTERCEPT™ テクノロジーを採用し、優れた ANSI A7/EN ISO F* 耐切創性レベルを実現
- 使いやすさ向上：適切な指先の感覚と快適な通気性を実現した超軽量、超薄型デザイン。タッチスクリーン対応で作業の中断がないので、日々の生産性が向上します。
- 耐久性向上：手のひら部分はポリウレタンコーティング加工により、優れた耐摩耗性
- 考え抜かれた人間工学：小指付け根部のテーラードフィットにより、自然な手の輪郭に寄り添う安全手袋
- 肌にやさしい安心感：ドイツ皮膚科学研究所Dermatest® により承認済 ANSI規格A2/EN ISO Bレベルの7倍の耐切創性手袋

業界

- 航空宇宙
- 自動車
- 機械および機器
- 電子機器
- ガラス製造
- 白物家電

用途

- 部品の組み立ておよび点検
- 部品のピッキング、固定
- 最終組立
- 材料、製品の仕上げ加工
- 器用さと精度を必要とする用途
- 金属板と金属パネルの取り扱い
- ガラス板、縁が鋭利な物の取り扱い

主な特徴

- INTERCEPT™ 耐切創性：優れた耐切創性
- 超薄型軽量設計：細やかな指先の動きでスマホ操作が可能
- ポリウレタン(PU)コーティング：優れた耐摩耗性
ANSI規格A2/EN ISO Bレベルの7倍の耐切創性手袋
- 長さ：222～274mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-757-7	S	1双	¥3,000	1双×10袋
11-757-8	M	1双	¥3,000	1双×10袋
11-757-9	L	1双	¥3,000	1双×10袋
11-757-10	XL	1双	¥3,000	1双×10袋



EDGE® 48-701

耐切創性の中作業用手袋



4342B

ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる作業レベルが中程度の作業向けのコスト効率に優れたソリューション

- 縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。
- 2つの耐切創レベル（用途により異なります）に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感を提供します。
- 掌部に施されたポリウレタン (PU) コーティングは、軽度のオイルが付着する環境において保護を提供します。
- 中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工

用途

- 航空宇宙
- 組み立てライン
- 金属部品の組み立て
- 鋭利な、または規格外の金属片の取り扱い
- 成形
- プラスチック射出成形

主な特徴

- 優れた操作性と柔軟性
- 高水準の耐切創性および耐摩耗性
- ドライ環境で優れたグリップ性能を発揮
- ニット地やカットソー地の手袋よりも耐油性に優れた保護を提供するため掌部に浸漬コーティングを採用
- 長さ：220～270mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
48-701-7	S	1双	¥700	1双×10袋
48-701-8	M	1双	¥700	1双×10袋
48-701-9	L	1双	¥700	1双×10袋
48-701-10	XL	1双	¥700	1双×10袋



EDGE® 48-705

耐切創性の中作業用手袋



EN388: 2016



4X43C



CUT



ABR

ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる作業レベルが中程度の作業向けのコスト効率に優れたソリューション

- 縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。
- 2つの耐切創レベル（用途によって異なります）に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感を提供します。
- 掌部に施されたポリウレタン (PU) コーティングは、軽度のオイルが付着する環境において保護を提供します。
- 中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工

用途

- 航空宇宙
- 組み立てライン
- 金属部品の組み立て
- 鋭利な、または規格外の金属片の取り扱い
- 成形
- プラスチック射出成形

主な特徴

- 優れた操作性と柔軟性
- 高水準の耐切創性および耐摩耗性
- ドライ環境で優れたグリップ性能を発揮
- ニット地やカットソー地の手袋よりも耐油性に優れた保護を提供するため掌部に浸漬コーティングを採用
- 長さ：220～270mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
48-705-7	S	1双	¥800	1双×10袋
48-705-8	M	1双	¥800	1双×10袋
48-705-9	L	1双	¥800	1双×10袋
48-705-10	XL	1双	¥800	1双×10袋



HyFlex® 11-318

素手感覚の快適性と耐切創性



絶対的な装着感に加えクラス最高の保護と性能を発揮

- HyFlex® 11-318は手を切るリスクがある用途においてこれまで不可能だった手の細かな動きを可能にします。18ゲージのライナーが採用された、EN規格レベル3の耐切創性を発揮する初のコーティングなしの手袋です。
- 超薄手生地は、素手と同じ感覚を可能にするだけでなく、手を作業に快適な温度に維持します。
- 指の関節や掌など手の伸び縮みする部分がスパンデックスで補強されているため、ぴったりと吸い付くような人間工学に基づくフィット感が得られます。
- また、糸くずが出にくいこの手袋はシリコン不使用で、静電気を防止するため、作業者と製品の両方を保護できます。さらに、プラスチック製の袋からのシリコンの汚染を防ぐために特別に開発されたパッケージで提供されます。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 化学薬品

用途

- 鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い
- 部品の組み立ておよび点検
- 部品、機器の点検
- ボディ表面の確認、マーキング、補修
- 最終検査
- メンテナンス

主な特徴

- コーティングなしの軽量のライナーにより、快適な使い心地に加え、裂傷に対する保護が提供され繊細な感覚が実現されます。
- 安全を考慮した設計：シリコン不使用、静電気防止、糸くずが出にくい
- タッチスクリーン対応設計
- 長さ：212～260mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-318-6	XS	1双	¥1,800	1双×10袋
11-318-7	S	1双	¥1,800	1双×10袋
11-318-8	M	1双	¥1,800	1双×10袋
11-318-9	L	1双	¥1,800	1双×10袋
11-318-10	XL	1双	¥1,800	1双×10袋
11-318-11	XXL	1双	¥1,800	1双×10袋



EN388: 2016



XX4XB



技術





HyFlex® 74-045

高い耐切創性と優れた機械的特性



薄手でありながら高い強度の保護を提供する手袋です。

- 高い水準の耐切創性を備え、優れた装着感を誇る軽量のHyFlex® 手袋は、細かい指先の動きを可能にし、別の手袋のアンダーグローブとしても使用できます。
- 米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件を遵守

業界

- 食品加工

用途

- 加工エリアでの刃物の使用
- 惣菜店やスーパーでのスライサーの刃の手入れと交換

主な特徴

- DSMダイニーマコア、高強度外部ラップ使用
- 優れた耐切創性
- 厚手の手袋の保護性能を兼ね備えた快適なフィット感の手袋
- また、別の手袋のアンダーグローブとして使用できます。
- 長さ：203～279mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
74-045-7	S	1枚	¥2,600	1枚×10袋
74-045-8	M	1枚	¥2,600	1枚×10袋
74-045-9	L	1枚	¥2,600	1枚×10袋
74-045-10	XL	1枚	¥2,600	1枚×10袋



技術





INDUSTRY

インダストリー（作業用）

メカニカル
MECHANICAL PROTECTION





HyFlex® 11-100

抗菌技術を用いて



技術



ionic+ Antimicrobial Technology

Touchscreen Compatible
タッチパネル対応ZONZ™
Comfort Fit Technology

技術の詳細はP122をご参照ください。

高トラフィックタッチポイント向けの抗菌保護

- EPA登録済抗菌技術のIonic+™ で設計された、唯一の産業用手袋
- 銀の抗菌作用を活かし、手袋を微生物から保護します。
- 軽量で通気性のある設計により、器用さを備えており、一日中快適に過ごすことができます。
- ライナーおよびコーティングの自己消毒360°抗菌保護

業界

- 製造
- ロジスティクス
- 交通手段
- リサイクルと廃棄物処理
- ホスピタリティ
- 維持管理
- 営業担当者
- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- 機械および機器
- 倉庫

用途

- 組み立てライン
- 梱包
- 最終機器の納入
- イベント管理/接客係
- 清浄/メンテナンス/修理
- 運転者/操作者/検査者
- 共有面/ツール/タッチスクリーン
- レジ/店員/現金の取り扱い
- 農業

主な特徴

- EPA登録済抗菌技術のIonic+™ で設計された、唯一の産業用手袋 - EPA登録番号 70927-6
- ライナーおよびコーティングの自己消毒360°抗菌保護
- Ionic+™ は、製品の寿命と同じ期間効果を発揮します。
- タッチスクリーン対応で、さまざまなデバイスで使用できます。
- 成形品に関するEU殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。
- コーティングが抗菌作用を阻害しないように設計されています。
- 細菌関連の臭い、汚れ、生地劣化から手袋を保護します。
- 長さ：204～274mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
11-100-7	S	1双	¥1,800	1双×10袋
11-100-8	M	1双	¥1,800	1双×10袋
11-100-9	L	1双	¥1,800	1双×10袋
11-100-10	XL	1双	¥1,800	1双×10袋



HyFlex® 11-800

20年間多目的手袋の基準として愛されてきた手袋がさらに快適な装着感の手袋に生まれ変わりました



通気性を最大30%向上するよう改良、
1日中快適にお使いいただけます。

- ・アンセルのZONZ™・コンフォート・フィット・テクノロジーにより、フィット感と装着感が改善されています。
- ・初代のモデルよりも優れた耐久性を発揮
- ・効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感が得られます。
- ・改良されたコーティングにより、以前よりも耐久性が強化され、ドライ環境や軽度のオイル付着環境におけるグリップ性能が改善されています。

業界

- ・自動車
- ・機械および機器
- ・金属加工
- ・化学薬品

用途

- ・部品のピッキング、固定
- ・システムとねじ留めの調整
- ・トラックと車両の積み降ろし
- ・納入品の取り扱い
- ・製品の配送、輸送、納入
- ・鍵屋

主な特徴

- ・当社が初めて市場で販売を開始したこの発泡ニトリルコーティング手袋は、作業者の快適な装着感をさらに向上する通気性を提供します。細かな作業を楽に行えるよう、グリップ性能を強化した発泡ニトリルコーティング手袋
- ・手の自然な形状により近づけるため、小指の付け根にフィット感を向上する生地を採用
- ・独立検査・認証システム Oeko-Tex® により、皮膚に優しい製品であることが証明されています。
- ・塗装前の金属部品にシリコン汚染が発生することはありません。
- ・長さ：199～265mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-800-7	S	1双	¥500	1双×10袋
11-800-8	M	1双	¥500	1双×10袋
11-800-9	L	1双	¥500	1双×10袋
11-800-10	XL	1双	¥500	1双×10袋



技術



技術の詳細はP122をご参照ください。



HyFlex® 11-937

安全性を強化する耐切創性と撥油性を兼ね備えた最軽量手袋*



長時間使用時に最大12倍の耐久性を提供する強化された親指の付け根と、耐切創性および撥油性を兼ね備えた最軽量の手袋

皮膚に油が付着することを防止し、手を安全かつ乾いた状態に保つRIPEL技術採用
濡れたアイテムや油が付着したアイテムの安全な取り扱いを可能にするため、平均
13%優れたグリップ性能を実現するANSELL GRIP™ テクノロジー

手袋の寿命を延ばすFORTIX技術

- 保護を強化するため最大12倍の耐久性を発揮する親指の付け根を採用

- 最大40%改善された耐摩耗性*

最軽量：最大20%軽量

に仕上げられたデザインおよび一日中快適な装着感を実現するZONZ Comfort Fit
技術採用*

業界

- ・ 自動車
- ・ 自動車アフターマーケット
- ・ 機械および機器
- ・ 金属加工
- ・ 農業
- ・ 倉庫

用途

- ・ 部品の検査、選別、点検
- ・ 部品の組み立ておよび点検
- ・ 部品のピッキング、固定
- ・ シャーシの組み立て、ボディトリミング
- ・ 部品、システムの調整
- ・ 生産ラインへの部品の納入
- ・ 機器の修理およびメンテナンス
- ・ エンジン / トランスミッションおよび修理
- ・ 石油、液体、フィルター交換
- ・ 検査（ピッキング、点検、マーキング）
- ・ プレス機への供給およびスペア部品の除去
- ・ 部品の固定
- ・ パネル部品の調整
- ・ プレス工場の業務

主な特徴

- ・ 裂傷および油や産業現場の各種液体への暴露から手を保護
- ・ 指先の細かな動きを可能にし、抜群の装着感を提供する超軽量の18ゲージデザイン
- ・ 保護を提供するだけでなく手袋自体の寿命も延ばす強化された親指の付け根
- ・ 乾燥したアイテムから油が付着したアイテムまで安全に取り扱うことができるグリップ性能を発揮
- ・ 手袋の寿命の延長に貢献する耐久性に優れたFORTIXコーティング
- ・ シリコンフリー
- ・ 長さ：212~261mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
11-937-6	XS	1 双	¥3,300	1 双×10 袋
11-937-7	S	1 双	¥3,300	1 双×10 袋
11-937-8	M	1 双	¥3,300	1 双×10 袋
11-937-9	L	1 双	¥3,300	1 双×10 袋
11-937-10	XL	1 双	¥3,300	1 双×10 袋
11-937-11	XXL	1 双	¥3,300	1 双×10 袋



EN388: 2016

GR
ISO 18889

4X42B



技術



Fibre glass free



技術の詳細はP122をご参照ください。



EDGE® 48-128

優れた耐摩耗性とグリップ性能が求められる軽作業用途向け



さらにグリップ性能が高く、クッション性があり、長期にわたり耐摩耗性を発揮するため、軽中量のニット地のコットン製手袋に代わる優れた手袋です。

- ・伸縮性のあるニットリストが採用された縫い目のない濃いグレーのポリエステルのニットライナーと、ブラックのニトリルコーティングが施されています。
- ・さらにグリップ性能が高く、クッション性があり、長期にわたり耐摩耗性を発揮するため、軽中量のニットのコットン製手袋に代わる優れた手袋です。
- ・オイルを使用する軽作業用途向けの実用的な選択肢です。

業界

- ・自動車
- ・機械および機器

用途

- ・小型部品の組み立て
- ・一般的な取り扱い作業
- ・梱包
- ・品質管理

主な特徴

- ・非常に薄手で装着感が抜群
- ・手の細かな動きと優れた柔軟性を発揮
- ・優れた水準の耐摩耗性と耐油性
- ・汚れが目立たない濃い色の手袋
- ・長さ：220～270mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
48-128-7	S	1双	¥300	1双×10袋
48-128-8	M	1双	¥300	1双×10袋
48-128-9	L	1双	¥300	1双×10袋
48-128-10	XL	1双	¥300	1双×10袋



4121A



EDGE® 48-702

中作業の耐切創性手袋



EN388: 2016



4X42B

乾いた環境や少し油が付いた環境で、耐切創性および耐摩耗性を必要とする中作業用の費用効率の良い手袋

- ・ライナーには縫い目がなく、手のひらの部分はマイクロ発泡ニトリルで浸漬コーティングされています。
- ・マイクロ発泡ニトリルコーティングは、一般の発泡ニトリルコーティングよりも優れた触覚感度と器用さを提供します。
- ・マイクロ発泡ニトリルコーティングは、物をしっかりとつかめるようにし、優れた耐摩耗性を提供し、少し油が付いた環境に適合します。
- ・着心地が非常に良く、手を涼しく乾燥した状態に保つことができるように通気性のある素材でコーティングされています。

業界

- ・自動車
- ・機械および機器
- ・金属加工
- ・石油・ガス

用途

- ・わずかにオイルが付着した部品や薄板の取り扱い
- ・金属部品の組み立て
- ・一般的なメンテナンス

主な特徴

- ・非常に優れたグリップ力と耐久性を備えています。
- ・優れた快適さと器用さ
- ・手のひらの部分の厚さが最も薄い手袋で、ニトリルでコーティングしたほとんどの同等の手袋よりも薄い
- ・EN420規格（一般要件）とEN388規格（機械的危険）に準拠
- ・通気性のあるコーティング材とライナーで非常に快適です。
- ・乾燥した環境と少し油が付いた環境で利用できます。
- ・長さ：230～265mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
48-702-6	XS	1双	¥1,000	1双×10袋
48-702-7	S	1双	¥1,000	1双×10袋
48-702-8	M	1双	¥1,000	1双×10袋
48-702-9	L	1双	¥1,000	1双×10袋
48-702-10	XL	1双	¥1,000	1双×10袋
48-702-11	XXL	1双	¥1,000	1双×10袋



EDGE® 48-706

ミディアムデューティー耐切創性工業用手袋



4X43C

ドライ環境と軽度のオイル付着環境で高い切創性が求められる中作業向けのコスト効率に優れたソリューション

- ・縫い目のないライナー採用、発泡ニトリル浸漬コーティングが施された掌部
- ・ANSI耐切創性レベルA3およびEN ISO 13997レベルC評価の高い耐切創性を発揮
- ・発泡ニトリルコーティングを行うことにより、耐摩耗性とグリップ力という点で優れた性能を発揮します。
- ・耐摩耗性、グリップ力、耐切創性が必要な中作業から重作業向けの製品
- ・厚手のレザー製手袋や掌部にポリウレタン浸漬加工が施された、耐切創性のあるニット手袋に代わる最適な製品

業界

- ・自動車
- ・建設
- ・ガラス製造
- ・機械および機器
- ・金属加工

用途

- ・一般的なメンテナンス
- ・ハードウェアの組み立て
- ・機械加工/打抜き/切削
- ・成形
- ・プラスチック射出成形
- ・原料の取り扱い
- ・シートとフレームの組み立て

主な特徴

- ・耐久性に優れた発泡ニトリルコーティング
- ・優れた装着感と使用感
- ・EN ISOレベルC適合の高い耐切創性を発揮（ANSIレベル3）
- ・優れた耐摩耗性
- ・各種規格に適合
 - EN420（一般要件）および
 - EN388（機械的リスク）
- ・通気性に優れたライナーを使用して、快適な装着感を提供
- ・ドライ環境から軽度のオイル付着環境において十分なグリップ力を発揮
- ・長さ：220～270mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
48-706-7	S	1双	¥1,000	1双×10袋
48-706-8	M	1双	¥1,000	1双×10袋
48-706-9	L	1双	¥1,000	1双×10袋
48-706-10	XL	1双	¥1,000	1双×10袋



EDGE® 48-919

軽作業用の多目的手袋



油が付いた環境で耐久性のあるコーティングと安全なグリップを必要とする軽作業向けの費用対効果の高いソリューション

- ・裏地には縫い目がなく、ニトリルで手の全体がフルコーティングされています。
- ・ニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から着用者を保護します。
- ・手のひらの部分がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた環境でも物を容易につかむことができます。
- ・油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業向けの手袋です。

業界

- ・自動車
- ・建設
- ・機械および機器
- ・金属加工
- ・化学薬品
- ・石油・ガス

用途

- ・部品の組み立て
- ・メンテナンス
- ・金属加工
- ・品質管理

主な特徴

- ・グリップ力と撥油性の優れた組み合わせ
- ・優れた耐摩耗性
- ・二重層のニトリルコーティングにより、油が付いた部品や工具を扱う際に手を乾燥した快適な状態に保つことができます。
- ・EN420規格（一般要件）とEN388規格（機械的危険）に準拠
- ・手首の部分が伸縮性のあるニットで作られているため、ぴったりフィットします。
- ・油が付いた環境で利用できます。
- ・長さ：220～280mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
48-919-7	S	1双	¥600	1双×10袋
48-919-8	M	1双	¥600	1双×10袋
48-919-9	L	1双	¥600	1双×10袋
48-919-10	XL	1双	¥600	1双×10袋



4121A

ActivArm[®] Hycron[®] 27-607

過酷な使用環境に耐える極めて丈夫なニトリル背抜き大型手袋



粗い面または研磨剤を扱う作業向けの極めて丈夫な重作業用手袋

- ActivArm[®] Hycron[®] 27-607に採用されている独自の設計により、鋭利な物や摩擦しやすい環境に対する耐性が強化され、長くお使いいただけます。
- ニトリルコーティングは、オイルやグリースに対して十分なバリアを提供します。
- 快適な装着感を実現するため、コットンとジャージ生地が使用されています。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工

用途

- 金属板と金属パネルの取り扱い
- 金属加工および組み立て作業
- プレス射出成形
- 構造部品の取り出しおよび仕上げ
- 固定部品、クリッピング部品、ワイヤハーネス（機器の接続）
- 部品の組み立ておよび点検

主な特徴

- 過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な大型手袋：重作業用のレザー手袋より3倍丈夫
- アンセル独自のニトリル配合設計。鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮
- PVCよりも強度と柔軟性に優れています。また、グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するだけでなく、レザーやコットンのように劣化しません。
- シリコンフリー
- 金属やモーターメーカー向けの作業に十分な清浄度を提供します。
- 長さ：246～272mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
27-607-8	M	1双	¥800	1双×10袋
27-607-9	L	1双	¥800	1双×10袋
27-607-10	XL	1双	¥800	1双×10袋



EN388: 2016



4121B



ABR



CUT

ActivArm[®] 07-112

防振手袋



作業中の激しい振動のリスクや影響を最低限に軽減

- ・ 300Hzを上回る周波数の振動を受ける作業に理想的
- ・ 掌と指への振動を軽減する設計手腕振動症候群（HAVS）から手を保護する VibraGuard[®] 手袋
- ・ 振動減衰 EN10819
- ・ TRM（中波帯伝達率）= 0.90
- ・ TRH（高波帯伝達率）= 0.52

業界

- ・ 自動車
- ・ 金属加工
- ・ 農業
- ・ 自動車アフターマーケット
- ・ 石油・ガス

用途

- ・ 金属板と金属パネルの取り扱い
- ・ 金属加工および組み立て作業
- ・ 機械加工済みの未完成金属部品の取り扱い
- ・ 縁が鋭利または粗削りの材料の取り扱い

主な特徴

- ・ EN 10819:1996準拠、手を清潔な状態に保つため全面コーティング加工が施されたフルフィンガーバージョン
- ・ 手に伝わる振動を軽減するアンセルバイブレーションゲルフォーム
- ・ 耐引裂性と耐摩耗性を実現するニトリルコーティング
- ・ シリコンフリー、洗濯可能
- ・ 長さ：235～261mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
07-112-8	M	1双	¥7,200	1双×10袋
07-112-9	L	1双	¥7,200	1双×10袋
07-112-10	XL	1双	¥7,200	1双×10袋
07-112-11	XXL	1双	¥7,200	1双×10袋



3221B



HyFlex® 11-618

ドライ環境から軽度のオイル付着環境での軽作業向けの掌部にコーティングが施されたウレタン背抜き手袋



手の繊細な感覚、細かな動き、そして柔軟性の基準

- まるで第2の皮膚のようなこの極めて薄手の手袋は、細心の注意が必要な作業向けに圧倒的な装着感とフィット感に加え、繊細な感覚を提供します。
- ドライ環境から軽度のオイル付着環境での幅広い軽作業向けのこの手袋は、現在使用している手袋よりもさらに優れたフィット感と繊細な感覚を提供し、正確な作業を可能にする手袋をお探しの作業者に理想的なソリューションです。

業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工

用途

- 部品のピッキング、固定
- 部品の組み立てと取り付け
- 部品の固定

主な特徴

- 細心の注意が求められる作業向けに作られたアンセルで一番薄手の手袋
- 驚くほどの感触を実現し、手の細かな動きを可能にする軽作業用の18ゲージのライナー
- 優れた耐摩耗性と操作性を備えた非常に薄い0.8mmのポリウレタンコーティング
- 長さ：194～253mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-618-7	S	1双	¥400	1双×10袋
11-618-8	M	1双	¥400	1双×10袋
11-618-9	L	1双	¥400	1双×10袋
11-618-10	XL	1双	¥400	1双×10袋



HyFlex® 48-135

静電気保護手袋



お得な価格で静電気保護を提供します。

- HyFlex® 48-135は、お得な価格で抜群の装着感を実現し、ほぼすべての静電気保護のニーズにお応えします。
- 縫い目のない構造と幅広いサイズ展開で快適な装着感とフィット感が保証されます。
- 指先のコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
- EN 1149-1: 表面抵抗率 (Ω) : 4.02×10^{10}
- EN 1149-2: 体積抵抗率 (Ω) : 2.19×10^7
- EN 1149-3: 電荷減衰時間 T50 < 0.01秒

主な特徴

- 製品の保護を最適化するため静電気保護を提供
- 指先のみがコーティングされ、フィット感と柔軟性が向上
- 長さ：190～240mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
48-135-7	S	1双	¥500	1双×10袋
48-135-8	M	1双	¥500	1双×10袋
48-135-9	L	1双	¥500	1双×10袋
48-135-10	XL	1双	¥500	1双×10袋
48-135-11	XXL	1双	¥500	1双×10袋





EDGE® 48-125

軽作業用の経済的なソリューション



ドライ環境から軽度のオイル付着環境において、十分な耐摩耗性、グリップ性能、指先の感覚を実現します。

- ・ 15ゲージのポリエステルライナー - 抜群の肌触りを提供し手の細かな動きをサポートします（用途の要件により異なります）。
- ・ 縫い目のないニットライナーとホワイトのポリウレタン浸漬コーティングが施された伸縮性のあるニットリストが採用されています。
- ・ この組み合わせは、コットンのキャンバス地の手袋や厚手のコットン製の手袋よりも優れた柔軟性を提供し、指先の細かな動きを可能にします。
- ・ 高い性能を発揮するコスト効率に優れた軽作業用手袋です。

業界

- ・ 自動車
- ・ 電子機器
- ・ 石油・ガス
- ・ 機械および機器
- ・ 交通手段
- ・ リサイクルと廃棄物処理

用途

- ・ 小型部品の組み立て
- ・ 一般的な取り扱い作業
- ・ 梱包
- ・ 品質検査

主な特徴

- ・ EN規格レベル4の耐摩耗性に加え、耐引裂性、優れたグリップ性能で生産性を向上
- ・ 縫い目のない構造、快適な装着感を提供し、安全な手袋の使用をサポート
- ・ 長さ：220～270mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
48-125-6	XS	1双	¥200	1双×10袋
48-125-7	S	1双	¥200	1双×10袋
48-125-8	M	1双	¥200	1双×10袋
48-125-9	L	1双	¥200	1双×10袋
48-125-10	XL	1双	¥200	1双×10袋



4131

4121A



EDGE® 48-126

軽作業用の経済的なソリューション



ドライ環境から軽度のオイル付着環境において、十分な耐摩耗性、グリップ性能、指先の感覚を実現します。

- ・ 15ゲージのポリエステルライナー - 抜群の肌触りを提供し手の細かな動きをサポートします（用途の要件により異なります）。
- ・ 縫い目のないニットライナーとブラックのポリウレタン浸漬コーティングが施された伸縮性のあるニットライナーが採用されています。
- ・ この組み合わせは、コットンのキャンバス地の手袋や厚手のコットン製の手袋よりも、優れた柔軟性を提供し、指先の細かな動きを可能にします。
- ・ 高い性能を発揮するコスト効率に優れた軽作業用手袋です。



4121A

業界

- ・ 自動車
- ・ 電子機器
- ・ 機械および機器
- ・ 石油・ガス
- ・ 交通手段
- ・ Utilities

用途

- ・ 小型部品の組み立て
- ・ 一般的な取り扱い作業
- ・ 梱包
- ・ 品質検査

主な特徴

- ・ EN規格レベル4の耐摩耗性に加え、耐引裂性、優れたグリップ性能で生産性を向上
- ・ 汚れが目立ちにくく、廃棄頻度が少ない手袋です。
- ・ 縫い目のない構造、快適な装着感を提供し、安全な手袋の使用をサポート
- ・ 長さ：220～270mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
48-126-7	S	1双	¥200	1双×10袋
48-126-8	M	1双	¥200	1双×10袋
48-126-9	L	1双	¥200	1双×10袋
48-126-10	XL	1双	¥200	1双×10袋



EDGE® 48-129

軽作業用の経済的なウレタン背抜き手袋



4121A

ドライ環境から軽度のオイル付着環境において、十分な耐摩耗性、グリップ性能、指先の感覚を実現します。

- ・グレーの15ゲージのポリエステルライナー - 抜群の肌触りを提供し手の細かな動きをサポートします。
- ・縫い目のないニットライナーとグレーのポリウレタン浸漬コーティングが施された伸縮性のあるニットリストが採用されています。
- ・この組み合わせは、コットンのキャンバス地の手袋や厚手のコットン製の手袋よりも、優れた柔軟性を提供し、指先の細かな動きを可能にします。
- ・高い性能を発揮するコスト効率に優れた軽作業用手袋です。

業界

- ・自動車
- ・電子機器
- ・石油・ガス
- ・機械および機器
- ・リサイクルと廃棄物処理
- ・交通手段

用途

- ・小型部品の組み立て
- ・一般的な取り扱い作業
- ・梱包
- ・品質検査

主な特徴

- ・EN規格レベル4の耐摩耗性に加え、耐引裂性、優れたグリップ性能で生産性を向上
- ・縫い目のない構造、快適な装着感を提供し、安全な手袋の使用をサポート
- ・長さ：220～270mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
48-129-6	XS	1双	¥200	1双×10袋
48-129-7	S	1双	¥200	1双×10袋
48-129-8	M	1双	¥200	1双×10袋
48-129-9	L	1双	¥200	1双×10袋



ActivArm® 78-150

あらゆる作業環境で手を温かい状態に保ちます



低温環境や湿潤環境において長時間快適にお使いいただける縫い目のない断熱手袋です。

- 低温環境や湿潤環境において保温効果を発揮し手を温めます。
- アンダーグローブとして使用できます。
- 左右どちらの手でもお使いいただけます。

業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- 食品加工
- 機械および機器
- 金属加工

用途

- 部品の検査、選別、点検
- 生産ラインへの部品の納入
- 生産ラインのサポートおよびメンテナンス
- 一般的な目的での自動車のアフターサービス
- ボディ塗装（表面の点検を含む）
- 梱包済み食肉の保管
- 瓶と缶の保管
- 原料の保管
- 未完成部品と箱の積み降ろし
- 部品および付属品のピッキング

主な特徴

- 低温環境で手を保護する断熱手袋
- 長時間快適に使用できる自動編み上げ技術
- 縫い目がありません。
- 左右兼用
- 米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件を遵守
- 長さ：260mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
78-150-9	フリー	1双	¥900	1双×10袋



0493



010



214XA



X1XXXX



AlphaTec® 56-800

ポリウレタン製エプロン



さまざまな作業に適した高性能で適応性のある保護

- 高性能エプロンは、0.20-0.23mmのダイカットEnduro2000™ ポリウレタン素材を特徴とし、強くて丈夫で、ネオプレン、ニトリル、ビニール、その他のフィルムを上回る特性のユニークな組み合わせを提供します。
- 調節可能なネックストラップは強力で、さまざまなユーザーに耐久性と一貫したフィット感を提供します。
- エプロンは柔らかく快適で、お手入れが簡単で、低温でも柔軟性を保ちます。

業界

- ライフサイエンス
- 化学
- 食品加工

用途

- 油脂分の清掃時に作業性が良い
- 缶詰
- 瓶詰め
- 保管と輸送
- 設備のメンテナンスと修理
- 植物の消毒
- 液体の移送

信頼性の高い保護

- 油、グリース、化学薬品が存在する場所では、Ansellエプロンは作業者を清潔に保ち、有害な接触から保護するのに役立ちます。

耐久性

- Endurosaf™ ポリウレタン構造は強くて丈夫で、優れた耐引裂性と耐穿刺性を備えながら、低温でも柔軟性を保ちます。
- 誘電シールされたネックストラップとウエストストラップは清潔に保つのが簡単で破れにくく、ネックストラップには調節可能な非腐食性、非吸収性のプラスチックバックルが付いており、より快適なフィット感を実現します。

快適さ

- 調整可能な紐が付いた2つのサイズにより、幅広いユーザーに最適なフィット感を保証します。これらのエプロンは柔らかく、快適で、お手入れが簡単です。

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
56-800-45	863.6×1,143mm	1枚	¥3,700	1枚×10袋
56-800-50	863.6×1,270mm	1枚	¥3,700	1枚×10袋



INDUSTRY

インダストリー（耐熱用）

メカニカル
MECHANICAL PROTECTION



ActivArm[®] Flex 42-445

柔軟性のある耐熱バリア



優れた耐熱性を発揮し、手と手首を完全に保護

- 乾燥物を断続的に取り扱うことを目的とした設計
- 耐切創性と耐摩耗性を提供
- ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化
- 優れた快適性と柔軟性
- 汗を吸収するフェルト不織布の裏地
- 手の甲に耐熱加工 (42-445 & 42-474)
- 最高200℃の断続的な乾熱接触を目的とした設計

業界

- 自動車
- 化学薬品

用途

- プレス射出成形
- 成形構造部品の取り扱い
- 溶接

主な特徴

- 最高200℃の乾燥物を断続的に取り扱うことを目的としたフェルト不織布の断熱性と全面耐熱バリア加工設計
- 外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、指の快適性、操作性、柔軟性を実現
- 接着ニトリルコーティングにより、引裂、突刺、摩耗、切創からの保護を提供
- ドライまたはオイルが付着した面で優れたグリップ力を発揮
- 優れた快適性と柔軟性：汗を吸収するフェルト不織布（内側）
- アスベスト不使用
- 長さ：235～245mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
42-445-8	M	1双	¥1,500	1双×10袋
42-445-9	L	1双	¥1,500	1双×10袋
42-445-10	XL	1双	¥1,500	1双×10袋



ActivArm[®] 42-474

柔軟な全面耐熱バリア加工



手と手首を完璧に保護し、優れた耐熱性を発揮します。

- 最高250℃のドライかつ高温の対象物を断続的に取り扱う場合を想定した設計
- 耐切創性と耐摩耗性を提供
- ドライまたはオイルが付着した面でグリップ性能を強化
- 抜群の装着感と柔軟性：汗を吸収する不織フェルトライナー

業界

- 自動車
- 化学薬品
- 食品加工

用途

- プレス射出成形
- 成形構造部品の取り扱い
- 溶接

主な特徴

- 最高250℃のドライな対象物を断続的に取り扱う場合に使用することを目的とした不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工
- 外側の縫い目のない2ピース構造により、指に対する快適さ、操作性と柔軟性を提供します。
- 引裂、突刺、摩耗、切創に対する保護を提供するニトリルコーティング採用
- ドライまたはオイルが付着した面で優れたグリップ性能を発揮
- 抜群の装着感と柔軟性：汗を吸収する不織フェルトライナー
- アスベスト不使用
- 米国食品医薬品局（FDA）の食品の取り扱いに関する要件を遵守
- 長さ：343～356mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
42-474-8	M	1双	¥2,300	1双×10袋
42-474-9	L	1双	¥2,300	1双×10袋
42-474-10	XL	1双	¥2,300	1双×10袋



ActivArm[®] 43-113

耐熱性・耐炎性手袋



手と手首を完璧に保護し、優れた耐熱性と耐炎性を発揮します。

- デュポンのケブラー製アウター糸で編み上げられています。
- 接触熱、対流熱、放射熱に対する耐性があります。
- 耐炎性。手袋のシェルは溶けず、熱を伝達しません。
- ニット地のロングリストカフは、手首までしっかり保護します。
- 高水準の耐切創性：ENレベル5およびレベルE

業界

- 機械および機器

用途


- 高温ガラス、瓶、窓枠の取り扱い
- 高温鋳金の取り扱い
- ゴム加工、加硫、カレンダー（艶出し加工）
- ゴム製タイヤ、ベルト、プロファイルの離型
- オートクレープからの製品の取り出し

主な特徴

- 最高350° C (660° F) のドライかつ高温の対象物を断続的に取り扱う場合を想定した設計
- 耐炎性 - 着火した場合、自己消火します。
- 極めて優れた耐切創性
- 装着感が良く吸収性のあるコットンライナー
- 長さ：330～381mm



0493

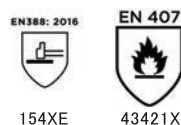

技術

Kevlar[®]

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
43-113-9	L	1双	¥5,200	1双×10袋
43-113-10	XL	1双	¥5,200	1双×10袋

ActivArm[®] Workguard[™] 43-216

厳しい条件が求められる溶接作業や高温作業に適した重作業用の溶接手袋



0493



EN388: 2016



3243B



413X4X

技術

Kevlar[®]

熱、火、火花、突刺に対し、高水準の耐久性、操作性、保護を提供します。

- ・ 厳しい条件が求められる溶接作業や高温作業向けにEN12477タイプAの保護を提供します。
- ・ 被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に適しています。
- ・ 改良された3次元構造が親指に採用されているため、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。上質な牛床革とケブラー[®] 糸を使用したコード状の細革が差し込まれた縫い目により、使用中耐久性が確保されます。
- ・ 快適なコットンライナーは、装着感をさらに向上するだけでなく、断熱性能も提供します。
- ・ ロングカフにより、肘までしっかりと保護されます。

業界

- ・ 自動車
- ・ 機械および機器
- ・ 金属加工
- ・ 自動車アフターマーケット
- ・ 石油・ガス

用途

- ・ 溶接、結合、リベット打ち
- ・ 金属加工および組み立て作業
- ・ 機器の修理およびメンテナンス

主な特徴

- ・ 指先を細かく動かし、コントロールすることを可能にする、親指に採用された改良された3次元構造
- ・ 上質な牛床革とケブラー採用の、コード状の細革が差し込まれた縫い目[®]
- ・ 保護を強化するコットンライナー
- ・ 保護を強化するロングカフ
- ・ 重作業の切断作業には使用しないでください。本手袋は、完全な防水性ではないため、化学薬品の取り扱いには使用しないでください。
- ・ オゾン発生源や発火源に近付けないでください。直射日光を避けて保管してください。涼しく乾燥した場所で保管してください。
- ・ 長さ：370～415mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
43-216-9	L	1双	¥2,400	1双×10袋
43-216-10	XL	1双	¥2,400	1双×10袋



ActivArmr® 43-217

溶接作業時の熱から保護



高い感覚性と細かな指先の動きを実現しつつ、手を安全に保護

- 耐熱保護を提供しつつ、精度が求められる作業を行うために必要な細かな指先の動きを可能にするTIG溶接作業向け手袋

業界

- 機械および機器
- 自動車
- 石油・ガス

用途

- 研削
- 溶接
- ろう付け
- 金属加工
- メンテナンス
- 溶接、結合、リベット打ち
- 機器の修理およびメンテナンス
- 金属加工および組み立て作業

主な特徴

- ActivArmr® 43-217は、正確な溶接作業と高温環境での作業でEN12477タイプBの保護を実現するTIG溶接作業向け手袋
- TIG溶接作業および研削、ろう付け、金属加工、メンテナンスに最適
- 熱、火、火花、溶接スパッタに対する保護を提供
- 3次元構造が親指に採用されているため、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適
- 使用中耐久性を確保するため、上質なフルグレインのやぎ革と縁かがり縫いのパラアラミド糸を使用
- スプリットカウハイド（牛漉き革）採用のロングカフが肘まで保護
- 長さ：340～360mm

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
43-217-9	L	1双	¥2,200	1双×10袋
43-217-10	XL	1双	¥2,200	1双×10袋
43-217-11	XXL	1双	¥2,200	1双×10袋





INDUSTRY

インダストリー（腕カバー）

メカニカル
MECHANICAL PROTECTION





HyFlex® 11-200

アンセルが提供する最も快適な装着感の高視認性の耐切創スリーブ



※手袋は含まれません



高視認性、レベル5の耐切創性、レベル1の耐熱性により安全性が強化されています。

- HyFlex® 11-200のスリーブは、アンセルの製品ラインの中で最も快適な装着感を提供します。汗やかゆみを軽減するため腕周りにゆったりとしたスペースを確保
- 肘から手首までのエリアを調整できる人間工学に基づく設計により、自由に腕を動かせるため、作業者は突っ張り感なく作業を行うことができ、生産性の向上につながります。
- EN規格レベル5の耐切創性（ANSI A3）とレベル1の耐熱性（EN407）を発揮し、高視認性により高い安全性が保証されます。
- 優れた耐摩耗性（レベル2）を発揮するだけでなく、洗える仕様になっています。
- 人間工学に基づく設計と固定システムが採用されているため、作業者にとって受け入れやすく、多くの作業者が利用することで事故やけがの軽減につながります。

業界

- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- 機械および機器
- 金属加工

用途

- 構造部品とボディ部品の取り扱い
- 部品の検査、選別、点検
- ボディパネルの修理および交換
- ガラスの修理と交換
- 構造部品およびボディ部品の取り出し
- 検査（ピッキング、点検、マーキング）
- 補修
- プレス工場の業務
- 金属加工、ガラス加工

主な特徴

- 装着感：汗やかゆみを軽減するため腕周りにゆったりとしたスペースが確保された、アンセルの製品ラインの中で最も快適な装着感を提供するスリーブ
- 自由な動き：人間工学に基づく設計により、自由に腕を動かせるため、作業者は突っ張り感なく作業を行うことができます。
- 安全性および製品寿命：レベル2の耐摩耗性により、長期間耐切創性を発揮する高視認性スリーブ
- 長さ：475mm

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
11-200-19	フリー	1枚	¥2,800	1枚×10袋



HyFlex® 70-138

18インチ腕用、100%ケブラースリーブ、伸縮性のある親指用ループ付きニットリスト、上部Velcroファスナー



優れた機械的保護と耐切創性

- 耐切創性、柔軟性、快適性を備える100% Kevlar® 繊維ニット地の二層スリーブ
 - HyFlex® 70-138は、軽度の火傷や熱から前腕を保護します。
- また、親指用スロットとベルクロストラップが特徴です。

業界

- 自動車
- 金属加工
- 機械および機器

用途

- プレス工場の業務
- 部品の組み立ておよび点検
- シーラーの塗布、補修
- 機器の修理およびメンテナンス
- ガラス、シート、パネルの切断
- 構造部品およびボディ部品の取り出し
- システムとねじ留めの調整

主な特徴

- 100%ケブラー
- 快適性を向上する親指用スロットとVelcro® ストラップ
- 腕の保護を強化する二層構造
- 低熱、切創、火傷から前腕を保護
- 長さ：457mm



技術

Kevlar®

カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
70-138-18	フリー	1枚	¥1,600	1枚×10袋



個人保護製品の世界的リーダーカンパニー

アンセルビジネスの仕組み：グローバルセールス、製品群、販売網


安全への取り組み

アンセルは130年以上人々を守ってきています。私たちは様々な産業従事者のニーズに応える個人保護製品にフォーカスした特別チームを設置してきました。危険な状況に毎日直面している従事者を保護するための製品開発に取り組んでいます。

アンセルが従事者の安全のために取り組んでいること：私たちは、あらゆる作業員と製品の保護要件を満たす手袋と衣服の包括的な製品を提供しています。

Ansell早わかり

- ・年間10億枚以上の手袋を販売
- ・最近2年間で100以上の新製品を上市
- ・25以上の業種に個人保護製品を提供
- ・1日に1000万人以上の従事者を保護

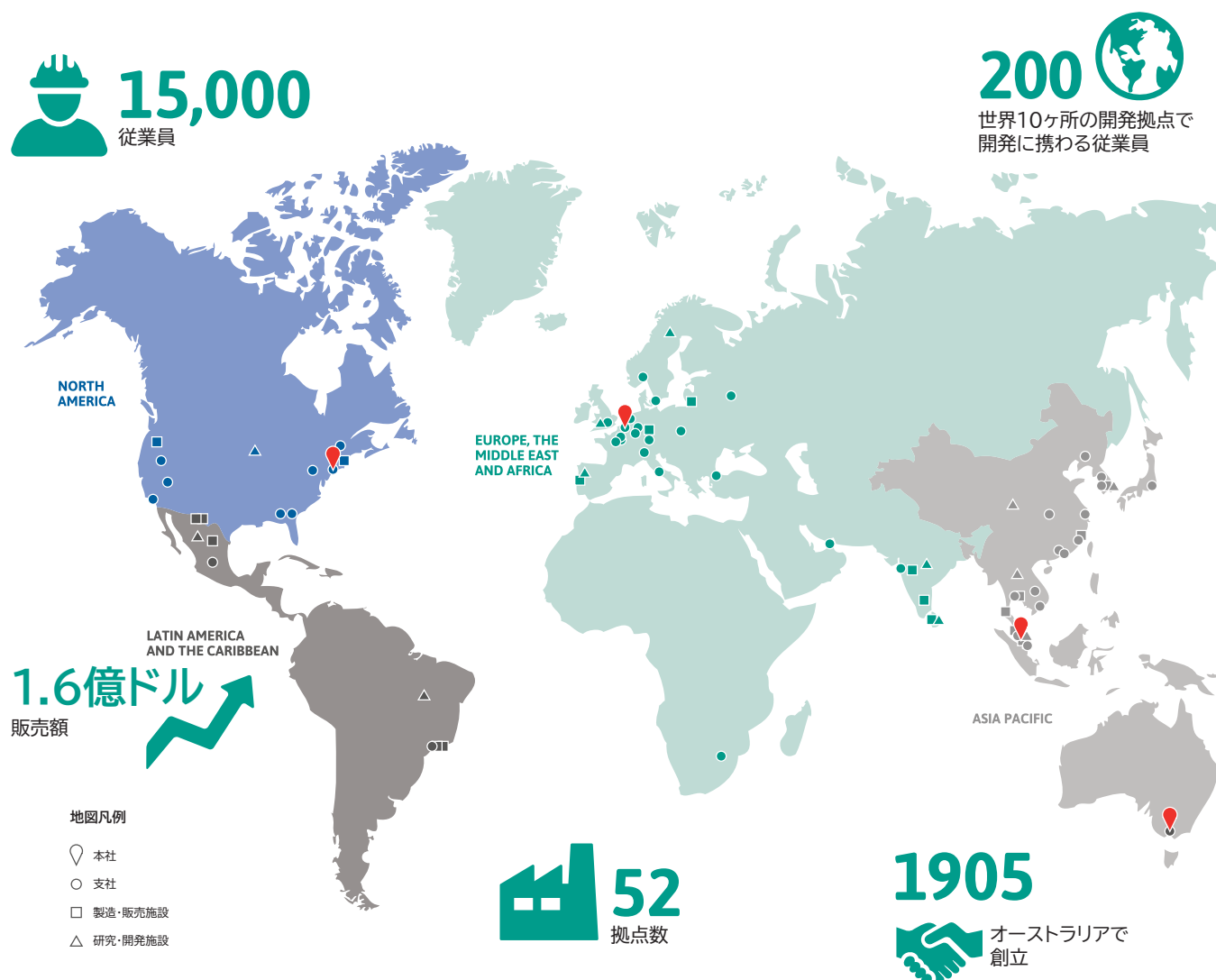


アンセルを選ぶ理由

私たちは、労働者の問題を解決し、安全でより保護された世界を創り出すための先進的なソリューションとテクノロジーを創造するイノベーターです。私たちのビジョンはさらされている危機に対して従事者が適切な防御策を享受できる世界を創り出すことです。職場の内外にかかわらず、人々は状況に応じて適切な保護を受ける必要があります。結局のところ、安全性、セキュリティ、生産性の向上にとって、十分な防御以上に優れた保証があるのだろうか？

差別化のための8つの次元

アンセル独自の明確な強みを活かし、お客様により良い防御策を提供します。

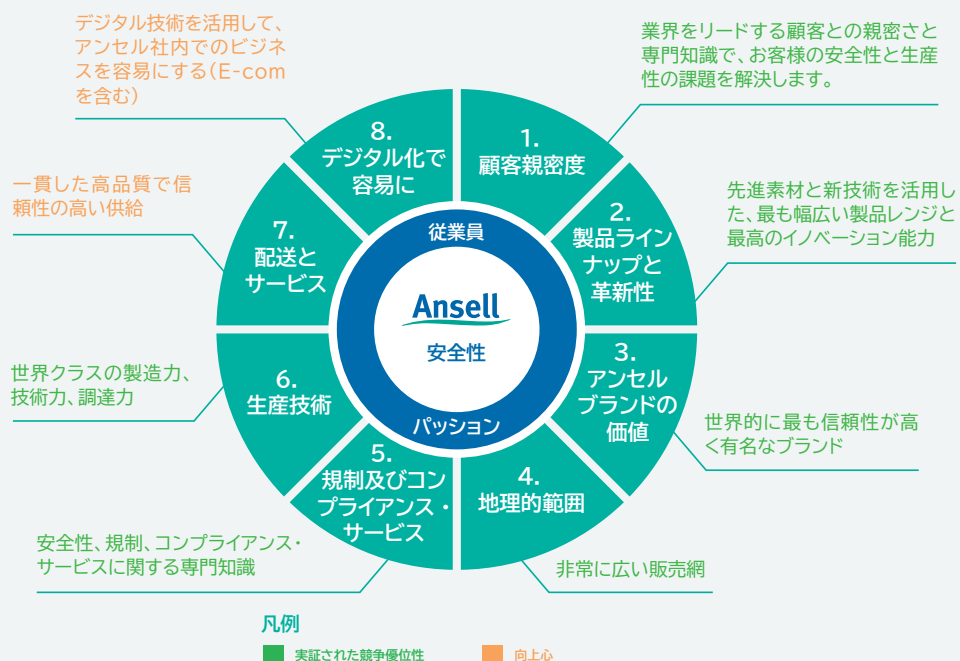

責任ある対応戦略と目的

私たちの責任ある対応戦略と目的は、私たちがすべてのステークホルダーの利益への配慮をどのように事業戦略に結びつけているかを示しています。


過去数年間にわたり、アンセルはサステナビリティをビジネスに取り入れる方法を変革してきました。さらに、この分野で前進を続けていきます。

より良い社会	 従業員と幅広い労働力	 共同体	 企業倫理	・私たちは従業員を大切に、安全を最優先します。 ・私たちは私たちの共同体をサポートします。 ・私たちは公正に行動し、倫理的にビジネスを遂行します。
	 水	 エネルギーと炭素	 原材料と廃棄物	・私たちは天然資源を大切に使います。 ・温室効果ガス排出量の継続的削減に取り組んでいます。 ・地域の環境を尊重します。
	 顧客	 供給元	 投資家	・私たちはお客様に安全性と生産性の可決策を提供します。 ・私たちはサプライヤーにも同じように高い基準を求めます。 ・長期的な持続可能な成長で投資家に報います。

Ansell GUARDIAN® : 安全性とパフォーマンスを最大化

安全性を重視して業績を向上させます

Ansell GUARDIAN® は、企業が安全性、生産性、コストパフォーマンスを向上させるために、適切な個人用保護具対応策を選択するための当社独自のサービスです。

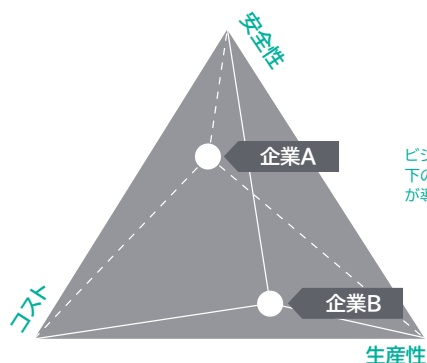


ビジネスの目的に応じて、以下の対応策の1つまたは複数が導入されます。

統合されたアプローチ

Ansell GUARDIAN® は、産業界や医療機関と提携し、今日の PPE 環境における課題に取り組み、重要な安全性とビジネスの改善を実現します。

安全性/コンプライアンス

パーソナライズされたリスク管理ソリューション(産業および化学)およびデータを活用した推奨

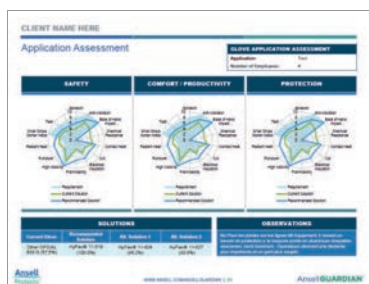

安全性およびコンプライアンスの向上

生産性


PPE供給を最適化し、生産性を向上させ、無駄をなくすための最良の事例の提案



生産性の向上

コスト


業績改善/財務の進捗を測定する7つのコストドライバーにわたって実施

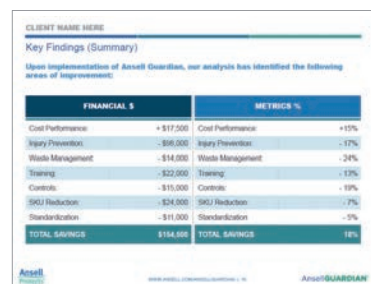

コストの削減

Ansell GUARDIAN®

どのようなプロセスなのか？ Ansell GUARDIAN® は、最も関連性の高い分野に焦点を当てることで、お客様のビジネスに最もインパクトのある最良の事例を提案することができます。Ansell GUARDIAN® は、単一のアプリケーションまたはサイト全体、ローカルまたはグローバルに実装することができます。また、様々なサイトのデータを統合することも可能です。

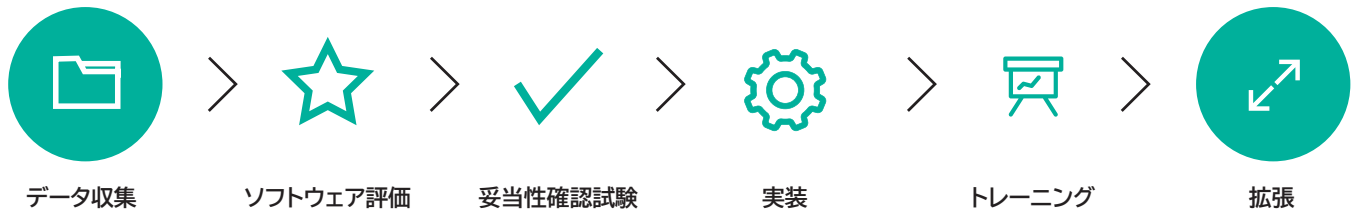

実績

件数: 2010年以降、12,000件以上の査定を実施

結果: 2014年7月以来、私たちの提言は平均65%の負傷削減をもたらし、顧客は製品スタイルを平均25%削減し、私たちは合計1億4,800万米ドル(平均6万5,000米ドル)を企業に節約させた。

範囲: 55ヶ国以上

技術: 最先端かつ独自のテクノロジーとアナリティクスを持つ業界トップ企業

私たちの行動原則

パートナーシップ: 私たちは、安全ソリューションを提供する一方で、PPEに関連する業務とパフォーマンスを分析、基準の設定、実施、改善するための専門知識を共有しています。

適用: ビジネス、産業、アプリケーションにかかわらず、データ解析に基づいた対応策を構築、適用させています。

移転: PPE変更管理イニシアチブを確実に成功させるために、我々の提言を全面的に実施すること

安全性とコンプライアンス

Ansell GUARDIAN®はお客様に対して、従業員の安全性を改善し、安全規制遵守を確保する手助けをします。



傷害事故の
65%削減*



6,400件の
重大記録災害を
削減*



応急手当による
負傷者9,200人
減少*

生産性

Ansell GUARDIAN®はお客様が効率やパフォーマンスを向上させ生産性を完全させることができるPPE対応策を見出す手助けをします。



参考文献を
2,300削減*



製品スタイルを
25%削減*



品目を
10%削減*

コスト

Ansell GUARDIAN®はお客様に対して、傷害とフォローアップ費用を削減し、コストパフォーマンスを最適化する手助けをします。



標準化による
25%コスト削減*



傷害事故減少による
624万ドルの
コスト削減*



総額1億4800万
ドルの削減*

➤ For more information on Ansell Guardian®, please visit www.ansell.com/services



Worker Experience Innovation


ワーカー・エクスペリエンスを向上させる製品イノベーションにおける100年の経験に基づき、Ansellは他社製品と差別化するさまざまな独自技術を有しています。アンセルによるワーカー・エクスペリエンス・イノベーションは、快適性(COMFORT)、パフォーマンス(PERFORMANCE)、プロテクション(PROTECTION)の3つのベネフィットに基づくイノベーション・プラットフォームに焦点を当てています。

COMFORT TECHNOLOGIES

AQUADRI™ Moisture Management Technology

AQUADRI™は、熱を放散させることで手を乾燥させるか、微細孔に水分を吸い込ませるオープンセルフォーム層によって、あるいはその両方によって、よりドライで涼しく快適なフィット感を実現しています。

サーマルマネージメント特性

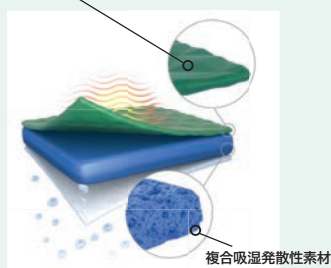


複合吸湿発散性素材

ZONZ™ Comfort Fit Technology

ZONZ™ ニットイング・コンフォート・テクノロジーは、厳選された糸を使用し、ニット構造を変化させることで、グローブ全体のフィット感を最適化し、手の動きを向上させることで、高い器用さと疲労の軽減を実現しています。

オープンウィーブゾーンが 通気性と操作性を向上

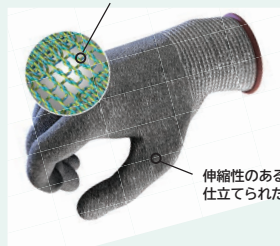


伸縮性のある生地で作られたフィット感

PERFORMANCE TECHNOLOGIES

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

ANSELL GRIP™テクノロジーは、乾燥した、油性の、あるいは濡れた工具や材料をグリップするのに必要な力を最小限に抑えるコーティング処理で、手や腕の疲労を軽減し、操作性、安全性、生産性を向上させます。

多孔質で輪郭のある コーティング処理

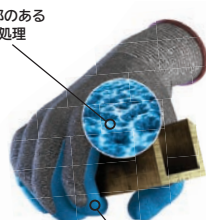


工具や材料の安全な
ハンドリング

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

ERGOFORM™は、Ansellが反復作業中の筋骨格系の健康をサポートする安全ソリューションとして設計し、作業員のパフォーマンスを向上させることを可能にする技術です。

関節、靱帯、腱への 負担を軽減するデザイン

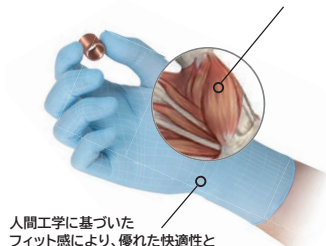


人間工学に基づいた
フィット感により、優れた快適性と
最大限の可動域を確保

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

FORTIX™テクノロジーは、弾力性のあるポリマーを手袋のコーティング全体に、または目標とする摩耗の激しい部分に配合することで、コーティング性能を高め、作業者の快適性を向上させながら手袋の寿命を延ばします。

薄く耐久性のある 水性コーティング

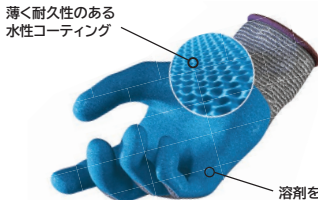

溶剤を含まない
清潔な手袋

PROTECTION TECHNOLOGIES

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

INTERCEPT™ Cut Resistant Technologyは、人工繊維、合成繊維、天然繊維を高性能糸に混紡することで、切創の危険性がある対象部位に高いカットプロテクションを提供するとともに、優れた快適性と高い操作性を実現しています。



高強力人工繊維


ソフトで
快適な
混紡糸

フレキシブルな
超軽量スタイル

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

RIPEL™テクノロジーは、オイル、潤滑油、化学薬品などの液体が着用者の肌に触れるのを防ぐ、撥水性の表面バリアです。


撥水コーティングは、オイル、潤滑剤、 化学薬品、液体との接触に対する バリアを作ります。

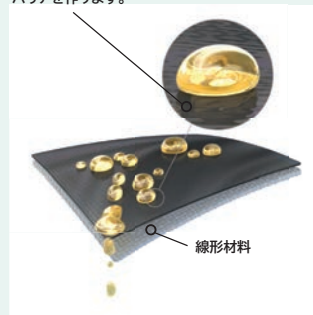

線形材料

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

TNT™は独自のポリマー配合で、さまざまな危険化学物質に対して優れた防滴性を発揮し、ソフトで快適な感触で耐久性のあるプロテクションを提供します。

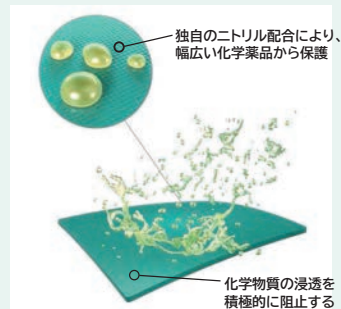

独自のニトリル配合により、
幅広い化学薬品から保護

化学物質の浸透を
積極的に阻止する

※その他テクノロジーは、当社ホームページの商品詳細ページからご覧ください

ANSELLは、幅広い産業用途で作業員のニーズをカバーする包括的な保護ソリューションを提供しています。

機械的防護: 労働者は、日常的な作業において、切り傷、擦り傷、刺し傷から機械的に保護される必要があります。アンセルは、様々な産業や用途における作業員のニーズに対応するため、衝撃や火災から保護するソリューションとして、機械用手袋を包括的に提供しています。

化学防護: すべての危険な化学薬品に耐性を持つ素材はなく、化学薬品にさらされるリスクは、液体の飛沫から完全な浸漬まで幅広い。適切な化学保護具を選択するには、作業環境とこれらの化学物質を管理する規制を理解する必要があります。アンセルは、あらゆる環境で作業者を保護する適切な化学手袋を提供しています。

身体防護: 適切な身体保護具を選ぶには、作業環境と有害物質への暴露に対する規制を理解する必要があります。アンセルは、軽い飛沫からガスタイトスーツまで、包括的な防護服を提供しています。

ブランド	カテゴリー	ポジション	特徴
ACTIVARMR®	機械的防護/ 手指・身体防護	ANSELLが提供しているActivArmр®個人防護具は予測不可能なリスク環境に特化した防護を提供するために設計・デザインされています。	- あらゆる条件下での視認性 - 耐熱性 - 難燃性 - 耐衝撃性 - 耐振動性
AlphaTec®	化学防護/ 手指・身体防護	手指防護具と防護服は、快適性、性能、防護性能の理想的なバランスを提供するために最適化され、産業管理リスク環境で働く労働者に適しています。	- マルチデューティーセクション - 水分管理 - 対応レンジ - 非対応範囲 - ウェット/ドライグリップの選択 - 幅広いポリマーの選択
HyFlex®	機械的防護/ 手指・身体防護	HyFlex®手袋と袖は、柔軟性と性能の最適なバランスを提供します。管理されたリスク環境用の高度な機械的保護	- 耐摩耗性と耐切創性 - 多目的 - マルチデューティー - 撥油性 - 超軽量
MICROFLEX®	化学防護/ 使い捨て	Microflex®使い捨て手袋は、優れた保護性能を提供し、使い捨て手袋の性能の限界を押し広げ、生産性を向上させることで、競合他社を凌駕するように作られています。	- カラーバリエーション - 多様なスタイルバリエーション - マルチウェイト - 滅菌/未滅菌 - 幅広いポリマー選択
TouchNTuff®	化学防護/ 使い捨て	TouchNTuff®使い捨て手袋は、ウェットおよびドライの産業用、ラボ用、管理された環境で優れた触感と高い弾力性を発揮します。	- カラーバリエーション - 多様なスタイルバリエーション - マルチウェイト - 滅菌/未滅菌 - 幅広いポリマー選択
BioClean™	クリーンルーム用	制御されたクリーンルーム環境のための保護ソリューションを提供します。	- 滅菌用製品の充実したラインナップ - 滅菌手袋 - 使い捨て防護服 - 曇り止めゴーグル - クリーンルーム用フェイスマスク - 独自のISOクラス4&5のクリーンルームで処理された高品質の製品

防護手袋およびスリーブのヨーロッパ規格

ヨーロッパで販売されているアンセルの手袋とスリーブは、欧州連合の個人用保護具指令（PPE 89/686/EEC）および関連するEN規格に従って認証され、CEマークが付けられています。2018年4月から2019年4月にかけて、新しいPPE規則2016/425に従ってPPE製品の再認証を行いました。アンセルの手袋およびスリーブの多くは欧州規格に準拠しています。

EN 388 - 機械的保護							
この規格は、摩擦、刃物による切り刺し傷、引き裂きなどの物理的・機械的な侵襲に対して、あらゆる種類の保護手袋に適用されます。							
性能レベル		1	2	3	4	5	
 EN 388:2003 abcd	a 耐摩耗性（サイクル）	100	500	2000	8000	－	
	b 耐切断性（クーベ試験／指数）	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
	c 引裂抵抗（ニュートン）	10	25	50	75	－	
	d 穿刺抵抗（ニュートン）	20	60	100	150	－	
EN 388:2016（a-f）に準拠した拡張性能レベル評価		A	B	C	D	E	F
 EN 388:2016 abcdef	e EN ISO 耐切断性（ニュートン）	2	5	10	15	22	30
	f EN 耐衝撃性	PASS or FAIL					

注：レベル X は、上記の a ～ e にも適用可能で、“検査対象外”または“該当なし”を意味します。

EN 388:2016:旧EN 388:2003規格からの主な変更点

1. 摩耗性

新しい摩耗紙を試験に使用。

2. 切断

くすみが発生するかどうかを判定するクーベ試験の新しい手順。くすみが発生した場合、新しい EN ISO 13977 試験方法が基準となり、クーベテストは指標となります。

3. 衝撃

衝撃保護が要求される領域への試験方法。“p”は合格を意味し、不合格の場合はコードが適用されない。

EN ISO 374 - 化学物質保護および / または微生物保護

この規格は、化学物質および / または微生物からユーザーを保護する手袋の機能を規定しています。

微生物

EN 374:2003



EN level ≥ 2

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

旧：液体浸透性の AQL（Acceptable Quality Level）。指数数値が高いと劣り、低いと良い。手袋は水漏れテストと空気漏れテストに合格する必要がある、このテスト方法は新しい EN ISO 374 規格と変わりません。

新：バクテリアと真菌からの保護テストに加え、各手袋は新しいウイルス浸透テストでウイルスからの保護もテストできます。

1

2

3

4.0

1.5

0.65

化学防護

EN 374:2003



XYZ

EN ISO 374-1:2016



Type C

EN ISO 374-1:2016



Type B

EN ISO 374-1:2016



Type A

UVWXYZ

旧：このリストから少なくとも3つの化学物質について、30分以上の破過時間（XYZは、グローブが30分以上の破過時間を得た、これらの化学物質のうち3つのコード文字を表す。）

新：タイプC リスト中の少なくとも1つの化学物質に対して、少なくともレベル1の性能(10分以上)-カフもテストされる*。

タイプB リスト中の少なくとも3種類の化学物質に対し、少なくともレベル2の性能(30分以上)-カフもテストされる*。

タイプA 化学物質リスト上の少なくとも6種類の化学物質に対して、少なくともレベル2の性能(30分以上)-カフもテストされる*。

A. Methanol
B. Acetone
C. Acetonitrile
D. Dichloromethane
E. Carbon Disulphide
F. Toluene

追加化学物質
M. Nitric acid 65%
N. Acetic acid 99%
O. Ammonium hydroxide 25%

G. Diethylamine
F. Tetrahydrofrane
i. Ethyl acetate
J. n-Heptane
K. Sodium hydroxide 40%
L. Sulphuric acid 96%

P. Hydrogen Peroxide 30%
S. Hydrofluoric acid 40%
T. Formaldehyde 37%

性能レベル

0

1

2

3

4

5

6

時間（分）

<10

10

30

60

120

240

>480

 ビーカーアイコン（低耐薬品性 / 防水）は廃止された。

*グローブが 40cm 以上の場合のみ

EN 420 - 一般的要求事項



このピクトグラムは、使用者が「使用説明書」を参照する必要があることを示しています。

注：CE マーキングは、製品が欧州連合（EU）の消費者、安全、環境に関する要求事項を満たしていることを証明する必須の適合マークです。

EN 407 - 熱防護

	性能レベル	1	2	3	4
	A. 燃焼熱 (炎の後、グロータイムの後)	< 20 secs no requirement	< 10 secs < 120 secs	< 3 secs < 25 secs	< 2 secs < 5 secs
	B. 熱との接触 (接触温度と限界時間)	100 °C > 15 secs	250 °C > 15 secs	350 °C > 15 secs	500 °C > 15 secs
	C. 対流熱 (伝熱遅延)	> 4 secs	> 7 secs	> 10 secs	> 18 secs
	D. 輻射熱 (伝熱遅延)	> 7 secs	> 20 secs	> 50 secs	> 95 secs
	E. 溶けた金属の水滴 (滴数)	> 10	> 15	> 25	> 35
	F. 大量の溶融金属 (重さ)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 511 - 防寒

	性能レベル	0	1	2	3	4
	A. 対流寒冷 (断熱材 m ² 当たりの ITR, C/W)	< 0.10	0.10 < < 0.15	0.15 < < 0.22	0.22 < < 0.32	0.30 <
	B. 寒冷接触 (断熱材 m ² 当たりの抵抗, R)	R < 0.025	0.025 < R < 0.050	0.050 < R < 0.100	0.100 < R < 0.150	0.150 < R
	C. 浸水試験	合格	不合格	—	—	—

注：0 が最低評価、4 が最高評価

EN 421 - 放射能汚染および電離放射線

	放射性物質との直接接触に有効なグローブ		放射線の直接暴露に有効なグローブ (X線、α・β・γ線、中性子線)
---	---------------------	---	--------------------------------------

EN 60903 - 電気絶縁グローブ

	電圧から保護する手袋
---	------------

EN 14605:2005+A1:2009

	液体化学薬品に対する保護衣 - 液体密閉(タイプ3)またはスプレー密閉(タイプ4)の接続部を持つ衣類の性能要件(身体の一部のみを保護するものを含む)(タイプPB [3]およびPB [4])
---	--

新しい個人用保護具に関する規定への対応

2月、欧州理事会と欧州議会は、欧州委員会が提案した新PPE規則を修正し、承認した。規則2016/425は、指令89/686/EECに代わり、新たな翻訳段階を経て2018年4月21日に発効する。

この新規制は、熱に対する保護として個人で使用するもの（例：オープン用手袋）、およびPPE製品を販売する販売業者に適用される。また、内部生産管理システムや最長5年間の有効な型式試験証明書の必要性など、追加的な適合性評価要件が規定されている。同規則はまた、サプライチェーンに関与するすべての経済事業者に対する具体的な要求事項や、使用説明書や適合宣言書に関連する追加文書要求事項も規定している。

新しいPPE規則では、リスク定義に基づく3つのカテゴリーが規定された。



カテゴリー I 最小限のリスク

低レベルのリスクからの保護を提供する単純な設計のPPE（例えば、清掃用手袋）については、製造者がPPEを自ら試験し、認証することが認められている。

カテゴリー II

カテゴリー I およびカテゴリー III のリストに記載のあるもの以外のリスク

中間的なリスク（例えば、切り傷、刺し傷、擦り傷の保護が必要な一般的な取り扱い手袋）を保護するために設計されたPPEは、独立した試験を受け、認証機関による認証を受けなければならない。CEマークを発行できるのは、これらの認定機関のみです。適切なCEマークがなければ、PPEを販売したり使用したりすることはできません。認証機関にはそれぞれ識別番号があります。PPEに添付される使用説明書には、製品を認証する認証機関の名前と住所を記載しなければなりません。



カテゴリー III 死亡または健康への不可逆的な損傷を引き起こす可能性のある、非常に重大なリスク

また、最高レベルのリスク（化学物質、生物剤、感電、活作業など）から保護するために設計されたPPEは、ノーティファイドボディによる試験と認証を受けなければならない。さらに、製造の均質性を保証するために製造者が使用する品質保証システムは、独立した検査機関によって検査されなければならない。

この評価を実施する機関は、使用説明書にも記載され、CEマークと並んで表示される番号で識別されなければならない。この例では、0493がCentexbelを表している。

COMPLYING WITH OTHER REGULATIONS

Ansell and REACH

All Ansell products fully comply with the legal requirements of REACH and its amendments. We ensure the pre-registration of all required chemicals used in our products and are actively looking for ways to replace SVHC chemicals subject to regulation, prior to their restriction or ban.

The Ansell REACH statement can be found on our website and more information is available through the Ansell customer service or regulatory department.

Authorised Economic Operator (AEO) certification

Ansell Healthcare Europe has been granted AEO as the company is demonstrating the standards for customs compliance, appropriate recordkeeping, financial solvency and, where relevant, appropriate security and safety standards. This certification identifies Ansell as a reliable partner in all our dealings with other companies, but more particularly with customs locally and abroad, speeding up our supply chain with less controls, making it safer as more companies prioritise on inspections and permit requests as well as mutual recognition with C-TPAT, the US' Customs-Trade Partnership Against Terrorism.

防護手袋および防護スリーブについて

特定の用途で最適な性能を確保するため、アンセルの保護ソリューションはそれぞれ独自の特性を持って設計されています。幅広い構造、カフスタイル、およびサイズの幅広いタイプにより、作業に適した手袋および/またはスリーブを入手することができます。ここでは、これらの特性を素早く理解することができます。

Glove cuff style

カフ	特徴
	ビーズ状 液滴からの防護を高めるとともにカフの強度を向上させる。
	ゲートル 破片を通さない袖口は、必要に応じてロールバックし、ガントレットとして着用することもできる。
	ガントレット 保護と長さ(通常10cm以上)を追加し、手首を最大限に動かせるようにする。
	のこぎり状 衣服によりフィットし、確実なフィット感を保証するワンピース構造。
	ニットリスト 手袋を固定し、異物の侵入を防ぐ設計。
	Nitragold™ 標準的な安全カフに比べ、液体、油、汚れからの保護が非常に優れている。
	ジグザク状 伝統的なカフ
	セーフティ 手首を保護し、着用を容易にするために、手首部分に保護材を延長する(通常7cmの長さ)。
	スリッポン 簡単な着脱をサポート。
	ストレート 液体の流出から前腕を保護するため、長さを追加。
	Tuff-Cuff™ II 何度洗濯しても袖口の形状を維持し、手袋を適切な位置に保ち、デリケートな手首部分を保護します。
	Velcro® 調節可能なリストクローザー


Glove and sleeve construction

構造	特徴
ニット・アンディップ	フィット感が高いため、手先が器用に動き、生産性が向上する。シームレス構造により、縫い目による手荒れを防止。
ニット・ディップ	コーティングはニットライナーに耐摩耗性、グリップ性、撥液性を与え、性能と保護性を向上させる。
カットソー、含浸加工、コーティング加工	生地を合成コンパウンドに浸漬または含浸させることで、グローブはより強くなり、耐摩耗性が増す。
サポート付き	ニットまたは織布のライナーを手袋のコンパウンドに浸すことによって作られ、ライナーはコンパウンドを「支え」、強度を増す。
サポートなし	ハンドフォームは、ライナーやファブリックを使用せず、グローブコンパウンドに直接浸漬される。
裏地あり	裏地付き手袋は、ニットまたは織物のライナーを内蔵し、機械的保護と汗の管理を向上させる。
裏地なし	裏地なしの手袋は、内側にニットまたは織物のライナーがない。一般的に、手先の器用さや触感が高いが、機械的な危険に対する耐性は低い。
裏起毛	フロック裏地付き手袋は、内側に短い綿繊維のコーティングが施されており、手袋の着用を容易にし、快適性を向上させる。

正しいグローブサイズを見つける

グローブの快適性を確保するためには、正しいサイジングが不可欠です。サイズを決定する理想的な方法は、洋裁用の布テープです。このテープで、手のひらの最も広い部分の円周をミリメートル単位で測ります。その寸法をここに示した表と照らし合わせてください。ほとんどのニット手首の手袋は、サイズを識別するために以下のように色分けされています。


	XS	S	M	L	XL	XXL
サイズ	6	7	8	9	10	11
手の周囲	152 mm	178 mm	203 mm	229 mm	254 mm	279 mm
カフの色	紫	赤	黄	茶	黒	淡青

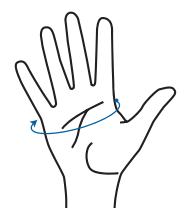

Note: This chart is intended to be used as a guide only.

使い捨て手袋のサイズチェック


1. 右手の手のひらを下にして、指をそろえて図に置いてください。
人差し指の左端を黒い線から超えないように合わせ、親指の股を図に合わせます。
2. 手の右端にそって、手のひらに見える色の線を確認します。これがあなたのサイズです。

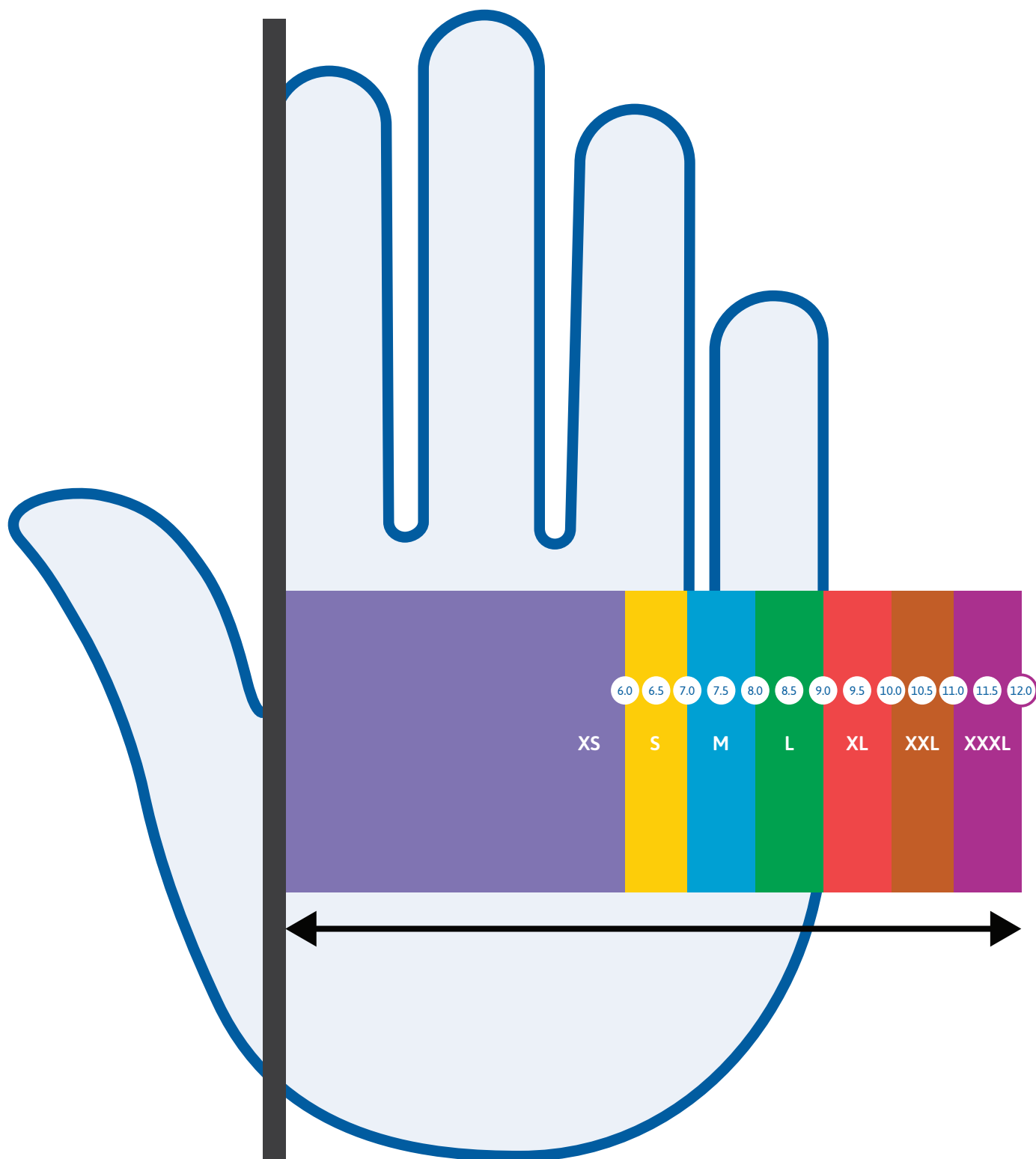

ニット系グローブのサイズをチェック

右手の手のひらを下にして、指をそろえて図に置いてください。
人差し指の左端を青い線を超えないように合わせ、親指の股を図に
合わせます。

手の右端にそって、手のひらに見える色の線を確認します。これが
あなたのサイズです。

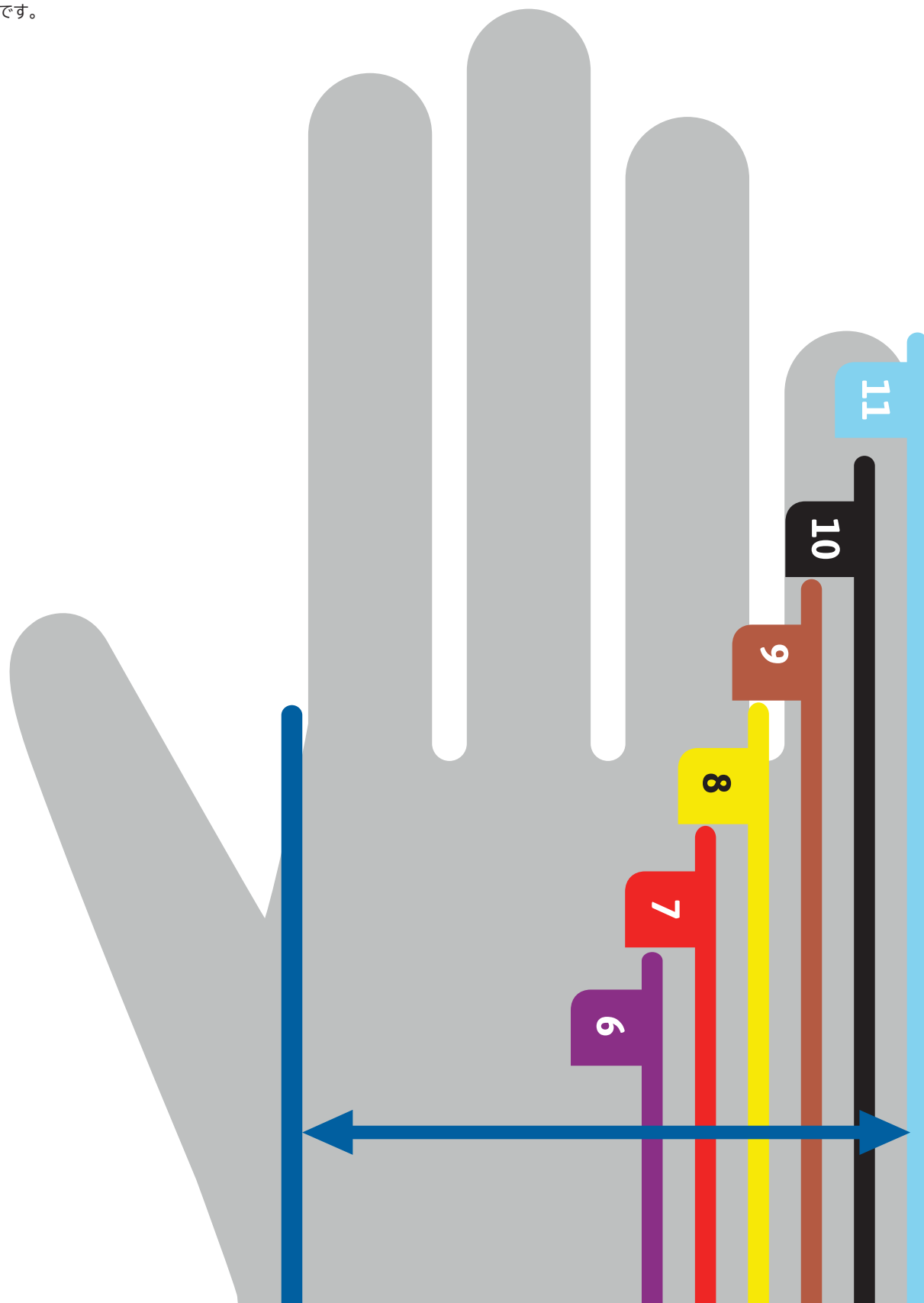

ライナー素材

ライナー素材	利点	特徴
アクリル	・快適 ・温度防御	・ソフトで暖かく快適 ・優れた吸水性
コットン	・快適 ・温度防御	・低刺激性、ソフト、吸収性、快適性
Dyneema®/ポリエチレン	・耐切創性	・高い耐切創性と耐摩耗性 ・低リンティング ・清涼感
Dyneema® Diamond Technology	・耐切創性	・極めて細い繊維で優れた耐切創性を実現
グラスファイバー	・耐切創性	・耐切創性、軽量
INTERCEPT™	・耐切創性 ・快適	・高い耐切創性 ・ソフトで快適 ・高い操作性
Kevlar®	・快適 ・熱防御	・多用途に使用でき、切断や熱による危険から保護する。
レザー	・耐摩耗性 ・熱防御	・非常に優れた耐摩耗性 ・耐熱性
Lycra®/Spandex	・快適	・抜群の伸縮性 ・アレルギーのリスクを軽減
ナイロン/ポリアミド	・快適	・強力な耐摩耗性 ・低リンティング
ポリエステル	・快適	・優れた粘着性 ・耐摩耗性
ステンレス	・耐切創性	・非常に強く、耐切創性に優れている
Thermolite®	・温度防御	・寒冷環境における優れた断熱性

コーティング素材

コーティング素材	特徴
ニトリル	・耐摩耗性 ・撥液性 ・ストライクスルーなし
ニトリルフォーム	・通気性 ・耐摩耗性 ・ドライグリップ
ラテックス	・ドライ&ウェットグリップ ・耐液性
ネオプレン	・ドライ、ウェット、オイルグリップ
ポリウレタン	・ドライグリップ ・非常に優れた耐摩耗性
水性ポリウレタン	・ドライグリップ ・より環境に優しい(溶剤ベースのPUと比較して) ・ストライクスルーがない
PVC	・優れた耐摩耗性 ・ドライ、ウェット、オイルグリップ

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・・・・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年10月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・・・・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。